





Software EasyTouch

SET-07

Variable

EasyTouch Variable – Freie Variablen

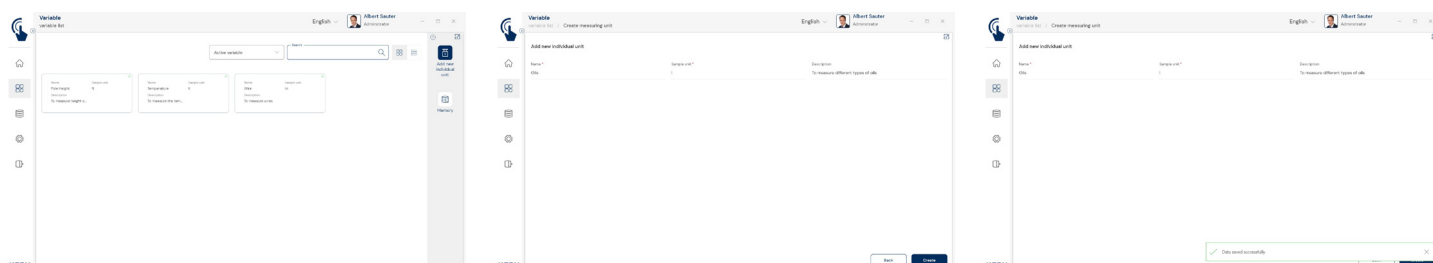

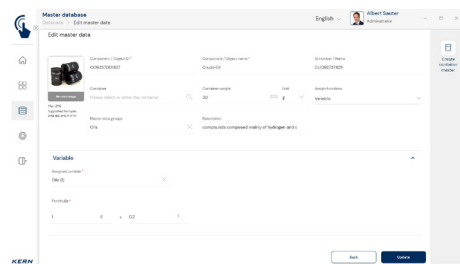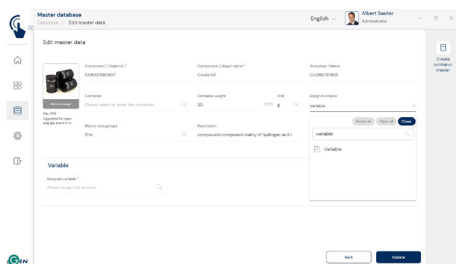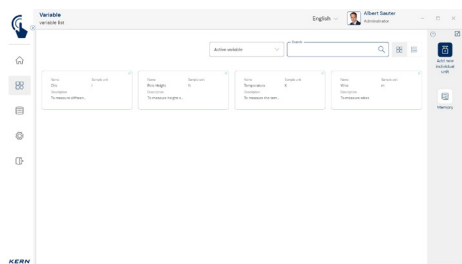

Merkmale

- Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Mit diesem Set können unterschiedliche physikalische Eigenschaften von Wägeobjekten als Maßeinheit definiert, gespeichert und in anderen Programmteilen verwendet werden, die in einem linearen Zusammenhang mit deren Gewicht stehen. Dies vereinfacht z. B. die Darstellung bei der Gewichts- oder Stückzahlbestimmung nach Kabel-, Faden- oder Drahtlänge, Papier-, Fliesen- oder Stofffläche, spezifischem Gewicht von Flüssigkeiten oder auch ganzen Baugruppen wie bestückten Leiterplatten, fertig montierten Artikeln etc.
- Das Wiegeergebnis wird automatisch in die definierte Zieleinheit umgerechnet und ausgegeben wie dargestellt
- Eine neue Umrechnungsformel kann leicht und schnell eingegeben werden. Diese kann sich auf „g“ oder „kg“ beziehen. Zusätzlich kann die Formel mit einem Namen und einer Beschreibung versehen werden. Die Einheit des umgerechneten Ergebnisses kann ebenfalls frei definiert werden
- Einmal hinterlegte Formeln können leicht ausgewählt und angewendet werden
- Einmal angelegte Einheiten, wie z. B. m, l oder qm, können jedem beliebigen Stammdatensobjekt zugeordnet werden. Ebenso individuell kann die Umrechnungsformel vom gewogenen Gewicht auf die neue Einheit je Objekt eingegeben werden. Damit wird das Wiegeergebnis solcher Stammdatensobjekte in der individuellen Einheit richtig berechnet und ausgegeben, z. B. 100 g = 55 cm Draht

- Einmal angelegte Einheiten, wie z. B. m, l oder qm, können jedem beliebigen Stammdatensobjekt zugeordnet werden. Ebenso individuell kann die Umrechnungsformel vom gewogenen Gewicht auf die neue Einheit je Objekt eingegeben werden. Damit wird das Wiegeergebnis solcher Stammdatensobjekte in der individuellen Einheit richtig berechnet und ausgegeben, z. B. 100 g = 55 cm Draht
- Zentraler Stammdatenspeicher: Im Stammdatenspeicher kann ein möglicher Tara-Wert der typischen Verpackung, Box oder des Containers hinterlegt werden, der dann automatisch vom Wiegeergebnis abgezogen wird
- ID-Sicherung: Die „ID-Sicherung“ bietet die Möglichkeit, jedes gewogene und gespeicherte Klassifikationsergebnis mit einer eindeutigen ID-Nummer (Dynamic Object ID) und einem ID-Namen (Dynamic Object Name) zu versehen. Die Speicherung kann halbautomatisch oder vollautomatisch durchgeführt werden und zwar immer dann, wenn die Waage entlastet und anschließend wieder belastet wird. Das bedeutet, dass der Benutzer bei Massenspeicherung keine Tasten betätigen muss und effizient arbeiten kann
- PC-Druckfunktion und Barcode-Scanfunktion: Durch den Betrieb von KERN EasyTouch in einer Windows®- oder einer Android™-Umgebung kann die volle PC/Tablet-Zubehörfunktion genutzt werden. Insbesondere Standard-Windowsdrucker und PC-Etikettendrucker können umfangreiche Zählergebnisse oder kompakte Klebe-Labels mit dem Zählergebnis nach individueller Festlegung ausdrucken

Optionen

- Zentrale Datenspeicherfunktion Save Server (SET-10) zur zusätzlichen Speicherung aller Messdaten in einem zentralen, lokalen Serververzeichnis. Hier werden die Messdaten aller über EasyTouch angeschlossenen Wiegesysteme sowie aus allen installierten EasyTouch-Funktionen gespeichert. Speziell für Benutzer mit mehreren Wiegesystemen besteht hierdurch der Vorteil, alle Wiegedaten in nur einer Datenbank konsolidiert zu haben und einzelne Messdaten von verschiedenen Waagen in nur einer Tabelle suchen zu müssen. Die Save Server-Datenspeicherung ist ebenfalls manipulationssicher und unveränderlich

Technische Daten

- Lizenzumfang: Eine Lizenz kann auf bis zu vier Endgeräten (PC, Laptop, Tablet) gleichzeitig und unabhängig betrieben werden
- Benutzer: In einer Lizenz können unbeschränkt viele Benutzer angelegt werden
- Waagen: Es können beliebig viele Waagen in einer Lizenz angelegt und betrieben werden
- Kommunikation Waagen-Endgerät: Die Waage(n) können per serielltem Anschluss, USB, Bluetooth, Ethernet oder per WLAN mit dem PC, Laptop oder Tablet kommunizieren

STANDARD



OPTION

