

# KERN SCD-4.0-PRO-UPG

Fecha: 29.01.2025



Software Balance Connection: Enlace de descarga de la actualización de SCD-40 a SCD 40-PRO

### CONTACT

 Dirección

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany






 Teléfono y fax

Teléfono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0  
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Correo electrónico : info@kern-sohn.com  
Web : www.kern-sohn.com

## ESCAPARATE DE PRODUCTOS

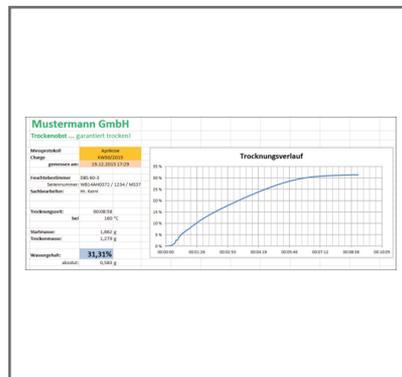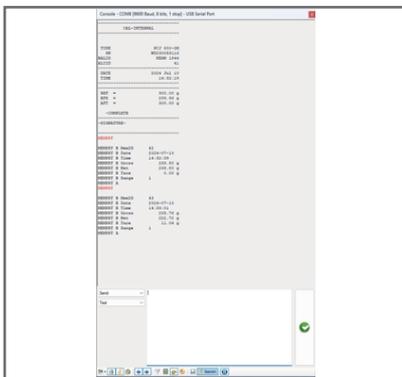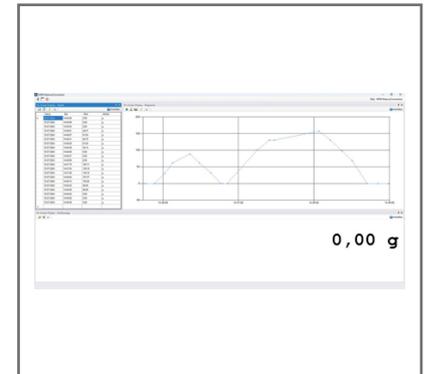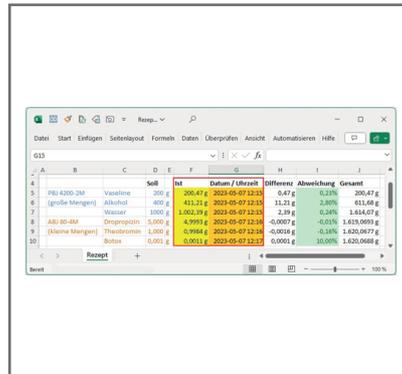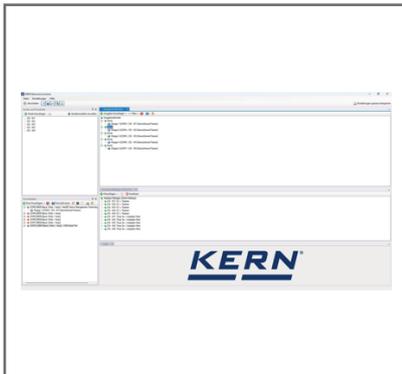

ESPAÑOL

## DESCRIPCIÓN

- Enlace de descarga de la actualización de SCD-40 a SCD 40-PRO: Se requiere el software BalanceConnection SCD-40
- Para los sistemas operativos Windows 10 11
- Se requiere NET Framework 481
- Se requieren derechos de administración completos para la instalación
- Compatible con balanzas e instrumentos de medición con USB, RS-232 RS-485 Bluetooth, red LAN o WiFi (TCP/UDP/IP)
- Gran flexibilidad de formatos y diseño de salida (en cualquier orden, posicionamiento, formato y redondeo), sobre todo y opcionalmente, se puede registrar la fecha y la hora para cada valor transmitido
- Se puede conectar cualquier número de dispositivos/ interfaces, así como registrar varias balanzas de forma simultánea y sincronizada
- Consultas por teclado y programadas por tiempo de valores medidos o activación de funciones del dispositivo, también para registros permanentes

- Los protocolos de interfaces de las balanzas KERN vienen predefinidos (configuración estándar)  
Compatibilidad con otras balanzas gracias a una configuración flexible
- El cable de interfaz correspondiente se incluye al pedir la balanza
- Muchas y diversas posibilidades de registro y transmisión:- MicrosoftR Excel / Access / Word en primer o segundo plano- Otras aplicaciones de Windows (con teclado de software), como p ej programas de expedición o sistemas ERP (SAP, Sage, ...)- Registro de archivo (p ej como texto o archivo CSV)- Transferencia a servicios Web HTTP/formularios de la red
- Características adicionales de la versión BalanceConnection PRO::- Base de datos ODBC / SQL como servidor SQL o MySQL- Transferencia a servicios Web HTTP / formularios de la red- Histograma- Permite conectar balanzas médicas a los sistemas informáticos de consultas médicas mediante el protocolo de GDT de transferencia de datos a periféricos, así como con el protocolo HL7- Ejecución de programas, scripts mediante líneas de comandos de libre definición- Secuencias de comandos- Definición de las condiciones (conditions) para determinados eventos y la reacción a ellos- Filtro para detección de estabilidad (transferencia configurable de los valores)- Mantenimiento y gestión central de la configuración, p ej en la red - Indicaciones en pantalla con interfaz del usuario configurable para un manejo flexible de la balanza
- Beneficios- El programa ideal cuando se trata de transferir los datos de pesaje captados a un ordenador con Windows- Especialmente adecuado para la integración profesional de los sistemas de pesaje en redes existentes con una elevada exigencia a la transferencia y procesamiento automatizados de los datos, para la conexión de bases de datos- Registro automático, p ej en ensayos de larga duración- Software de laboratorio que cumple con los requisitos de GLP- Con una licencia se pueden utilizar tantas balanzas como se quiera en un ordenador o estación de trabajo- Se puede utilizar en cualquier aplicación y sector económico
- Alcance de suministro: Enlace de descarga para 1 licencia

## ESPECIFICACIÓN

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	SCD-40-PRO-UPG
Serie de modelos	SCD-40-PRO-UPG
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software
Grupo de productos	BalanceConnection
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio

Código EAN (Modelo)	4045761239968
Fecha de inicio prevista	2020-1HJ
Número del arancel aduanero	85234910

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

### FUNCIONES

Standard
----------

