

BROCHURE PRODUIT

KERN SET-411

Date: 18.03.2025

FRANCAIS

Software EasyTouch SET-411 Hotkeys






EasyTouch Hotkeys - Touches de raccourci et commutateurs externes

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS

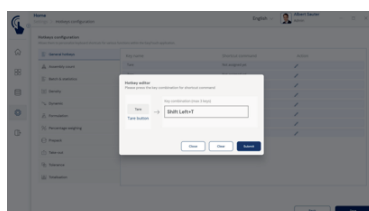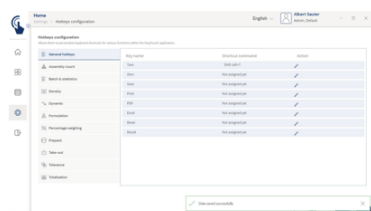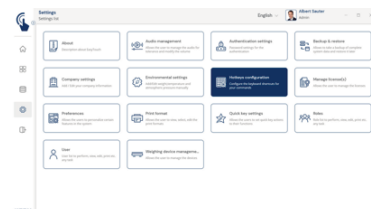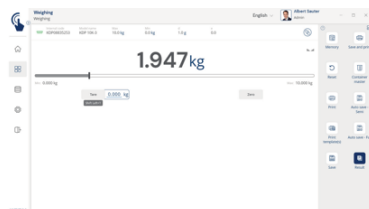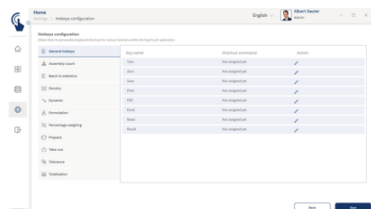

DESCRIPTION

- Remarque : le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set
- Touches de raccourci : Hotkeys permet d'attribuer des combinaisons de touches à tous les boutons d'EasyTouch. Cela simplifie considérablement l'accès aux fonctions fréquemment utilisées, car la navigation fastidieuse avec la souris de l'ordinateur n'est plus nécessaire. Les actions souhaitées peuvent être déclenchées rapidement et directement avec le clavier
- Article en option : Hotkeys est une extension optionnelle d'EasyTouch qui prend en charge toutes les fonctions actives et installées. Veuillez noter que le prix de la fonction supplémentaire ne comprend pas le matériel (interrupteurs, boutons ou pédales)
- Configuration des touches de raccourci : la définition des combinaisons de touches peut être effectuée par l'administrateur du système ou par une personne autorisée. Pour chaque fonction souhaitée, il est possible de définir une combinaison de touches unique et spécifique à l'utilisateur
- Sélection de touches de raccourci polyvalentes : dans EasyTouch, il est possible de définir comme touches de raccourci non seulement des touches d'action spécifiques pour certaines fonctions, mais aussi des commandes de touches générales comme « Enregistrer » ou « Tare ». Celles-ci sont alors applicables dans toutes les fonctions EasyTouch

- Activation par combinaison de touches : la fonction TARE, par exemple, peut être activée facilement et rapidement par une combinaison de touches
- Intégration d'interrupteurs ou de boutons externes : EasyTouch permet d'affecter des combinaisons de touches à des signaux d'appareils HID (Human Interface Devices) externes via USB. Le logiciel peut ainsi être commandé par des interrupteurs externes tels que des boutons d'arrêt d'urgence ou des pédales, ce qui permet un fonctionnement mains libres et une efficacité accrue. Comment ça marche : dans le logiciel de commande de l'appareil USB du commerce, le signal externe est affecté à une combinaison de touches. Celle-ci est reçue par le PC. Le signal y actionne la fonction EasyTouch correspondante

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut



Code article du modèle	SET-411
Model-Serie	ETS
Assortiment	KERN
Type de produit	Logiciel
Groupe de produits	EasyTouch
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 1249738
Numéro de tarif douanier	85234910

Données techniques - Emballage et expédition

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

FONCTIONS

Standard
   
Option