



Dessiccateur avec affichage graphique intuitif et guidage pas à pas de l'utilisateur en 6 langues

Caractéristiques


- Écran graphique LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 11 mm
- 6 touches de raccourci pour un accès rapide aux fonctions principales
- Écran d'accueil :
 - 1 Menu principal
 - 2 Démarrer le séchage
 - 3 Choisir la température de séchage
 - 4 Choisir le programme de séchage

- 5 Réinitialisation/Tare
- 6 Stand-by
- Pendant le séchage:
 - 7 Température actuelle
 - 8 Profil de chauffage
 - 9 Critère de désactivation actif
 - 10 Terminer le séchage
 - 11 Arrêter le séchage
 - 12 Afficher les paramètres de séchage
 - 13 Sélectionner les paramètres de séchage

DE SÉRIE	OPTION
CAL EXT	DAKKS
RS 232	+3 DAYS
GLP	
UNIT	
230 V	
DMS	
1 DAY	

KERN	DLB 160-3A
Lecture [d] Poids/humidité (%)	0,001 g / 0,01%
Portée [Max]	160 g
Reproductibilité pour une pesée 2 g*	0,15%
Reproductibilité pour une pesée 10 g*	0,05%
Affichage après dessiccation (Affichage basculant à tout moment)	
Humidité [%] = Teneur en humidité (M) du poids à l'état mouillé (W)	0 - 100 %
Teneur en matière sèche [%] = Poids à l'état sec (D) du [W]	100 - 0 %
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100 %	0 - 999 %
Poids restant (M)	Valeur absolue en [g]
Plage de température (par intervalles de)	35 °C - 160 °C (1 °C)
Profils de chauffage	Dessiccation standard Dessiccation rapide, préchauffage peut être activée
Critères de coupure	· Coupure libre automatique (perte de poids sélectionnable 0,01mg/30s - 10 mg/30s) · Coupure programmée (1 min - 12 h) · Coupure manuelle par bouton
Édition de protocole	Intervalle réglable de 5 s - 250
Dimensions totales L×P×H	215×345×235 mm
Poids net	4,7 kg
Option Cert. d'étalonnage DAKKS Masse	963-127
Option Cert. d'étalonnage usine Température	964-305

* dépendant de l'application

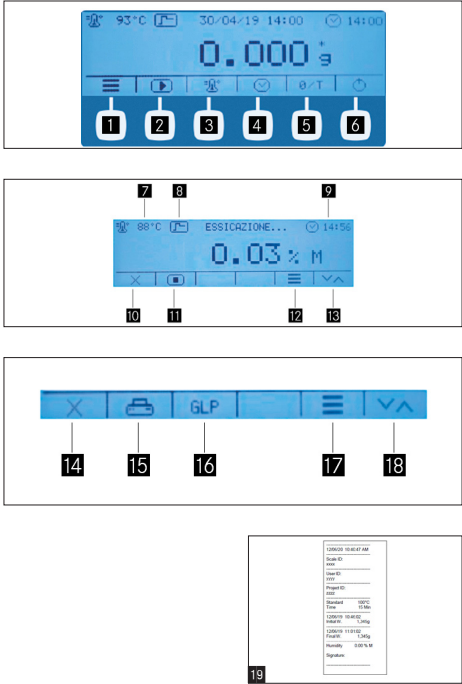

Après la fin du séchage:

- 14 Quitter le programme de séchage
- 15 Imprimer le résultat
- 16 BPL (dés)activer, modifier les paramètres
- 17 Afficher les paramètres de séchage
- 18 Sélectionner les paramètres de séchage
- Lampe halogène en verre quartz 400 W
- Guide d'utilisation en 6 langues : DE, EN, FR, IT, ES, PT
- Tarage automatique au début d'une mesure dès la fermeture du couvercle
- La dernière valeur mesurée reste visible à l'écran jusqu'à la prochaine mesure
- 19 BPL interne : impression des ID de balance, des ID de projet, des ID utilisateur, des valeurs relevées du processus de séchage, etc.
- 10 coupelles pour échantillons incluses
- Housse de protection transparente de série
- Pour chaque dessiccateur KERN, vous trouverez sur Internet un manuel pratique avec de nombreux exemples, des comptes-rendus d'expériences, des réglages et des conseils

Accessoires

- Housse de protection transparente, lot de 5 pièces, KERN ALJ-A01S05
- Coupelles pour échantillons en aluminium, ø 90 mm, lot de 80 pièces, KERN MLB-A01A
- Filtre rond en fibres de verre, grande stabilité mécanique, avec liant organique, lot de 100 pièces, KERN RH-A02
- Jeu d'étalonnage de la température constitué d'un capteur et d'un afficheur KERN DLB-A01N.
- Imprimante thermique, KERN YKH-01
- Imprimante à aiguilles matricielle, pour imprimer les valeurs de pesée sur du papier normal, ainsi approprié à l'archivage à long terme, KERN 911-013