

BROCHURE PRODUIT

**KERN
SET-37**

Date: 18.03.2025

FRANCAIS

Software EasyTouch

SET-37

**Export
Manager**






EasyTouch Export Manager - Exportation automatique et fiable des données de résultats depuis EasyTouch - par ex. pour l'importation dans votre système ERP

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS

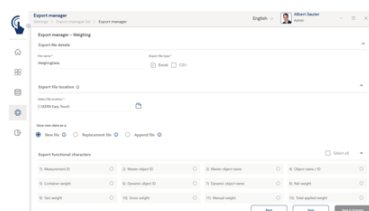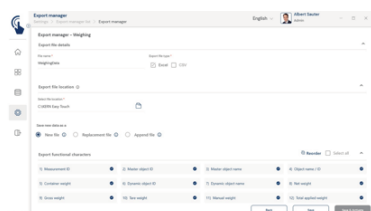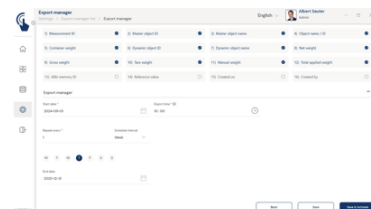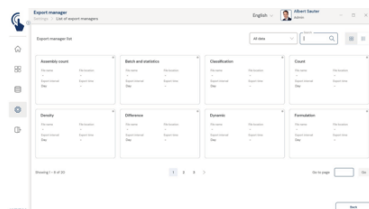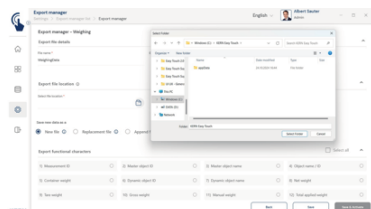

DESCRIPTION

- Remarque : le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set
- Exportation de données : le gestionnaire d'exportation propose une exportation automatique des données à un intervalle de temps qui peut être choisi individuellement. Différents formats de fichiers, tels que CSV ou XLSX, sont pris en charge afin de permettre un traitement fluide des données, par exemple dans les systèmes ERP et PPS
- Emplacement de stockage des données : l'emplacement des fichiers exportés peut être défini librement
- Champs de données : selon la fonction EasyTouch sélectionnée, les champs de données à exporter peuvent être déterminés librement
- Intervalles d'exportation : Les dates et les intervalles pour les exportations sont librement réglables, par exemple une ou plusieurs fois par jour, par semaine, par mois et par an à des moments définis
- Historique des exportations : l'historique du journal d'exportation permet d'accéder à tous les fichiers d'exportation précédents
- SaveServer : utilisez cette fonction pour exporter des données depuis le SaveServer central
- Variantes du fichier d'exportation : vous pouvez choisir entre différentes options d'exportation :
 - a. Exportation vers un nouveau fichier

b. Exportation vers le fichier existant

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	SET-37
Model-Serie	ETS
Assortiment	KERN
Type de produit	Logiciel
Groupe de produits	EasyTouch
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 1476523
Numéro de tarif douanier	85234910

Données techniques - Emballage et expédition

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

FONCTIONS

Standard



Option

