


Software EasyTouch

SET-46

Backup Scheduler

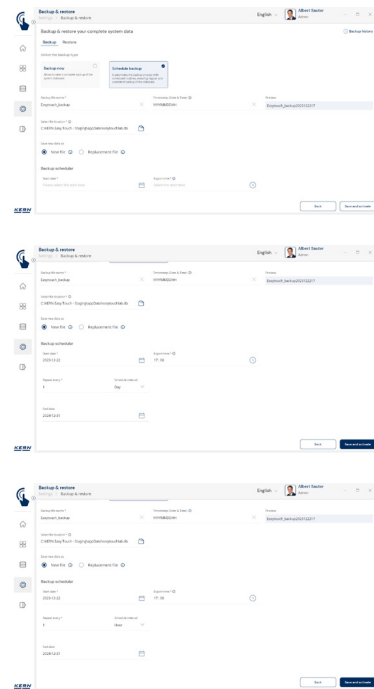

EasyTouch Backup Scheduler – Datensicherung und Wiederherstellung

Merkmale

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Backup Scheduler: Automatisieren Sie Ihre Datensicherungen und profitieren Sie von den durchgehend arbeitenden, geplanten Prozessen, die Ihre wertvollen Informationen im Hintergrund sichern
- Automatische Datensicherungen: Sparen Sie Zeit und Kosten durch automatische Backups in festgelegten Intervallen. Dies sorgt für eine konsistente und zuverlässige Datenhaltung, verringert Ausfallzeiten und minimiert das Risiko von Datenverlust bei Störungen
- Sicherungsdatei-Konfiguration: Benutzer können den Namen der Sicherungsdatei individuell festlegen, einschließlich einer Stammbezeichnung und eines Zeitstempels als Postfix. Auch das Sicherungsverzeichnis und die Art der Sicherung – ob Erstellung einer neuen Datei, Überschreiben einer vorhandenen oder deren Erweiterung – lassen sich anpassen
- Sicherungsintervall: Das Intervall für Backups kann in Stunden, mehrmals oder einmal täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich gesetzt werden
- Sicherungsmeldungen: Jede automatische Datensicherung wird im Sicherungsverzeichnis mit Dateinamen als Link zur Sicherungsdatei angezeigt
- Backup-Historie: Verlauf und Status aller Sicherungen werden protokolliert und sind jederzeit nachvollziehbar
- Wiederherstellung: Im Falle einer Störung lässt sich die zuletzt gespeicherte Sicherung über die „Restore“ Funktion ganz einfach wiederherstellen

STANDARD



OPTION

