

Software EasyTouch

SET-37

**Export
Manager**

EasyTouch Export Manager – Ergebnisdaten automatisch und zuverlässig aus EasyTouch exportieren – z. B. zum Import in Ihr ERP-System

CONTACT**KERN & SOHN GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen






Germany

Telefon : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-Mail : info@kern-sohn.comWeb : www.kern-sohn.com

PRODUKT-SCHAUFENSTER

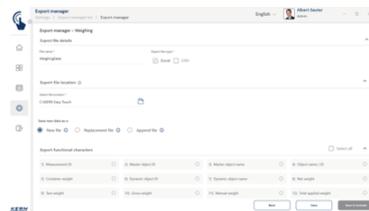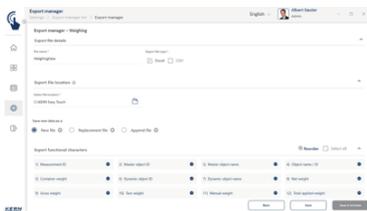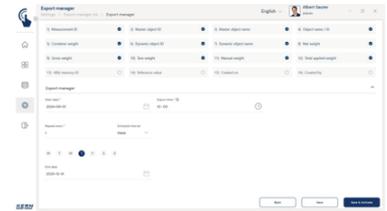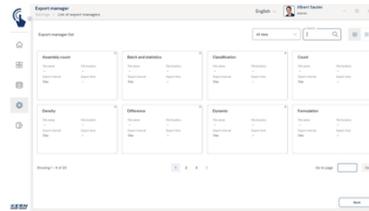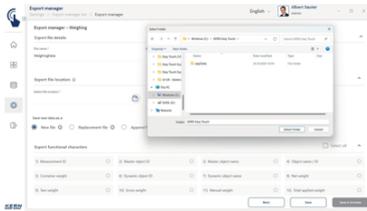

DEUTSCH

BESCHREIBUNG

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Datenexport: Der Export Manager bietet einen automatischen Datenexport in einem individuell wählbaren Zeitintervall. Dabei werden unterschiedliche Dateiformate wie CSV oder XLSX unterstützt, um eine nahtlose Weiterverarbeitung der Daten, beispielsweise in ERP-, und PPS-Systemen zu ermöglichen
- Daten-Ablageort: Der Speicherort für exportierte Dateien kann frei definiert werden
- Datenfelder: Abhängig von der ausgewählten EasyTouch Funktion lassen sich die zu exportierenden Datenfelder frei bestimmen
- Exportintervalle: Zeitpunkte und Intervalle für die Exporte sind frei einstellbar, z. B. ein, oder mehrmals täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich zu festgelegten Zeiten
- Export-Historie: Mit Export-log Historie kann auf alle früheren Export-Dateien zugegriffen werden
- SaveServer: Nutzen Sie diese Funktion für einen Datenexport vom zentralen SaveServer
- Export-Datei-Varianten: Sie können zwischen verschiedenen Exportoptionen wählen:
 - a. Export in eine neue Datei
 - b. Export in die bestehende Datei

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	SET-37
Modell-Reihe	ETS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Software
Produktgruppe	EasyTouch
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L
EAN-Code (Modell)	404576 1476523
Zolltarifnummer	85234910

Technische Daten - Verpackung & Versand

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

FUNKTIONEN

Standard



Option

