

KERN Software BalanceConnection SCD-4.0-PRO

Registrazione o trasmissione professionale e altamente flessibile dei valori misurati, in particolare anche su Microsoft® Excel o Access

Soll	Ist	Datum / Uhrzeit	Differenz	Abweichung	Gesamt
200 g	200,47 g	2023-05-07 12:15	0,47 g	0,23%	200,47 g
400 g	411,21 g	2023-05-07 12:15	11,21 g	2,80%	611,68 g
1000 g	1.002,39 g	2023-05-07 12:15	2,39 g	0,24%	1.614,07 g
5,000 g	4,9993 g	2023-05-07 12:16	-0,0007 g	-0,01%	1.619,0693 g
1,000 g	0,9984 g	2023-05-07 12:16	-0,0016 g	-0,16%	1.620,0677 g
0,001 g	0,0011 g	2023-05-07 12:17	0,0001 g	10,00%	1.620,0688 g


Trasmissione e modifica
comoda dei risultati di
misurazione, p. es. in
Microsoft® Excel

Scoprite altri dettagli e i
relativi accessori online!

Avete domande?

Il team del nostro centro di competenza
Industria 4.0 è lieto di aiutarvi:
e-mail: etsales@kern-sohn.com

Suggerimento: Oppure scaricate una
versione demo gratuita del software
BalanceConnection:
[http://balanceconnection.kern-sohn.com/
demo](http://balanceconnection.kern-sohn.com/demo)

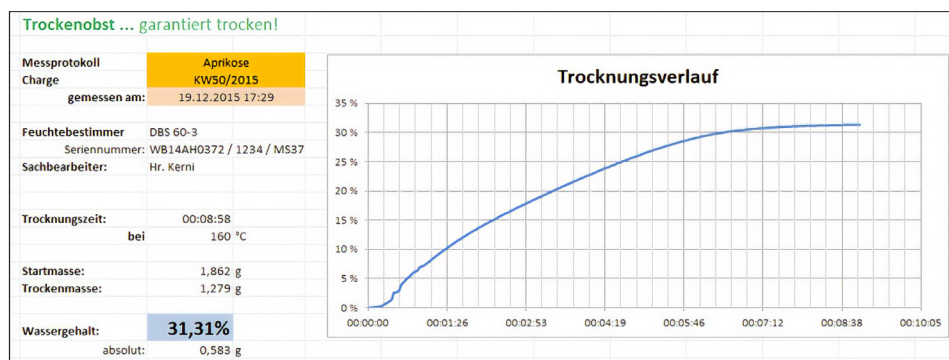

Protocollo di misurazione
con diagramma di progressione dell'analisi dell'umidità

Caratteristiche supplementari della BalanceConnection Versione PRO

- Oltre alle funzioni della versione standard (vedi pagina precedente), la versione PRO offre le seguenti caratteristiche aggiuntive:
- Banche dati ODBC/SQL come server SQL o MySQL
- Trasferimento a HTTP Web services/web-forms
- Consente il collegamento di bilance mediche ai sistemi informatici dell'ambulatorio tramite il protocollo di trasferimento dati dell'apparecchio (GDT) e il protocollo HL7
- Esecuzione di programmi/script tramite linee di comando liberamente definibili
- Sequenze di comandi
- Definizione delle condizioni (conditions) per determinati eventi e reazione agli stessi
- Filtro per il riconoscimento della stabilità (rilevamento valore configurabile)
- Gestione centrale delle configurazioni software, per es. in una memoria in rete
- Display On-screen con interfaccia utente configurabile per il controllo flessibile della bilancia
- Funzioni e filtri diagramma: marcatori di intervallo, filtri estesi come il calcolo della pendenza e dell'area, nuove linee di tendenza e visualizzazione opzionale dell'ultimo valore per serie di dati

- I dati del diagramma, dell'istogramma e della tabella possono essere visualizzati in Excel, Word, PDF, CSV e PNG. Anche la visualizzazione di grandi dimensioni è disponibile come
- come file PNG, Word o PDF, per una rappresentazione fedele all'originale
- Servizio Windows per il controllo e la gestione delle connessioni ai dispositivi e dei processi in background, compresa la registrazione dei file a tempo, i metodi di stampa e l'integrazione GDT.
- Opzioni di configurazione centralizzate e specifiche per l'utente
- Tabella delle istanze dei dispositivi: visualizzazione e tracciamento chiari del peso, dei dati del PC e degli orari. Con filtri precisi (fino al livello di secondo), ordinamento, funzioni di esportazione e una visualizzazione standardizzata per più dispositivi
- Disponibile anche come pacchetto ottimizzato a livello di costi con 5 licenze
- Materiale in dotazione: link per scaricare 1 licenza

Vantaggi

- Gli errori di battitura, possibili nella trasmissione manuale, sono esclusi
- Software ideale se si devono trasmettere i dati di pesata rilevati a un PC Windows
- Particolarmente adatto per l'integrazione professionale di sistemi di pesata nelle reti preesistenti, ove vi sia una maggiore necessità di rilevamento automatico dei dati e loro trattamento per l'integrazione di banche dati
- Registrazione automatica, per es. per prove di durata
- Supporta processi conformi alla GLP
- Per ogni licenza si possono utilizzare tutte le bilance possibili su un PC/una postazione di lavoro
- Utilizzabile ad ampio spettro per settore e applicazione
- Disponibile anche come comoda licenza da scaricare subito