
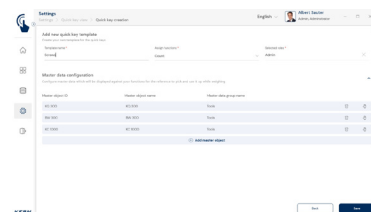


# Software EasyTouch

## SET-311

# Quick Key

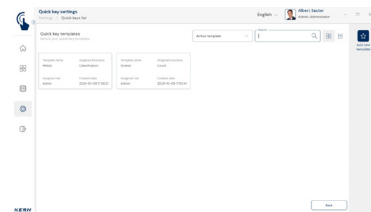

## EasyTouch Quick Key – Stammdaten-Objekte schnell und nutzerbezogen auswählen

### Merkmale

- Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Quick Keys können in zahlreichen Sets erstellt werden, z. B.
  - SET-01 Base
  - SET-05 Dynamic
  - SET-06 Classification
  - SET-07 Variable
  - SET-08 Take Out
  - SET-31 Tolerance
  - SET-32 Count
  - SET-33 Target Count
- Stammdaten-Schnellauswahl-Tasten:  
Durch ET Quick Key können bestimmte Stammdaten-Objekte zur Schnellauswahl permanent eingeblendet werden. Die Anzeige der Quick Keys erfolgt direkt am Bildschirm

- Speichern: Egal ob konventionell oder per Quick Key gewählt, jedes Ergebnis einer Wägung oder Stückzählung wird mit Bezug zum ausgewählten Stammdaten-Objekt gespeichert
- Auswahl der Stammdaten-Objekte: Die bestimmten Stammdaten-Objekte, die als Quick Key angezeigt werden, können entweder einzeln ausgewählt werden oder als definierte Stammdatengruppe, die die Stammdaten als Quick Keys beinhaltet
- Nutzerbezogen: Die Quick Keys können als Schema bezogen auf bestimmte Nutzerrollen angelegt werden. D. h. den Nutzern einer bestimmten Rolle werden bestimmte Stammdatenobjekte zur Schnellauswahl angezeigt. Damit können z. B. verschiedene Abteilungen im selben Unternehmen mit unterschiedlichen Stammdaten überschneidungsfrei arbeiten

### Lizenzinformationen

- Benutzer: In einer Lizenz können unbeschränkt viele Benutzer angelegt werden
- Waagen: Es können beliebig viele Waagen in einer Lizenz angelegt und betrieben werden
- Kommunikation Waagen-Endgerät:  
Die Waage(n) können per seriellem Anschluss, USB, Bluetooth, Ethernet oder per WLAN mit dem PC, Laptop oder Tablet kommunizieren

STANDARD



OPTION

