

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS ODC 241

Fecha: 15.12.2025

ESPAÑOL



Tableta con cámara integrada para la observación óptima y la documentación digital de la muestra

CONTACTO


KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS

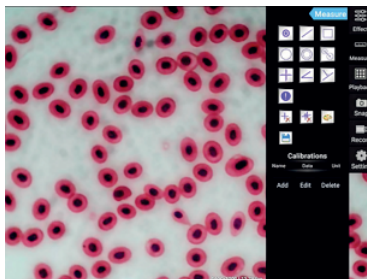

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

- Una solución 2 en 1 en la microscopía digital como sistema universal para todos los microscopios trinoculares con adaptador de rosca C. La cámara de tableta para microscopio ODC 241 está compuesta de una tableta de Android de grandes dimensiones que incorpora una cámara de 5 MP
- La cámara de la tableta ODC 241 de KERN ha sido especialmente creada para la observación sencilla y directa de las muestras en la pantalla. Es ideal para escolares y estudiantes en usos lectivos o con fines de demostración en el laboratorio
- La cámara integrada de 5 MP permite, además de la transmisión directa de la imagen a la tableta con Android, también la confección de imágenes y vídeos con fines de documentación. Permite asimismo mediciones sencillas, como p. ej. de recorridos, superficies y ángulos, así como una función de cómputo manual
- El balance de blancos automático y la compensación de contraste automática puede realizarse de forma rápida y sencilla, lo que permite trabajar de forma eficiente
- Las interfaces integradas permiten ofrecer numerosas funciones adicionales, como p. ej.
 - Guardar datos en una memoria USB o en una tarjeta SD
 - Conexión de un ratón USB
 - Transmisión en directo de una imagen a una pantalla externa vía HDMI

- El volumen de suministro incluye la cámara de tableta con software preinstalado y una fuente de alimentación
- No se puede combinar con los siguientes microscopios: OZM-5. OLM 170

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 241
Serie de modelos	ODC-2
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras para microscopio
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761217683
Número del arancel aduanero	85258900
CE Label	yes

Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	Cámara de la tableta
Resolución de la cámara	5 MP
Tipo de sensor	Sony CMOS
Tamaño del sensor	1/2,8"

Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color	Color
Montaje de la cámara	C-Mount
Interfaces	Bluetooth;HDMI;SD Kartenslot;USB 2.0;WLAN
Sistema operativo	Android

Software aplicable	integrierte Kamerasoftware
--------------------	----------------------------

Funciones del software	Captación de imágenes;Mediciones;Grabaciones de vídeo
------------------------	---

Dimensiones (An×Pr×Al)	238×182×51 mm
------------------------	---------------

Datos técnicos - Pantalla

Tipo de pantalla	táctil LCD
------------------	------------

Tamaño de la pantalla	9,7"
-----------------------	------

Resolución de pantalla	2048x1536
------------------------	-----------

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
----------------------	-----------------------------------

Tensión de entrada	100-240V AC 50/60Hz 0.5A
--------------------	--------------------------

Enchufe	Más dentro, menos fuera
---------	-------------------------

Clase de protección	clase de protección III - tensión extrabaja de protección
---------------------	---

Fijación del cable	desmontable
--------------------	-------------

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	275×230×85 mm
-------------------------------------	---------------

Peso bruto	1,2 kg
------------	--------

Peso neto	0,80 kg
-----------	---------

Método de envío	Servicio de paquetes
-----------------	----------------------

Componente de
embalaje - por peso -
papel 0 g

Componente de
embalaje - por peso -
cartón 206,483 g

Componente del
embalaje - por peso -
plástico 1,539 g

Componente del
embalaje - por peso -
espuma de poliestireno 48,4785 g

Elementos de embalaje -
por peso - espuma 0 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min -5 °C

Storage Temp Max 40 °C

Datos técnicos - Verificación

WEEE yes

FUNCIONES

Standard



PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
ODC-A2401	Fuente de alimentación KERN ODC-A2401
ODC-A2402	Fuente de alimentación KERN ODC-A2402

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Tipo de cámara	Resolución de la cámara	Tipo de sensor	Tamaño del sensor
ODC 241	Cámara de la tableta	5 MP	Sony CMOS	1/2,8"