

FOLLETO DEL PRODUCTO

**KERN
SET-411**

Fecha: 18.03.2025

ESPAÑOL

Software EasyTouch

SET-411

Hotkeys

Teclas de acceso rápido EasyTouch: teclas de acceso directo e interruptores externos

CONTACT**KERN & SOHN GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen





Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-mail : info@kern-sohn.comWeb : www.kern-sohn.com

ESCAPARATE DE PRODUCTOS

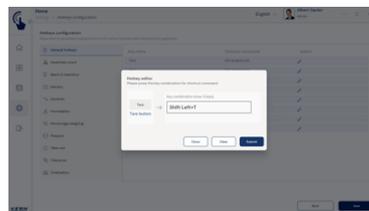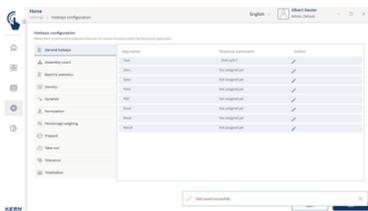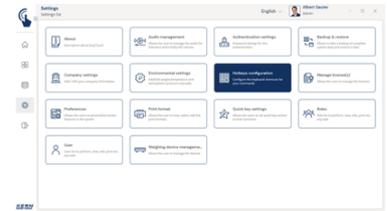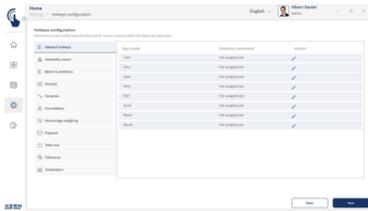

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

- Nota: El prerequisite para este set es el programa básico SET-01 Base
- Teclas de acceso directo: Las teclas de acceso directo le permiten asignar combinaciones de teclas a todos los botones de EasyTouch. Esto simplifica considerablemente el acceso a las funciones que se utilizan con más frecuencia, ya que no es necesaria la incómoda navegación con el ratón del PC. En su lugar, las acciones deseadas pueden activarse rápida y directamente a través del teclado
- Artículo de opción: Hotkeys es una extensión opcional de EasyTouch compatible con todas las funciones activas e instaladas. Tenga en cuenta que el precio de la función adicional no incluye ningún hardware como interruptores, botones o pedales
- Configuración de las teclas de acceso directo: Las combinaciones de teclas pueden ser definidas por el administrador del sistema o por una persona autorizada. Para cada función deseada se puede definir una combinación de teclas única y específica del usuario
- Selección versátil de teclas de acceso rápido: En EasyTouch, no sólo se pueden definir como teclas de acceso rápido teclas de acción específicas para determinadas funciones, sino también comandos de teclas generales como "Guardar" o "Tara". A continuación, se pueden utilizar en todas las funciones de EasyTouch
- Activación mediante combinación de teclas: Por ejemplo, la función TARA puede activarse rápida y fácilmente

mediante una combinación de teclas

- Integración de interruptores o botones externos: EasyTouch admite la asignación de combinaciones de teclas a señales de dispositivos HID (Human Interface Devices) externos a través de USB. Esto permite manejar el software a través de interruptores externos, como pulsadores de parada de emergencia o interruptores de pedal, lo que posibilita un funcionamiento de manos libres y una mayor eficiencia. Proceso sencillo: La señal externa se asigna a una combinación de teclas en el software de control del dispositivo USB convencional. El PC recibe esta señal. Allí, la señal activa la función EasyTouch asignada

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado



Modelo de código de artículo	SET-411
Serie de modelos	ETS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software
Grupo de productos	EasyTouch
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1249738
Número del arancel aduanero	852349 10

Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

FUNCIONES

Standard
Option