KERN & Sohn GmbH
Brickyard 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com
Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Istruzioni per l'installazione Treppiede

KERN IFB-A01 / A02

Versione 2.0
2026-05
it





IFB-A01-A02-IA-i-2620

it

Treppiede

Versione 2.0 2026-05

Istruzioni per l'installazione

Indice dei contenuti

1 Dati tecnici 3

1.1 Dimensioni 4

2 Ambito di fornitura 6


3 Installazione 7


1 Dati tecnici


KERN	IFB-A01	IFB-A02
Altezza del treppiede (mm)	330	600
Per le dimensioni della piattaforma (mm)	300 x 240 400 x 300 500 x 400 650 x 500	400 x 300 500 x 400 650 x 500

1.1 Dimensioni


Modelli con 330 mm:

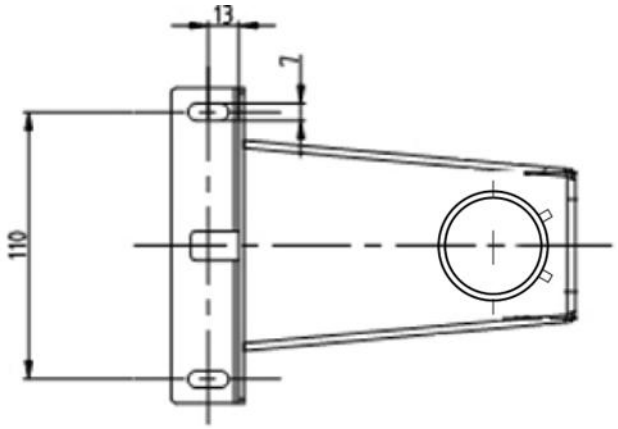


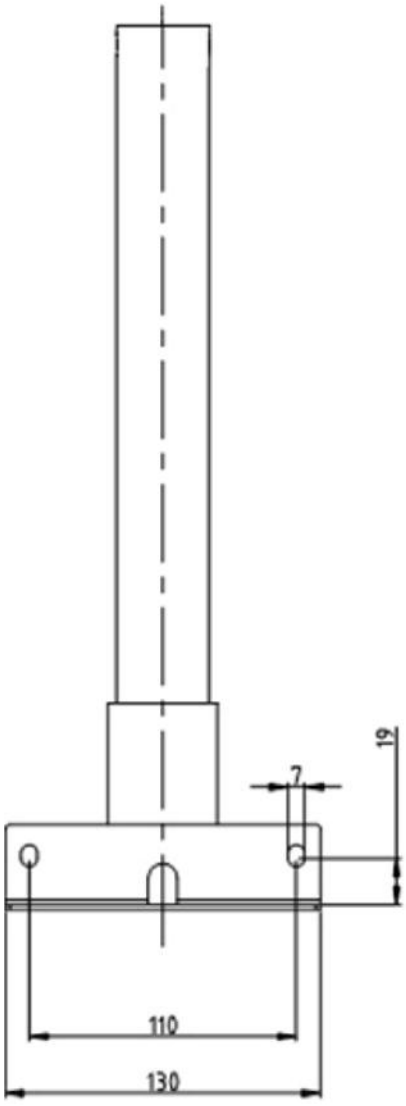


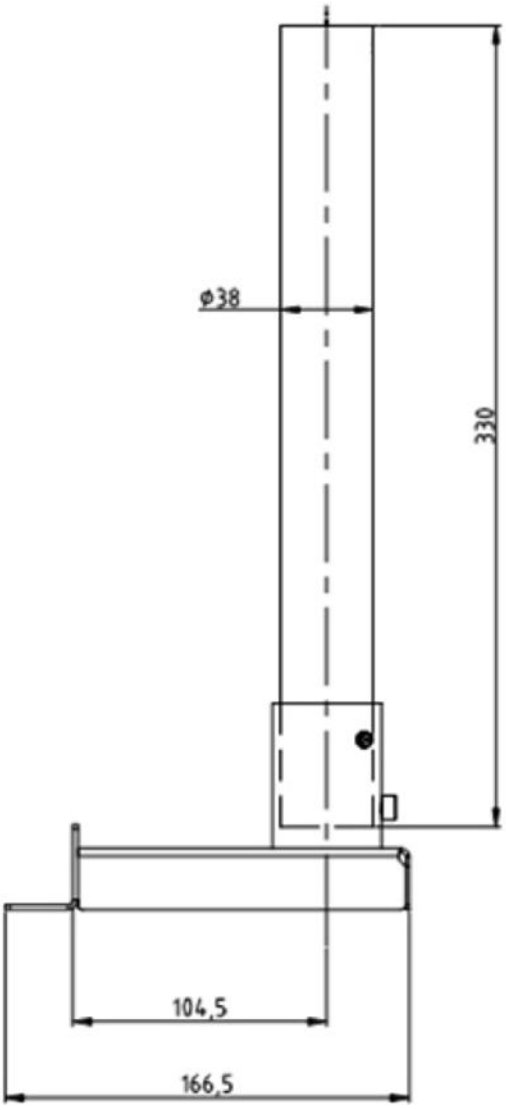











Modelli con 600 mm:

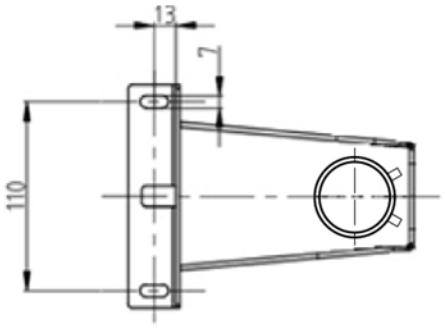

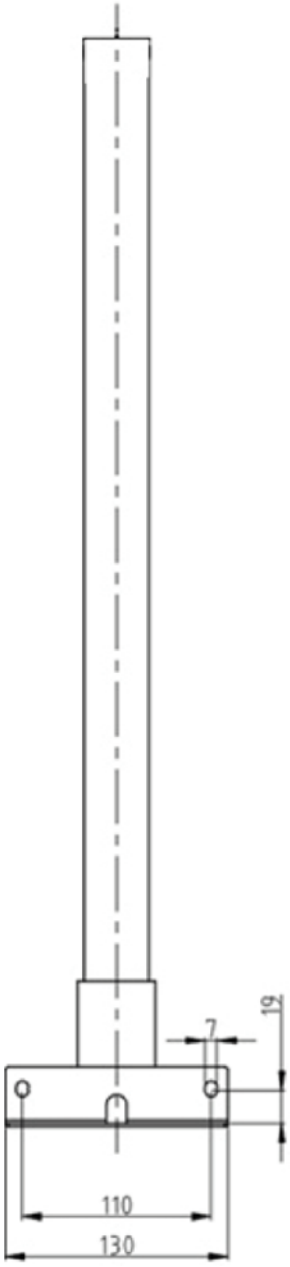

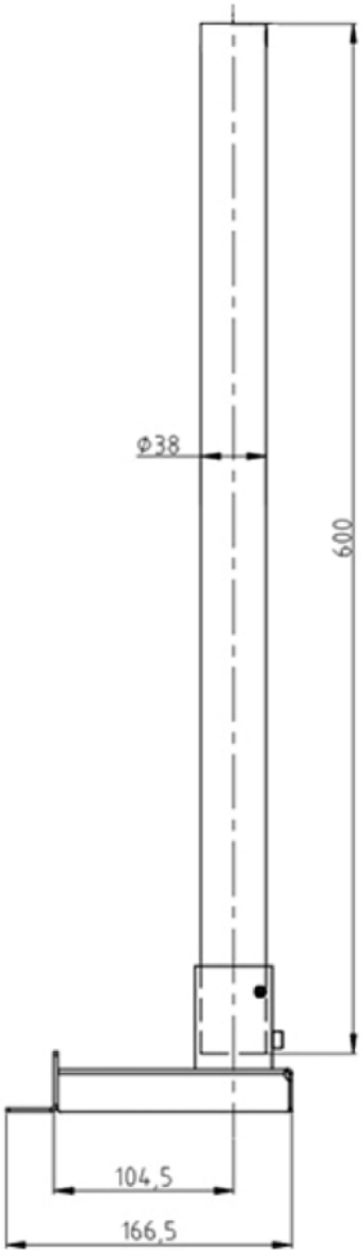

2 Ambito di fornitura

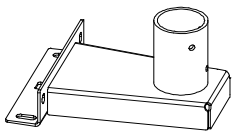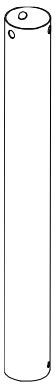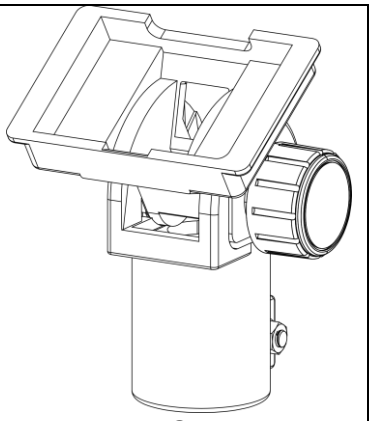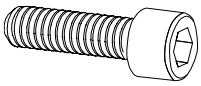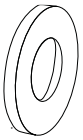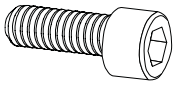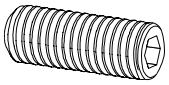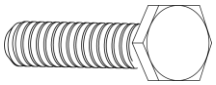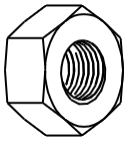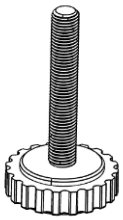 **A** Base per treppiede 1 x	 **B** Tubo del treppiede 1 x	 **C** Supporto per espositore 1 x
 **S1** M6 x 16 4 x	 **S2** Rondella elastica 4 x	 **S3** Lavatrice 5 x
 **S4** M6 x 12 1 x	 **S5** M6 x 10 2 x	 **S6** M8 x 20 1 x
 **S7** Dado M8 1 x	 **S8** Piedino 1 x	 **S9** Dado M6 1 x


C, **S3** (1x), **S6** e **S7** sono forniti preassemblati.

3 Installazione

Fissare la base del treppiede alla piattaforma:

1. Posizionare la base dello stativo **(A)** al centro sopra i fori sul lato della piattaforma.
2. Collocare prima la rondella elastica **(S2)** e poi la rondella **(S3)** sulla vite **(S1**) (4 x).
3. Serrare la base del treppiede.

   Assicurarsi di non schiacciare o danneggiare i cavi.

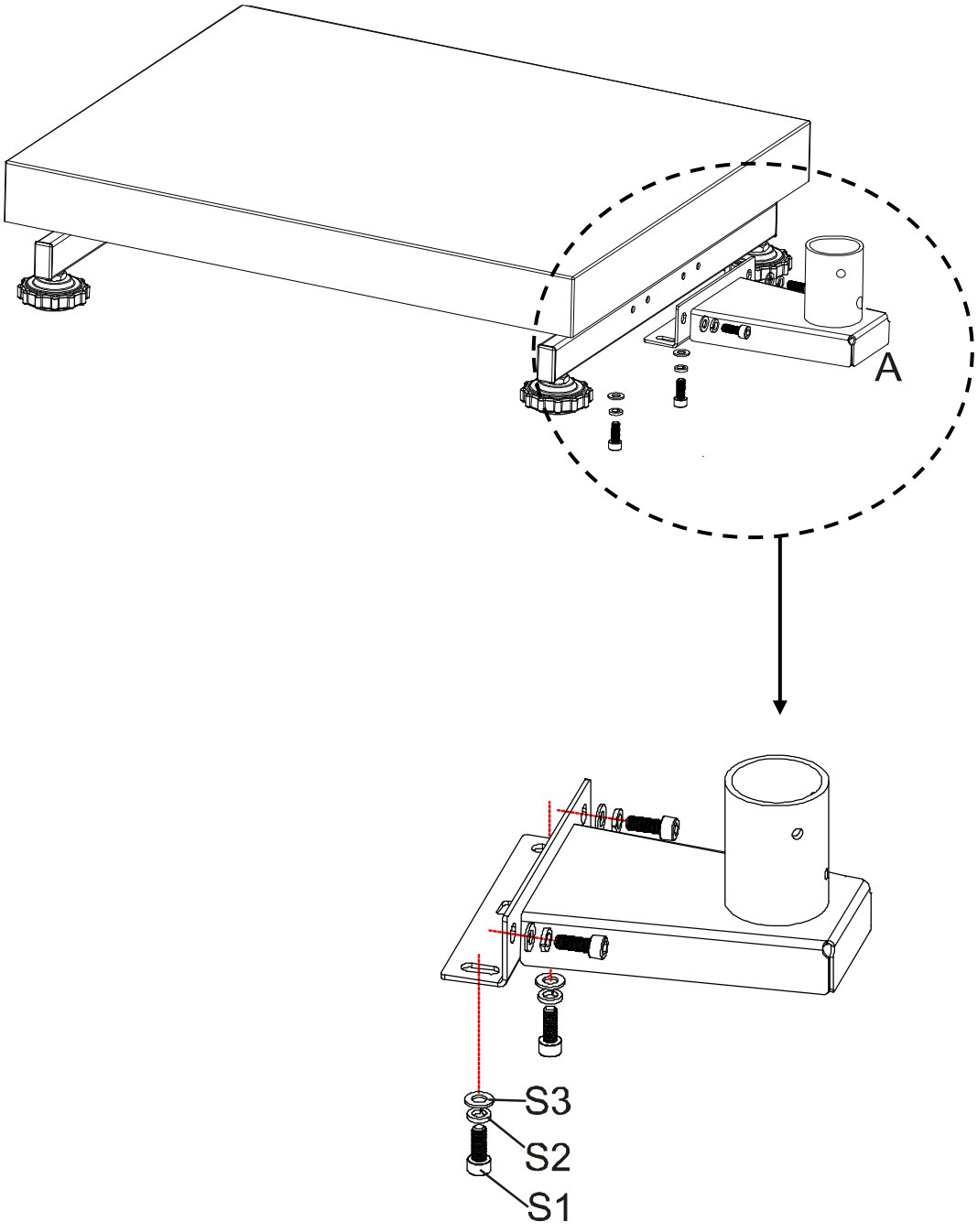


Fissare il tubo del treppiede alla base del treppiede:

4. Svitare le viti **S4** e **S5** dal tubo del supporto.

5. Inserire il tubo del treppiede **(B)** nella base del treppiede. Assicurarsi che il foro del tubo del cavalletto corrisponda al foro **S4**.


6. Avvitare nuovamente le viti **S5** e fissare il tubo del supporto con la vite **S4**.

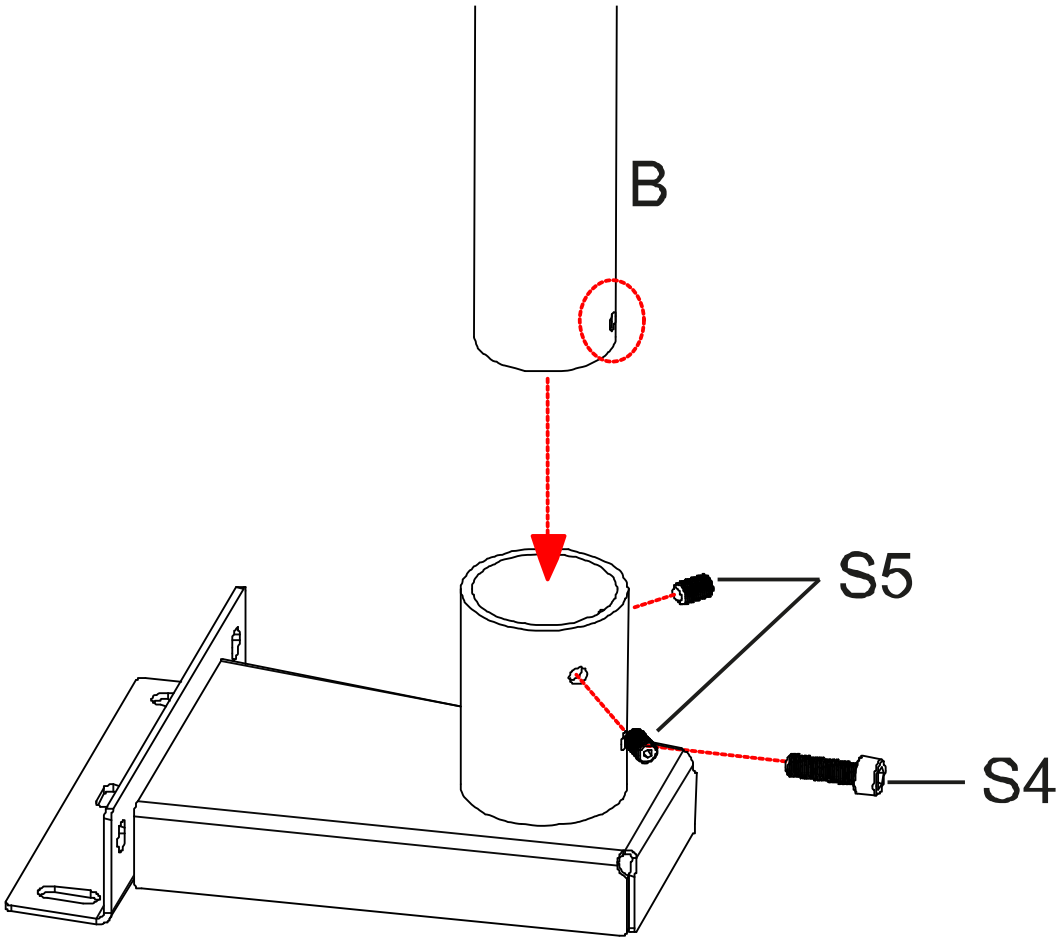

7. Avvitare il dado **S9** sul piedino **S8**.


8. Avvitare il piedino con il dado nel tubo del treppiede partendo dal basso.

9. Svitare il piedino fino a farlo toccare il pavimento e fissarlo con il dado **S9**.

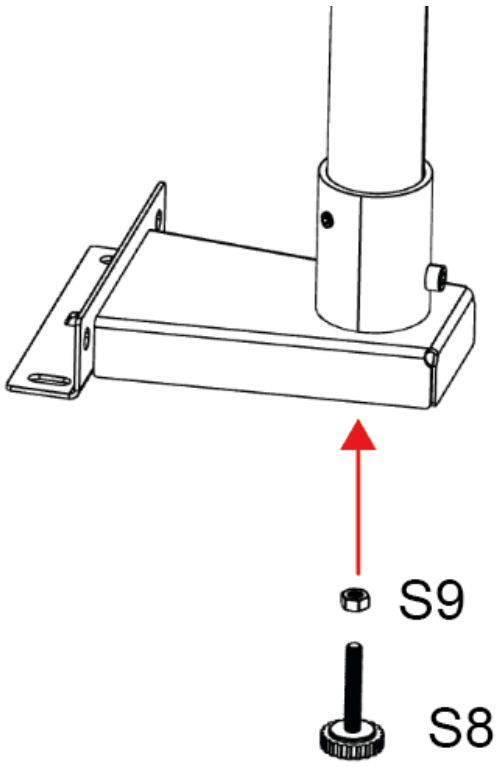

Fissare l'unità di visualizzazione al tubo di supporto:

10. Inserire il supporto dell'unità di visualizzazione **(C)** nel tubo del supporto e fissarlo con le viti **S6.**

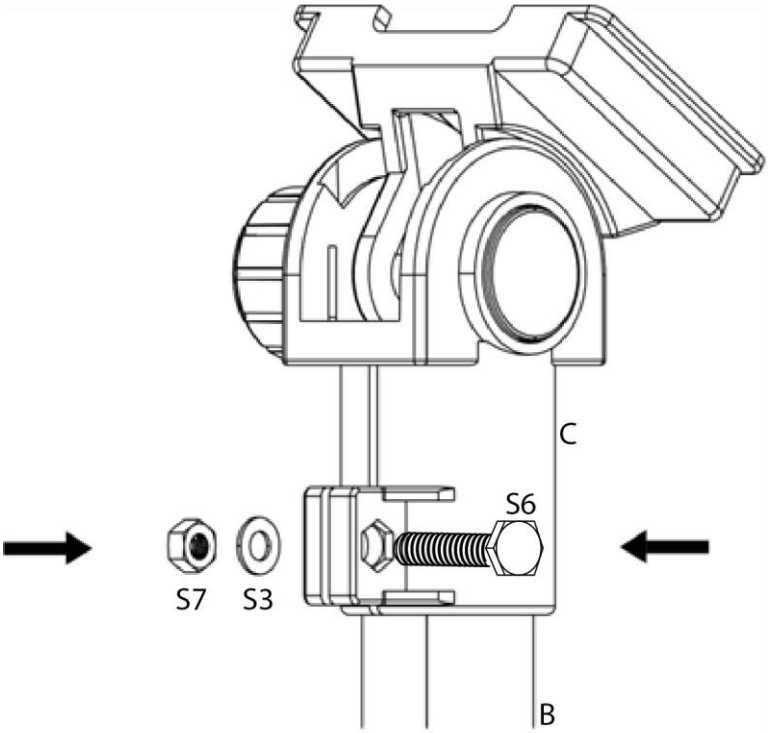

⇨ Inserire il supporto **(C)** per l'unità display nell'estremità superiore del tubo di supporto **(B)** e fissarlo con la vite **(S6).**

Contrapporre sul lato opposto la rondella **(S3)** e il dado **(S7).**