

BROCHURE PRODUIT

KERN SCD-4.0-DL

Date: 18.03.2025

FRANCAIS



Enregistrement ou transmission flexibles des valeurs mesurées, notamment vers Microsoft® Excel ou Access

CONTACT

KERN & SOHN GmbH

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany




Téléphone : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-Mail : info@kern-sohn.com

Web : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS

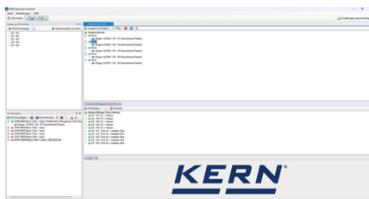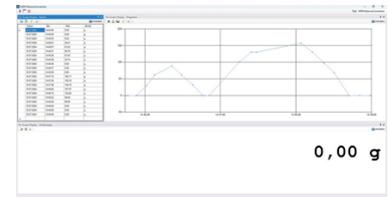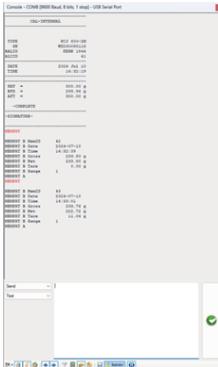

Rezept	Bezeichnung	Menge	Einheit	Netto	Brutto	Differenz	Abweichung	Gesamt
4	Salz	100,00 g	g	100,00 g	100,00 g	0,00 g	0,00%	100,00 g
5	Vanilline	0,05 g	g	0,05 g	0,05 g	0,00 g	0,00%	0,05 g
6	Alkohol	800,00 g	g	800,00 g	800,00 g	0,00 g	0,00%	800,00 g
7	Wasser	1000,00 g	g	1000,00 g	1000,00 g	0,00 g	0,00%	1000,00 g
8	Dropogolite	5,000 g	g	4,999 g	5,000 g	-0,001 g	-0,02%	4,999 g
9	Thalidomiden	1,000 g	g	0,998 g	1,000 g	-0,002 g	-0,20%	0,998 g
10	Boxen	0,001 g	g	0,001 g	0,001 g	0,000 g	0,00%	0,001 g

FRANCAIS

DESCRIPTION

- Pour système d'exploitation Windows 10 (20H2) et plus récent, 11
- .NET Framework 4.8.1 requis
- Des droits d'administration complets sont nécessaires pour l'installation
- Prend en charge les balances et appareils de mesure avec USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, réseau LAN ou WiFi & # 160; (TCP/UDP/IP)
- Formatage et configuration ultra-flexibles de la sortie (ordre et positionnement, formatage et arrondi au choix), y compris sur demande enregistrement de la date et de l'heure pour chaque valeur transmise
- Raccordement d'un nombre illimité d'appareils/d'interfaces, y compris avec enregistrement simultané et synchronisé de plusieurs balances
- Interrogation à la demande (par touche) ou programmée des valeurs mesurées ou déclenchement de fonctionnalités, y compris pour l'enregistrement continu
- Les protocoles d'interface des balances KERN (configuration standard) sont déjà prédéfinis. Prise en charge possible d'autres balances grâce à la configuration flexible
- Câble d'interface adéquat inclus pour la commande simultanée d'une balance KERN

- Nombreuses possibilités de transmission et d'enregistrement :
 - MicrosoftR Excel/Access/Word à l'avant ou à l'arrière-plan
 - Autres applications Windows (simulation d'appui sur touches), par exemple logiciel d'expédition ou ERP (SAP, Sage,...)
 - Enregistrement de fichier (fichier texte ou CSV, par exemple)
 - Impression sur papier ou étiquette
- Sorties à l'écran telles que grand affichage, diagramme d'évolution (courbe de séchage des analyseurs d'humidité), histogramme,...
- Avantages:
 - Pas d'erreurs de frappe comme p.ex. en cas de transmission manuelle
 - Enregistrement automatique, p.ex. en cas d'essais permanents
 - Logiciel de laboratoire conforme BPL
 - Possibilité d'utilisation dans tous les secteurs et toutes les applications
- Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 1 licence

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	SCD-4.0-DL
Model-Serie	SCD
Assortiment	KERN
Type de produit	Logiciel
Groupe de produits	BalanceConnection
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 12 12206
Modèle prédécesseur	SCD-4.0; SCD-4.0S05
Numéro de tarif douanier	852349 10

FONCTIONS

Standard



Données techniques - Emballage et expédition

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----