

Software EasyTouch

SET-14

**Individual  
Print**

EasyTouch Individual Print - Stampe personalizzate



---

**CONTACT**

**KERN & SOHN GmbH**  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## VETRINA DEI PRODOTTI

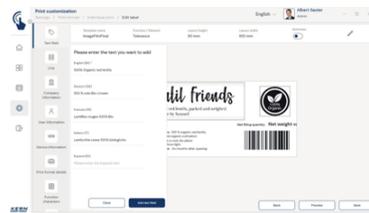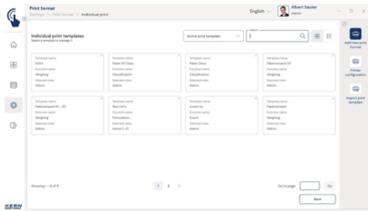

ITALIANO

## DESCRIZIONE

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Posizionamento personalizzato degli elementi di stampa: Con EasyTouch Individual Print è possibile progettare la stampa in base alle proprie esigenze e alle proprie specifiche. I dettagli come peso, numero di pezzi, prezzo, utente e/o data e ora possono essere disposti a piacere
- Formati carta liberamente selezionabili tra 20×20 mm e 210×297 mm (DIN A4): Per i prodotti stampati, come le etichette adesive, è possibile impostare le dimensioni della pagina come desiderato, compresa un'alimentazione automatica definibile da etichetta a etichetta
- La funzione Barcode consente di stampare come codice a barre o qualsiasi elemento di stampa (ad es. il numero dell'articolo, il peso netto, il risultato del conteggio dei pezzi). Anche gli elementi del codice a barre possono essere posizionati liberamente e in qualsiasi dimensione nell'area di stampa. È possibile scegliere tra vari tipi di codice a barre
- Trasmissione esterna di modelli di stampa: Possibilità di trasferire modelli di stampa da un'installazione locale di EasyTouch a un'altra, qualora non sia disponibile un database centrale
- Selezione e formattazione personalizzate: È possibile selezionare un numero qualsiasi di elementi di stampa da tutti i campi dati esistenti della rispettiva funzione EasyTouch - gli stessi elementi possono essere selezionati

anche più volte. Ogni elemento di stampa può essere formattato liberamente, in grassetto, corsivo o sottolineato e nella grandezza carattere preferita

- Impostazioni personalizzabili di utenti e funzioni: I singoli formati di stampa possono essere assegnati a gruppi di utenti per determinate funzioni
- Informazioni dell'azienda: Tutti i dettagli dell'azienda sono selezionabili, ad esempio indirizzo web, logo ecc.
- Funzione grafica e immagini personalizzate: È possibile integrare immagini, loghi o icone proprie per ogni immagine di stampa. Questi elementi grafici possono essere posizionati liberamente nelle dimensioni a scelta
- Stampante: Zebra ZD421 omologata da KERN. Per altri modelli di stampante, contattare l'assistenza KERN

#### Opzioni

- KERN Support per la configurazione personalizzata di immagini di stampa: Saremo lieti di aiutarvi a creare una stampa personalizzata. Si prega di contattare [ETsupport@kern-sohn.com](mailto:ETsupport@kern-sohn.com)

#### Informazioni sulla licenza

- La licenza include: Una licenza può funzionare in modo contemporaneo e indipendente su un massimo di quattro terminali (PC, laptop, tablet)
- Utenti: Con una licenza è possibile creare un numero illimitato di utenti

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SET-14
Modello-Serie	ETS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1360556
Modello precedente	SET-14-2021a
Numero di tariffa doganale	85234910

Tempo di consegna 1 d

### FUNZIONI

Standard



Option



### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

## SOFTWARE

Modello	Descrizione
SET-10	KERN EasyTouch SET-10 Save Server