

KERN Software BalanceConnection SCD-4.0-PRO

Professionelle und hoch flexible Aufzeichnung oder Übertragung von Messwerten, insbesondere auch nach Microsoft® Excel oder Access

	Soll	Ist	Datum / Uhrzeit	Differenz	Abweichung	Gesamt
PBJ 4200-2M	200 g	200,47 g	2023-05-07 12:15	0,47 g	0,23%	200,47 g
(große Mengen)	400 g	411,21 g	2023-05-07 12:15	11,21 g	2,80%	611,68 g
Wasser	1000 g	1.002,39 g	2023-05-07 12:15	2,39 g	0,24%	1.614,07 g
ABJ 80-4M	5,000 g	4,9993 g	2023-05-07 12:16	-0,0007 g	-0,01%	1.619,0693 g
(kleine Mengen)	1,000 g	0,9984 g	2023-05-07 12:16	-0,0016 g	-0,16%	1.620,0677 g
Theobromin	0,001 g	0,0011 g	2023-05-07 12:17	0,0001 g	10,00%	1.620,0688 g


Komfortables Übergeben
und Editieren der
Messergebnisse z. B. in
Microsoft® Excel

Entdecken Sie weitere
Details und passendes
Zubehör online!

Haben Sie Fragen?

Das Team unseres Kompetenzzentrums
Industrie 4.0 hilft Ihnen gerne weiter.
E-Mail: etsales@kern-sohn.com

Tipp: Oder laden Sie sich eine
kostenlose Demoversion der Software
BalanceConnection herunter:
[http://balanceconnection.kern-sohn.com/
demo](http://balanceconnection.kern-sohn.com/demo)

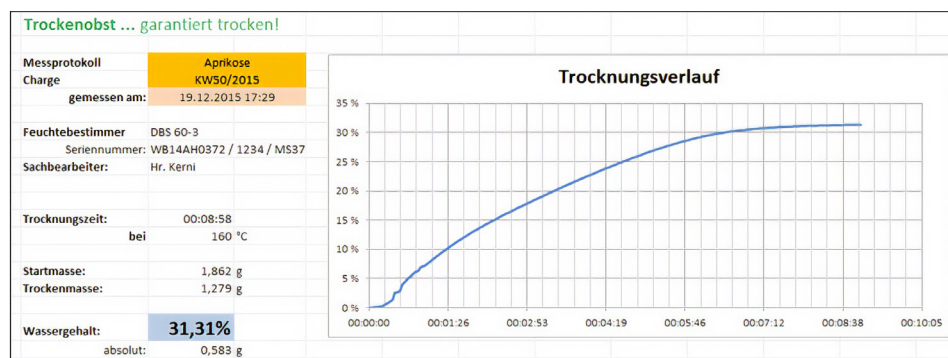

Messprotokoll mit Verlaufsdigramm
einer Feuchtebestimmung

Zusätzliche Merkmale der PRO Version

- Ergänzend zu den Funktionen der Standardversion (siehe vorherige Seite) bietet die PRO-Version folgende erweiterten Features:
- ODBC/SQL Datenbanken wie SQL Server oder MySQL
- Übergabe an HTTP Webservices/Web-Forms
- Histogramm
- Ermöglicht die Anbindung von medizinischen Waagen an Praxis-EDV-Systeme über das Gerätedatentransfer (GDT) Protokoll sowie das HL7 Protokoll
- Ausführung von Programmen/Skripts über frei definierbare Kommandozeilen
- Befehlssequenzen
- Festlegen von Bedingungen (conditions) für bestimmte Ereignisse und die Reaktion darauf
- Filter zur Stabilitätskennung (konfigurierbare Wertübernahme)
- Zentrale Konfigurationshaltung, z. B. im Netzwerk
- On-Screen-Displays mit konfigurierbarer Benutzerschnittstelle für flexible Waagenbedienung
- Diagramm-Funktionen und -Filter: Bereichsmarkierungen, erweiterte Filter wie Steigung und Flächenberechnung, neue Trendlinien und optionale Anzeige des letzten Werts pro Datenreihe
- Die Daten aus Diagramm, Histogramm und Tabelle können in Excel, Word, PDF, CSV und PNG ausgegeben werden. Die Großanzeige steht ebenfalls als PNG-, Word- oder PDF-Datei zur Verfügung – für eine originalgetreue Darstellung
- Windows-Dienst zur Steuerung und Verwaltung von Geräteverbindungen und Hintergrundprozessen inklusive zeitgesteuerter Dateiaufzeichnung, Druckermethoden und GDT-Integration. Zentrale und benutzerspezifische Konfigurationsoptionen
- Geräteinstanz-Tabelle: Übersichtliche Darstellung und Verfolgung von Gewicht, PC-Daten und Zeitstempeln. Mit präziser Filterung (bis auf Sekundenebene), Sortierung, Exportfunktionen und einheitlicher Ansicht für mehrere Geräte
- Auch als kostenoptimiertes Paket mit 5 Lizenzen lieferbar
- Lieferumfang: Downloadlink für 1 Lizenz
- Lieferumfang: Downloadlink für 5 Lizenzen

Vorteile

- Vermeiden von Tippfehlern, wie z. B. bei manueller Übertragung
- Ideale Software, wenn erhobene Wägedaten an einen Windows PC übergeben werden sollen
- Besonders geeignet für die professionelle Integration von Wiegesystemen in bestehende Netzwerke, bei einer hohen Anforderung an eine automatisierte Datenübernahme und Weiterverarbeitung, für die Einbindung von Datenbanken
- Automatische Aufzeichnung, z. B. bei Dauerversuchen
- Unterstützt GLP-konforme Prozesse
- Pro Lizenz beliebig viele Waagen an einem PC/Arbeitsplatz verwendbar
- Branchen- und anwendungsübergreifend einsetzbar
- Auch als bequeme Download-Lizenz sofort verfügbar