

FOLLETO DEL PRODUCTO

**KERN
SET-52**

Fecha: 28.04.2025

ESPAÑOL

Software EasyTouch
SET-52
Inventory

EasyTouch Inventory - Inventarios: eficientes y exactos

CONTACT





KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS

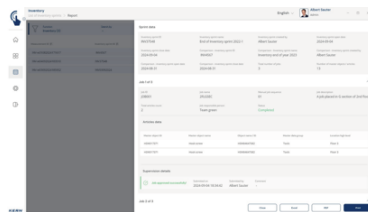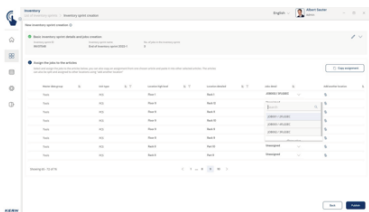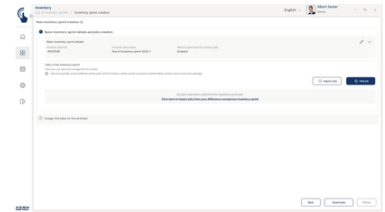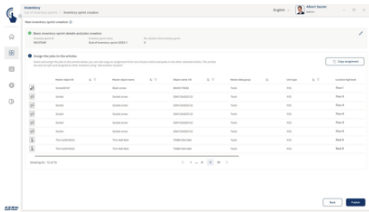

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

- Nota: El requisito para este set son el programa básico SET-01 Base y SET-32 Count
- Inventario ET: SET-52 Inventario sirve como programa de asistencia y base de datos que permite incluso a usuarios sin conocimientos previos realizar procesos de inventario de forma rápida y sin errores. Los usuarios se concentran únicamente en identificar los objetos del inventario, p. ej., escaneando los códigos de barras, mientras que el programa se encarga de todo el proceso de recuento de forma independiente
- Proceso sencillo: El proceso es muy sencillo: Escanee el código de barras, coloque el objeto en la báscula y listo. A continuación, puede pasar directamente al siguiente artículo
- Organización del inventario: Cada inventario puede dividirse en distintos "trabajos", en función del almacén, el grupo de productos, etc. Cada trabajo de inventario se realiza, completa y guarda por separado. Esto permite dividir grandes inventarios en subáreas significativas y hacer que las procesen equipos diferentes
- Proceso de liberación: Los inventarios se pueden dotar de un proceso de liberación, de forma que los resultados deban ser liberados por una función de usuario autorizada una vez finalizado el proceso
- Lista de inventario: EasyTouch muestra una lista clara de todos los artículos registrados con el recuento de existencias correspondiente, lo que permite comparar un inventario actual con el de un año anterior, por ejemplo. A continuación, el sistema calcula automáticamente las diferencias de existencias entre los dos

inventarios

- ERP Connect: Esta extensión opcional permite, por ejemplo, importar listas de inventario de sistemas de gestión de inventario existentes y exportar a ellos resultados, como los inventarios actuales
- Pesaje y recuento: El valor de las existencias puede tomarse de la báscula como resultado del recuento, introducirse manualmente o tomarse de un inventario comparativo
- Importación de datos: Los datos maestros de los artículos del inventario pueden importarse a EasyTouch a través de una interfaz desde un sistema ERP o mediante una lista de Excel

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado



Modelo de código de artículo	SET-52
Serie de modelos	ETS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software
Grupo de productos	EasyTouch
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761486362
Número del arancel aduanero	85234910

Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

FUNCIONES

Standard



Option

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Modelo	Descripción
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print