

Software EasyTouch

SET-14

**Individual
Print**

EasyTouch Individual Print - Personalisierbare Ausdrücke

CONTACT

KERN & SOHN GmbH

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany


Telefon : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-Mail : info@kern-sohn.com

Web : www.kern-sohn.com

PRODUKT-SCHAUFENSTER

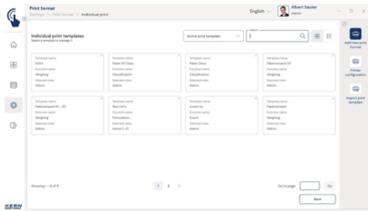

BESCHREIBUNG

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Individuelles Platzieren von Druckelementen: Mit EasyTouch Individual Print gestalten Sie Ihren Ausdruck ganz nach Ihren Vorstellungen und Vorgaben. Ordnen Sie Angaben wie Gewicht, Stückzahl, Preis, Nutzer und/oder Datum und Uhrzeit nach Wunsch an
- Frei wählbare Papiergrößen zwischen 20×20 mm bis 210×297 mm (DIN A4): Für Druckerzeugnisse wie Klebeetiketten kann die Seitengröße nach Bedarf eingerichtet werden, einschließlich eines definierbaren Auto-Vorschubs von Etikett zu Etikett
- Die Barcode-Funktion erlaubt es, jedes Druckelement (z. B. Artikelnummer, Nettogewicht, Stückzahlergebnis) als Barcode oder QR-Code zu drucken. Die Barcode-Elemente können ebenfalls frei und in beliebiger Größe im Druckbereich platziert werden. Es stehen verschiedene Barcode-Typen zur Auswahl
- Externe Übertragung von Druckvorlagen: Möglichkeit, Druckvorlagen aus einer lokalen EasyTouch Installation auf eine andere zu übertragen, sofern keine zentrale Datenbank vorhanden ist
- Individuelle Auswahl und Formatierung: Aus allen vorhandenen Datenfeldern der jeweiligen EasyTouch-Funktion können beliebig viele Druckelemente ausgewählt werden – gleiche Elemente auch mehrfach. Jedes Druckelement kann frei formatiert werden, fett, kursiv oder unterstrichen und in der bevorzugten Schriftgröße

- Personalisierbare Nutzer- und Funktionseinstellungen: einzelnen Nutzergruppen können für bestimmte Funktionen individuelle Druckformate zugewiesen werden
- Firmeninformationen: Alle Firmendetails auswählbar, z. B. Webadresse, Logos etc.
- Individuelle Grafik- und Bilder-Funktion: Je Druckbild können eigene Bilder, Logos oder Icons eingebunden werden. Diese Grafikelemente sind in der gewünschten Größe frei platzierbar
- Drucker: Zebra ZD421 von KERN freigegeben. Für andere Druckermodelle wenden Sie sich bitte an den KERN Support

Optionen

- KERN Support zur individuellen Druckbildgestaltung: Gerne unterstützen wir Sie bei der Erstellung eines eigenen Ausdrucks. Bitte wenden Sie sich an ETsupport@kern-sohn.com

Lizenzinformationen

- Lizenzumfang: Eine Lizenz kann auf bis zu vier Endgeräten (PC, Laptop, Tablet) gleichzeitig und unabhängig betrieben werden
- Benutzer: In einer Lizenz können unbeschränkt viele Benutzer angelegt werden

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	SET-14
Modell-Reihe	ETS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Software
Produktgruppe	EasyTouch
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1360556
Vorgängermodell	SET-14-2021a
Zolltarifnummer	85234910

FUNKTIONEN

Standard

Option

Technische Daten - Verpackung & Versand

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

SOFTWARES

Modell	Beschreibung
SET-10	KERN EasyTouch SET-10 Save Server