

**FOLLETO DEL PRODUCTO**

---

**KERN  
SET-14**

Fecha: 18.03.2025

ESPAÑOL

Software EasyTouch

SET-14

**Individual  
Print**

EasyTouch Individual Print - Impresiones personalizables



---

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## ESCAPARATE DE PRODUCTOS

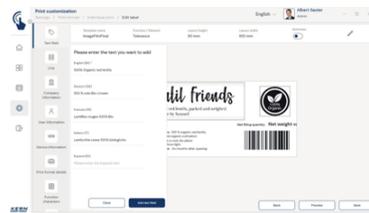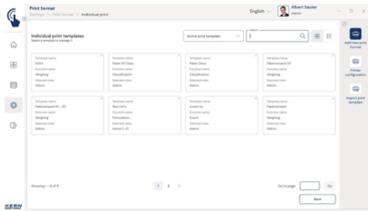

ESPAÑOL

## DESCRIPCIÓN

- Nota: El requisito para este set es el programa básico SET-01 Base
- Ubicación individual de los elementos de impresión: Con EasyTouch Individual Print podrá configurar su impresión a la medida de sus necesidades y según sus preferencias. Coloque la información, como el peso, las unidades, el precio, el usuario y/o la fecha y la hora según sus deseos
- Selección libre de los tamaños del papel entre 20×20 mm y 210×297 mm (DIN A4): Para los artículos de impresión, como las etiquetas adhesivas, se puede configurar según las necesidades el tamaño de página, incluyendo un avance automático definible de una etiqueta a otra
- La función Barcode permite imprimir como código de barras o código QR cada elemento de impresión (como p. ej. el número de artículo, el peso neto o el resultado del contador de unidades). Los elementos de código de barras se pueden también situar en el área de impresión dónde y del tamaño que se desee. Se puede elegir entre diversos tipos de código de barras
- Transferencia externa de plantillas de impresión: Posibilidad de transferir plantillas de impresión de una instalación local de EasyTouch a otra si no hay disponible una base de datos central
- Selección individual y formateo: De todos los campos de datos de cada función de EasyTouch se pueden elegir los elementos de impresión que se desee, también varias veces los mismos elementos. Cada elemento de

impresión se puede formatear libremente, en negrita, cursiva o subrayado y en el tamaño de fuente preferido

- Ajustes personalizables de funciones o usuarios: Los formatos de impresión individuales pueden asignarse a grupos de usuarios individuales para determinadas funciones
- Información de la empresa: Se pueden elegir todos los detalles de la empresa, como p. ej. la dirección de Internet, logotipos, etc.
- Función de gráficas e imágenes individuales: En función de la imagen de impresión se pueden integrar imágenes, logotipos o iconos propios. Estos elementos gráficos se puede situar donde se quiera y en el tamaño deseado
- Impresora: Zebra ZD421 de KERN habilitada. Para otros modelos de impresora, consulte por favor al servicio de asistencia de KERN

#### Opciones

- Asistencia de KERN para una configuración individual de la imagen impresa: Le ayudamos con mucho gusto a crear su propia impresión. Diríjase para ello a [ETsupport@kern-sohn.com](mailto:ETsupport@kern-sohn.com)

#### Información sobre licencias

- Alcance de la licencia: Una licencia puede emplearse en cuatro terminales como máximo (ordenadores, portátiles o tabletas) simultánea e independientemente
- Usuarios: Con una licencia se pueden crear tantos usuarios como se desee, sin límite alguno

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	SET-14
Serie de modelos	ETS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software
Grupo de productos	EasyTouch
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761360556
Modelo predecesor	SET-14-2021a
Número del arancel aduanero	85234910

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

### FUNCIONES

Standard
----------



Option
--------



## PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Modelo	Descripción
SET-10	KERN EasyTouch SET-10 Save Server