
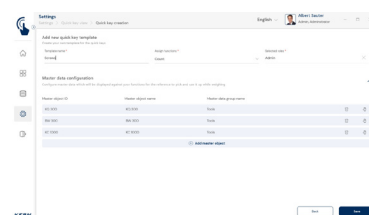


Software EasyTouch

SET-311 Quick Key

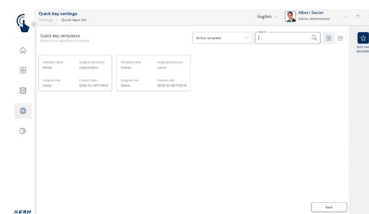

EasyTouch Quick Key – Selezionare i dati base degli oggetti in modo rapido e in base all'utente

Caratteristiche

- Il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Quick Keys possono essere creati in numerosi set, per es.
 - SET-01 Base
 - SET-05 Dynamic
 - SET-06 Classification
 - SET-07 Variable
 - SET-08 Take Out
 - SET-31 Tolerance
 - SET-32 Count
 - SET-33 Target Count

- Tasti di selezione rapida dati base: con ET Quick Key è possibile integrare in modo permanente determinati dati base degli oggetti per la selezione rapida. I Quick Keys sono visualizzati direttamente sullo schermo
- Memorizzare: A prescindere dalla selezione convenzionale o tramite Quick Key, ogni risultato di pesata o conteggio di pezzi viene memorizzato con il riferimento ai dati base dell'oggetto selezionato
- Selezione dei dati base dell'oggetto: I determinati dati base dell'oggetto che vengono visualizzati come Quick Key possono essere selezionati singolarmente oppure come gruppo definito di dati base che contiene i dati base sotto forma di Quick Keys
- In riferimento all'utente: i Quick Keys possono essere creati come schema in riferimento a determinati ruoli utente. Ciò significa che agli utenti di un certo ruolo vengono mostrati determinati oggetti di dati master per la selezione rapida. Ciò consente, ad esempio, a diversi reparti della stessa azienda di lavorare con dati anagrafici diversi senza sovrapposizioni

Informazioni sulla licenza

- Utenti: Con una licenza è possibile creare un numero illimitato di utenti
- Bilance: Con una licenza è possibile creare e gestire un numero illimitato di bilance
- Comunicazione bilance-terminale: La(l)e bilancia(e) possono comunicare con PC, laptop o tablet mediante collegamento seriale, USB, Bluetooth, Ethernet o WiFi

DI SERIE



OPZIONE

