

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN SCD-4.0-DL

Datum: 18.03.2025

DEUTSCH







Flexible Aufzeichnung oder Übertragung von Messwerten, insbesondere auch nach Microsoft® Excel oder Access

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

PRODUKT-SCHAUFENSTER

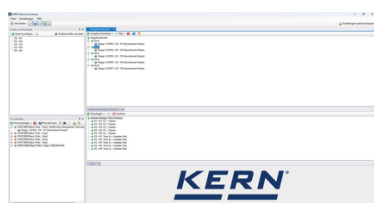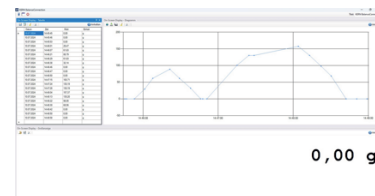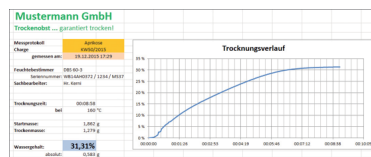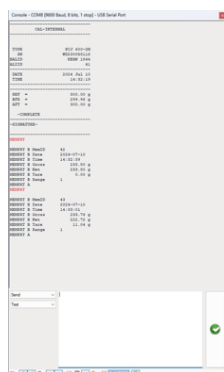

Rezept									
Datum	Start	Endzeit	Seitenlayout	Formeln	Daten	Überprüfen	Anzeige	Automatisieren	Hilfe
G15									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4									
5	PSI 4200-204	Vaseline	200 g	200,47 g	2023-05-27 13:28	0,47 g	0,23%	200,47 g	
6	(große Mengen)	Alkohol	400 g	411,21 g	2023-05-27 13:28	11,21 g	2,80%	411,21 g	
7		Wasser	1000 g	1001,39 g	2023-05-27 13:28	1,39 g	0,14%	1.001,39 g	
8	ABi 80-484	Drogenpulver	5,000 g	4,9999 g	2023-05-27 13:28	-0,0007 g	-0,01%	1.000,00 g	
9	(kleine Mengen)	Therapiepulver	1,000 g	0,9998 g	2023-05-27 13:28	-0,0010 g	-0,10%	1.000,00 g	
10		Boxen	0,001 g	0,0011 g	2023-05-27 13:28	0,0001 g	10,00%	1.000,00 g	

BESCHREIBUNG

- Für Betriebssysteme Windows 10 (20H2) und neuer, 11
- .NET Framework 4.8.1 benötigt
- Für die Installation werden vollständige Administrationsrechte benötigt
- Unterstützt Waagen und Messgeräte mit USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, LAN- oder WLAN-Netzwerk (TCP/UDP/IP)
- Hochflexible Formatierung und Gestaltung der Ausgabe (beliebige Reihenfolge und Positionierung, Formatierung und Rundung), insbesondere auf Wunsch auch Aufzeichnung von Datum und Uhrzeit zu jedem übertragenen Wert
- Beliebige Anzahl von Geräten/Schnittstellen anschließbar, auch gleichzeitige und synchronisierte Aufzeichnung mehrerer Waagen
- Tasten- oder zeitgesteuerte Abfrage von Messwerten oder Auslösen von Gerätefunktionen, auch für Daueraufzeichnungen
- Schnittstellen-Protokolle der KERN-Waagen (Standardkonfiguration) sind bereits vordefiniert. Unterstützung anderer Waagen durch flexible Konfiguration möglich

- Passendes Schnittstellenkabel bei Bestellung mit Waage inklusive
- Viele verschiedene Übertragungs- und Aufzeichnungsmöglichkeiten:
 - Microsoft® Excel/Access/Word im Vorder- oder Hintergrund
 - Andere Windows-Anwendung (durch Tastensimulation), z. B. Versandsoftware oder ERP-System (SAP, Sage,...)
 - Datei-Aufzeichnung (z. B. als Text oder CSV Datei)
 - Freier Ausdruck auf Text-, Etiketten- oder auch Büro-Druckern
- Bildschirm-Ausgaben wie Großanzeige, Verlaufsdiagramm (Trocknungskurve Feuchtebestimmer), ...
- Vorteile:
 - Vermeiden von Tippfehlern wie z. B. bei manueller Übertragung
 - Automatische Aufzeichnung, z. B. bei Dauerversuchen
 - GLP-konforme Laborsoftware
 - Branchen- und Anwendungsübergreifend einsetzbar
- Lieferumfang: Downloadlink für 1 Lizenz

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	SCD-4.0-DL
Modell-Reihe	SCD
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Software
Produktgruppe	BalanceConnection
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 12 12206
Vorgängermodell	SCD-4.0; SCD-4.0S05
Zolltarifnummer	852349 10

FUNKTIONEN

Standard



Technische Daten - Verpackung & Versand

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----