KERN & Sohn GmbH
Briqueterie 1
D-72336 Balingen
Courrier électronique : info@kern-sohn.com
Tél : +49-[0]7433- 9933-0
Télécopieur : +49-[0]7433-9933-149
Internet : www.kern-sohn.com

Guide d'installation Trépied

KERN IFB-A01 / A02

Version 2.0
2026-05
fr





IFB-A01-A02-IA-f-2620

fr

Trépied

Version 2.0 2026-05

Guide d'installation

Table des matières

1 Données techniques 3

1.1 Dimensions 4

2 Contenu de la livraison 6


3 Installation 7


1 Données techniques


KERN	IFB-A01	IFB-A02
Hauteur du trépied (mm)	330	600
Pour les dimensions de la plate-forme (mm)	300 x 240 400 x 300 500 x 400 650 x 500	400 x 300 500 x 400 650 x 500

1.1 Dimensions


Modèles avec 330 mm :

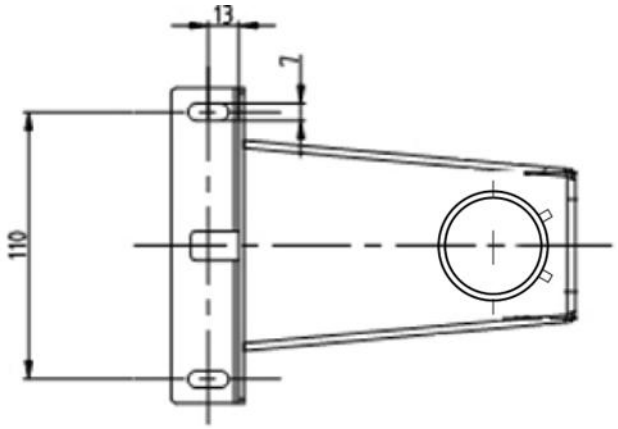


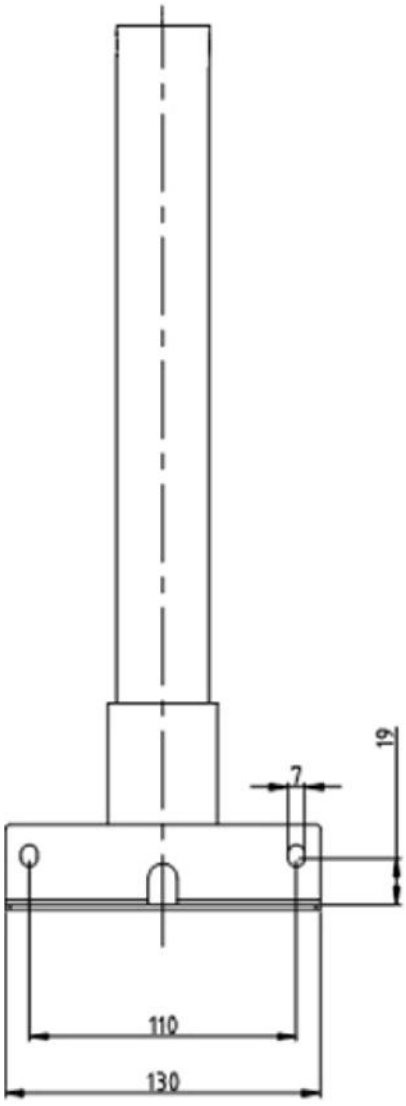


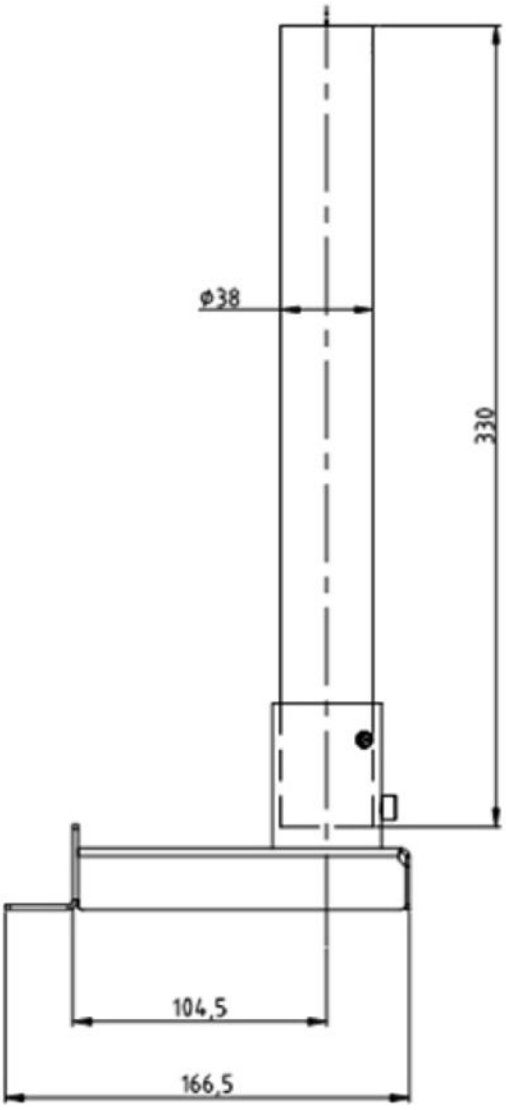











Modèles de 600 mm :

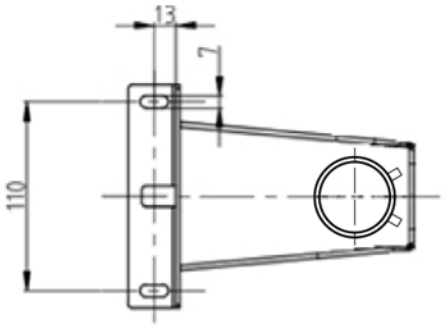

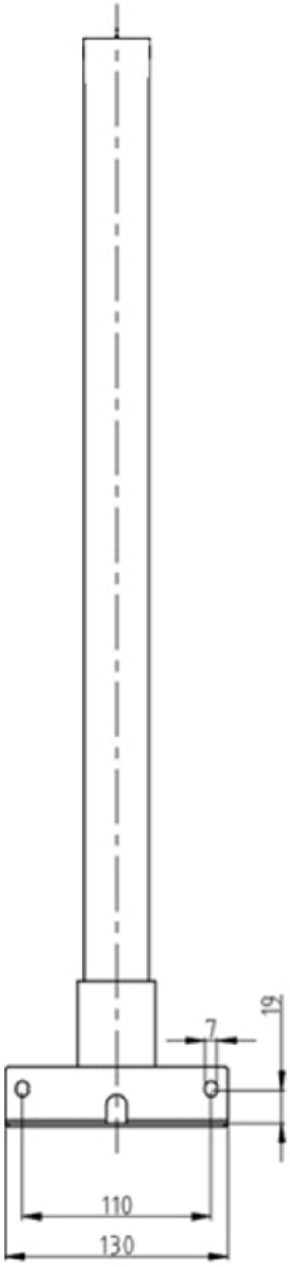

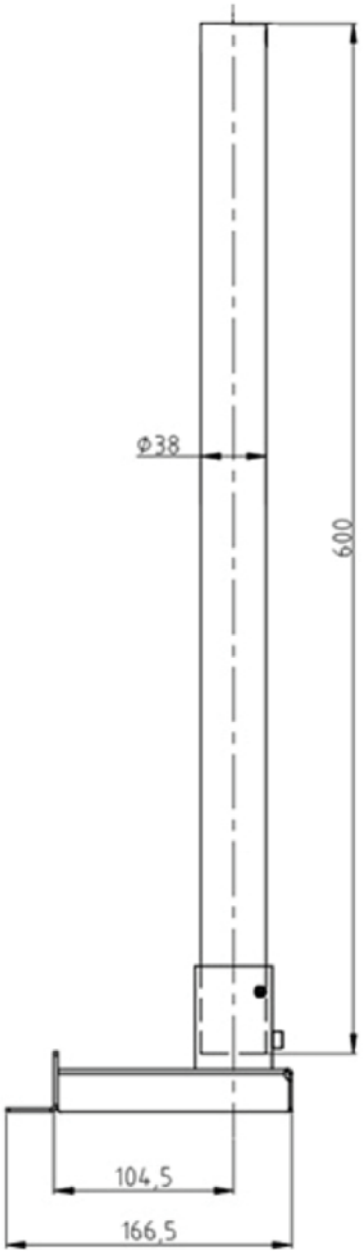

2 Contenu de la livraison

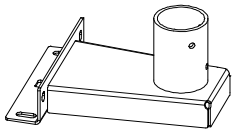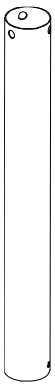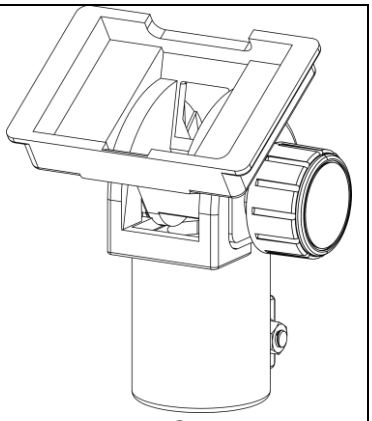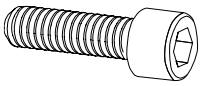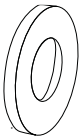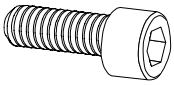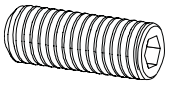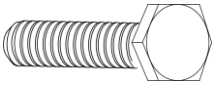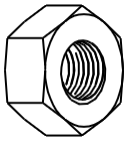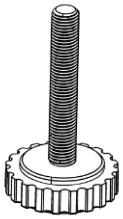 **A** Pied de trépied 1 x	 **B** Tube du trépied 1 x	 **C** Support pour indicateur 1 x
 **S1** M6 x 16 4 x	 **S2** Rondelle élastique 4 x	 **S3** Rondelle 5 x
 **S4** M6 x 12 1 x	 **S5** M6 x 10 2 x	 **S6** M8 x 20 1 x
 **S7** Écrou M8 1 x	 **S8** Pied réglable 1 x	 **S9** Écrou M6 1 x


C, **S3** (1x), **S6** et **S7** sont livrés à l'état prémonté.

3 Installation

Fixer le pied du trépied à la plate-forme:

1. Positionner le pied du trépied **(A)** au centre, au-dessus des trous sur le côté de la plate-forme.
2. Mettre d'abord la rondelle élastique **(S2)** puis la rondelle **(S3)** sur la vis **(S1)** (4 x).
3. Visser le pied du trépied.

   Veillez à ne pas coincer ou endommager les câbles.

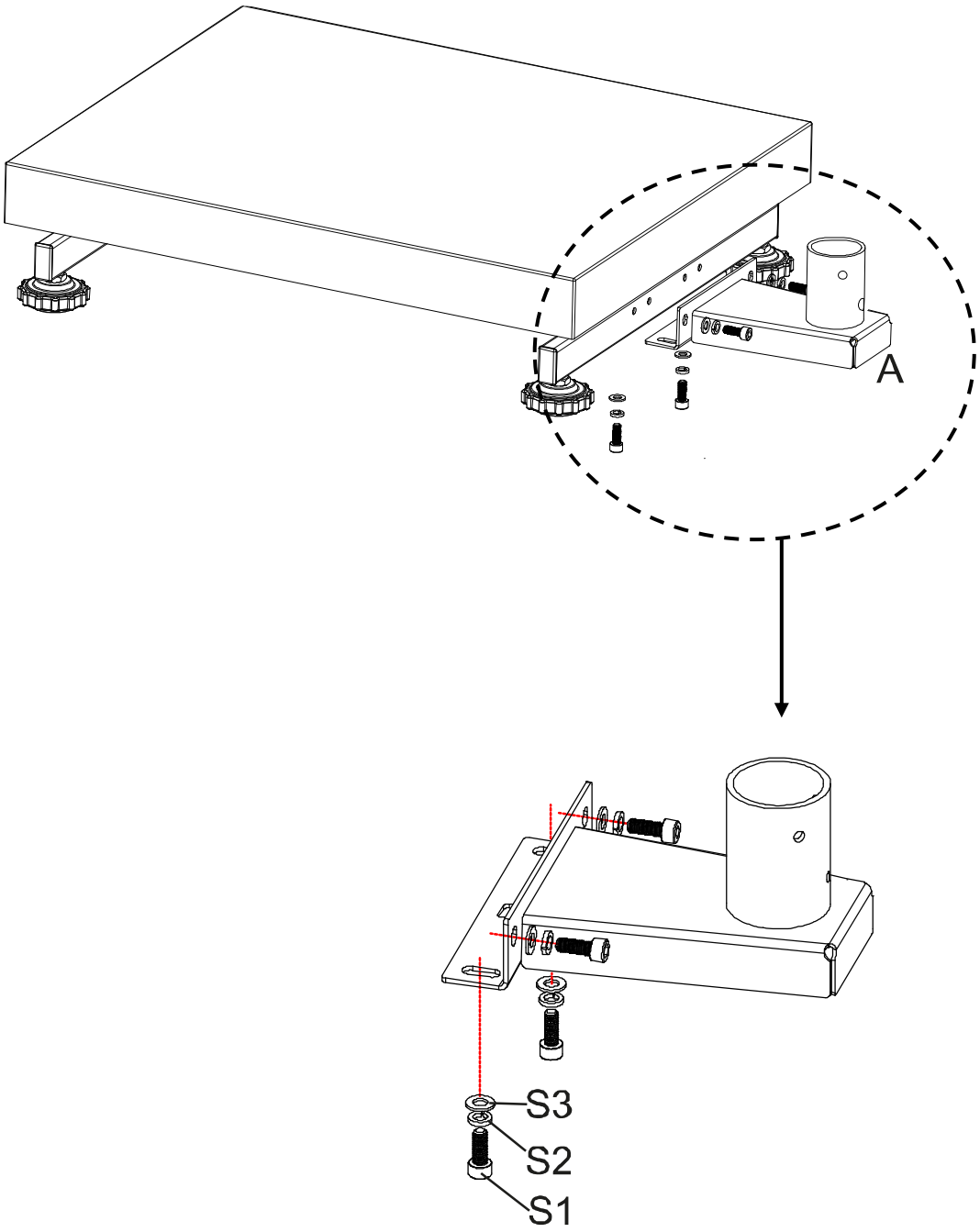


Fixer le tube du trépied à la base du trépied:

4. Dévisser les vis **S4** et **S5** du tube du trépied.

5. Insérer le tube du trépied **(B)** dans le pied du trépied. Veiller à ce que l'alésage du tube du trépied corresponde à l'alésage **S4**.


6. Revisser les vis **S5** et fixer le tube du trépied avec la vis **S4**.

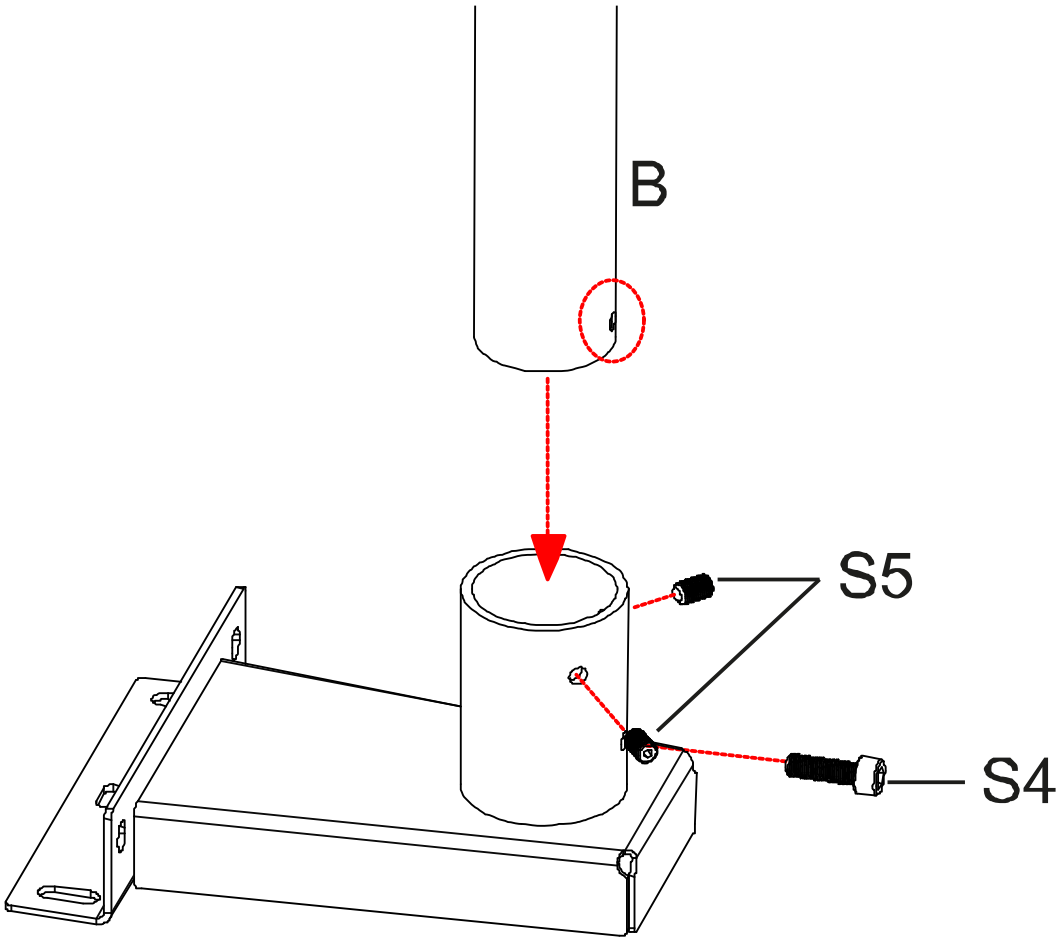

7. Visser l'écrou **S9** sur le pied réglable **S8**.


8. Visser le pied réglable avec l'écrou dans le tube du trépied par le bas.

9. Dévisser le pied réglable jusqu'à ce qu'il touche le sol et le fixer à l'aide de l'écrou **S9**.

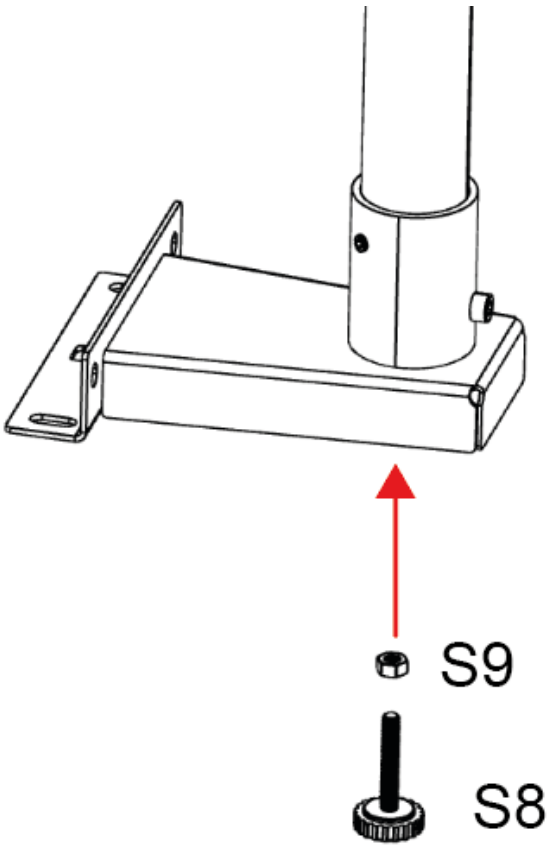

Fixation de l'appareil d'affichage sur le tube du trépied:

10. Insérer le support pour l'appareil d'affichage **(C)** dans le tube du statif et le fixer avec les vis **S6**.

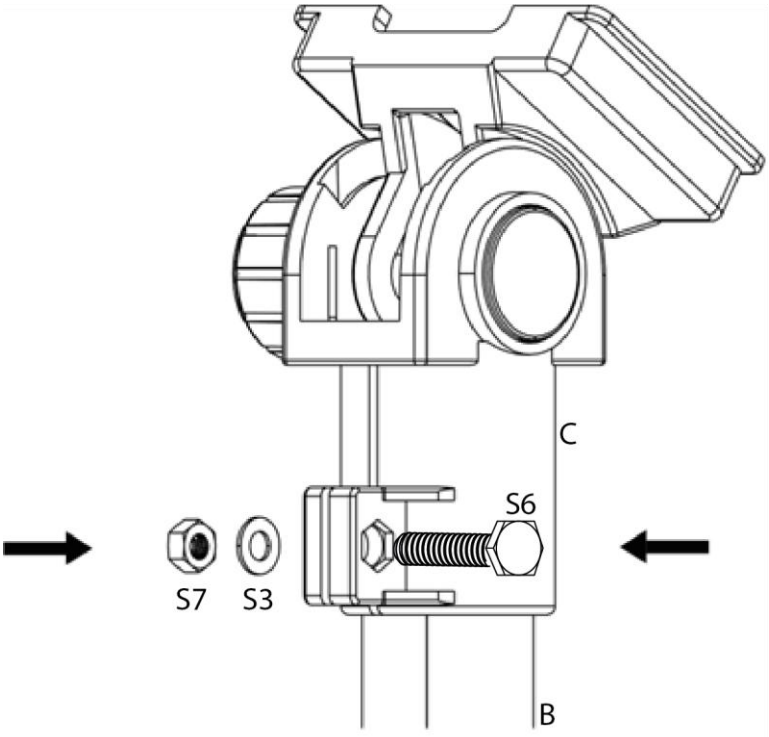

⇨ Insérer le support **(C)** pour l'appareil d'affichage dans l'extrémité supérieure du tube du trépied **(B)** et le fixer avec la vis **(S6)**.

Bloquer du côté opposé avec la rondelle **(S3)** et l'écrou **(S7)**.