

**BROCHURE DEL PRODOTTO**

---

**KERN  
SET-40**

Data: 18.03.2025

ITALIANO

Software EasyTouch

SET-40

**Protect**

EasyTouch Protect – Proteggere i dati aziendali sensibili in modo sicuro ed efficiente

---

**CONTACT**

**KERN & SOHN GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany



Telefono : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## VETRINA DEI PRODOTTI

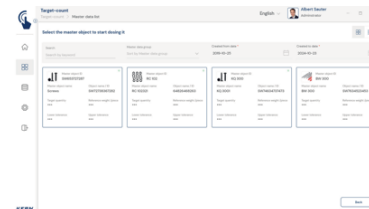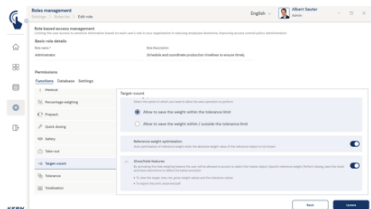

ITALIANO

## DESCRIZIONE

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- SET-40 Protect è compatibile con i seguenti set: SET-01 Base, SET-16 Batch and statistics, SET-21 Formulation, SET-32 Count, SET-33 Target count, SET-35 Assembly count e SET-31 Tolerance
- Protezione delle ricette sensibili: Questa funzione può essere utilizzata per nascondere tutti i dati critici della ricetta e impedirne l'accesso non autorizzato
- Protezione dei dati di pesatura sensibili: Durante il dosaggio o la pesatura, i valori di pesatura target sono rappresentati in modo neutro da “\*\*\*”, in modo che sia visibile solo il risultato grafico basato sul valore target e sui valori di tolleranza inferiore e superiore
- Protezione dei nomi degli oggetti sensibili: Il nome di una sostanza o di un oggetto viene mascherato per alcuni gruppi di utenti, in modo che sia visibile al massimo il numero identificativo della sostanza senza i valori del peso target
- Opzioni flessibili di protezione dei dati: A seconda del ruolo dell'utente, è possibile scegliere se visualizzare solo i valori di peso target o anche i nomi dei singoli componenti della ricetta, per esempio
- Immettere la quantità totale di destinazione: Nella schermata iniziale, gli utenti inseriscono la quantità totale del target senza vedere le singole quantità del target o i pesi dei componenti
- Risultati mascherati: Nella schermata dei risultati, anche i pesi target e i pesi effettivamente pesati vengono visualizzati solo in modo mascherato come “\*\*\*”
- Visualizzazione di quantità limitate nella memoria: In Dynamic Memory non vengono visualizzate le quantità per alcuni gruppi di utenti
- Visualizzazione trasparente per gli amministratori: La visualizzazione in chiaro delle quantità o dei pesi previsti e dei pesi effettivamente rilevati è sempre disponibile per i gruppi di utenti autorizzati, come gli amministratori

### Opzioni

- Funzione di salvataggio dati centralizzata Save Server (SET-10) per il salvataggio aggiuntivo di tutti i dati di misurazione in una server directory locale centralizzata. In questa directory sono salvati i dati di misurazione di

tutti i sistemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte le app EasyTouch installate. In particolare per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò comporta il vantaggio di avere tutti i dati di pesata consolidati in un'unica banca dati e di dover cercare i dati di misurazione di diverse bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati Save Server è protetto dalle manipolazioni e non è modificabile

- **Save-Cloud:** Svolge la stessa funzione di memoria dati centrale per tutti i sistemi ET collegati, come Save-Data Server. La differenza consiste nel fatto che nel Save-Data Cloud i dati sono salvati in un server KERN, raggiungibile da Internet e non su un server che si trova nella rete locale. Il vantaggio del Save-Data Cloud sta nel fatto che la configurazione si svolge in modo automatico e non è necessario l'intervento di un amministratore di rete, KERN SET-101
- **EasyTouch Quick Key (SET-311):** questa funzione consente di riservare determinati oggetti con dati base per determinati ruoli utente. Gli utenti in questione possono visualizzare gli oggetti selezionati come tasti di accesso rapido sullo schermo

#### Informazioni sulla licenza

- **La licenza include:** Una licenza può funzionare in modo contemporaneo e indipendente su un massimo di quattro terminali (PC, laptop, tablet)
- **Utenti:** Con una licenza è possibile creare un numero illimitato di utenti
- **Bilance:** Con una licenza è possibile creare e gestire un numero illimitato di bilance
- **Comunicazione bilance-terminale:** La(le) bilancia(e) possono comunicare con PC, laptop o tablet mediante collegamento seriale, USB, Bluetooth, Ethernet o WiFi

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SET-40
Modello-Serie	ETS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761476547
Numero di tariffa doganale	85234910

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna 1 d

### FUNZIONI

Standard



Option

