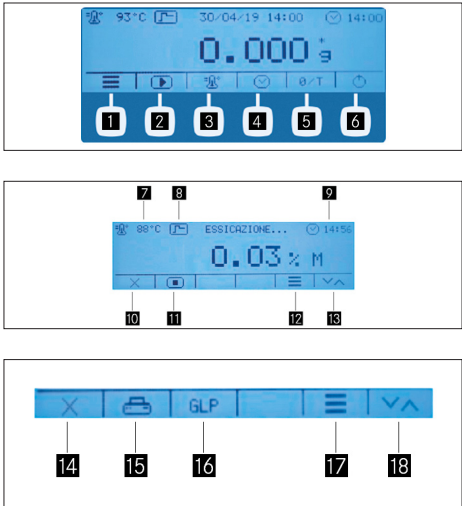
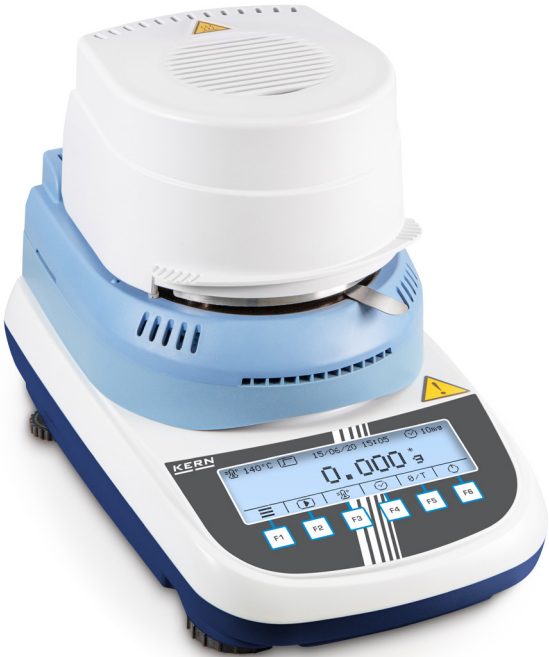




Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Feuchtebestimmer mit intuitivem Grafikdisplay und Step-by-step Bedienerführung in 6 Sprachen

Merkmale

- Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display, Ziffernhöhe 11 mm
- 6 Direkttasten für schnellen Zugriff auf die Hauptfunktionen

Startbildschirm:

- 1 Hauptmenü
- 2 Trocknungsvorgang starten
- 3 Trocknungstemperatur auswählen
- 4 Abschaltkriterium auswählen
- 5 Nullstellen/Tarieren
- 6 Stand-by

Während der Messung:

- 7 Aktuelle Temperatur
- 8 Aktuelles Heizprofil
- 9 Aktives Abschaltkriterium
- 10 Trocknungsvorgang abbrechen
- 11 Trocknungsvorgang anhalten
- 12 Aktuelle Trocknungsparameter anzeigen
- 13 Einheit der Ergebnisanzeige umschalten

Nach Ende der Messung:

- 14 Trocknungsprogramm verlassen
- 15 Messprotokoll drucken
- 16 GLP Parameter (de)aktivieren, editieren
- 17 Ergebnis detailliert anzeigen
- 18 Einheit der Ergebnisanzeige umschalten

- Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
- Bedienerführung in 6 Sprachen (DE, EN, FR, IT, ES, PT)
- Automatisches Tarieren beim Start einer Messung durch Schließen des Deckels
- Der letzte Messwert bleibt im Display bis zur nächsten Messung sichtbar
- GLP intern; Ausdruck von Waagen-ID, Projekt-ID, Benutzer-ID, ermittelte Werte des Trocknungsvorgangs etc.
- 10 Probenschalen inklusive
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Im Internet finden Sie zu jedem KERN-Feuchtebestimmer ein praktisches Applikationshandbuch mit vielen Beispielen, Erfahrungsberichten, Einstellungen und Tipps

STANDARD



1 DAY

OPTION



KERN	DLB 60-4A NEW	DLB 160-3A
Ablesbarkeit [d] Masse/Feuchte (%)	0,0001 g / 0,001 %	0,001 g / 0,01 %
Wägebereich [Max]	60 g	160 g
Reproduzierbarkeit bei Einwaage 2 g*	0,18 %	0,15 %
Reproduzierbarkeit bei Einwaage 10 g*	0,05 %	
Anzeige nach Trocknung (Anzeige jederzeit umschaltbar)		
Feuchte [%] = Feuchtegehalt (M) vom Nassgewicht (W)	10 % - 100 %	
Trockengehalt [%] = Trockengewicht (D) vom (W)	100 % - 10 %	
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100 %	0 - 999 %	
Restgewicht (M)	Absolutwert in [g]	
Temperaturbereich (in Schritten zu)	35 °C - 160 °C (1 °C)	
Heizprofile	Standardtrocknung, Schnelltrocknung, Vorheizstufe zuschaltbar	
Abschalt-Kriterien	Automatisches freies Abschalten (Gewichtsverlust wählbar 0,01mg/30s - 10 mg/30s) Zeitgesteuertes Abschalten (1 min - 12 h) Manuelles Abschalten per Tastendruck	
Messwertabfrage/ Protokollausgabe	Intervall einstellbar von 5 s - 250 s	
Gesamtabmessungen B×T×H	215×345×235 mm	
Nettogewicht	4,7 kg	
Option DAkkS-akkr. Kalibrierschein Masse	963-103	963-127
Option Werkskalibrierschein Temperatur	964-305	

* applikationsabhängig NEW Neues Modell