

## BROCHURE PRODUIT

# KERN SCD-4.0-DLS05

Date: 18.03.2025

FRANCAIS




Enregistrement ou transmission flexibles des valeurs mesurées, notamment vers Microsoft® Excel ou Access

## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : info@kern-sohn.com  
Web : www.kern-sohn.com

## VITRINE DES PRODUITS

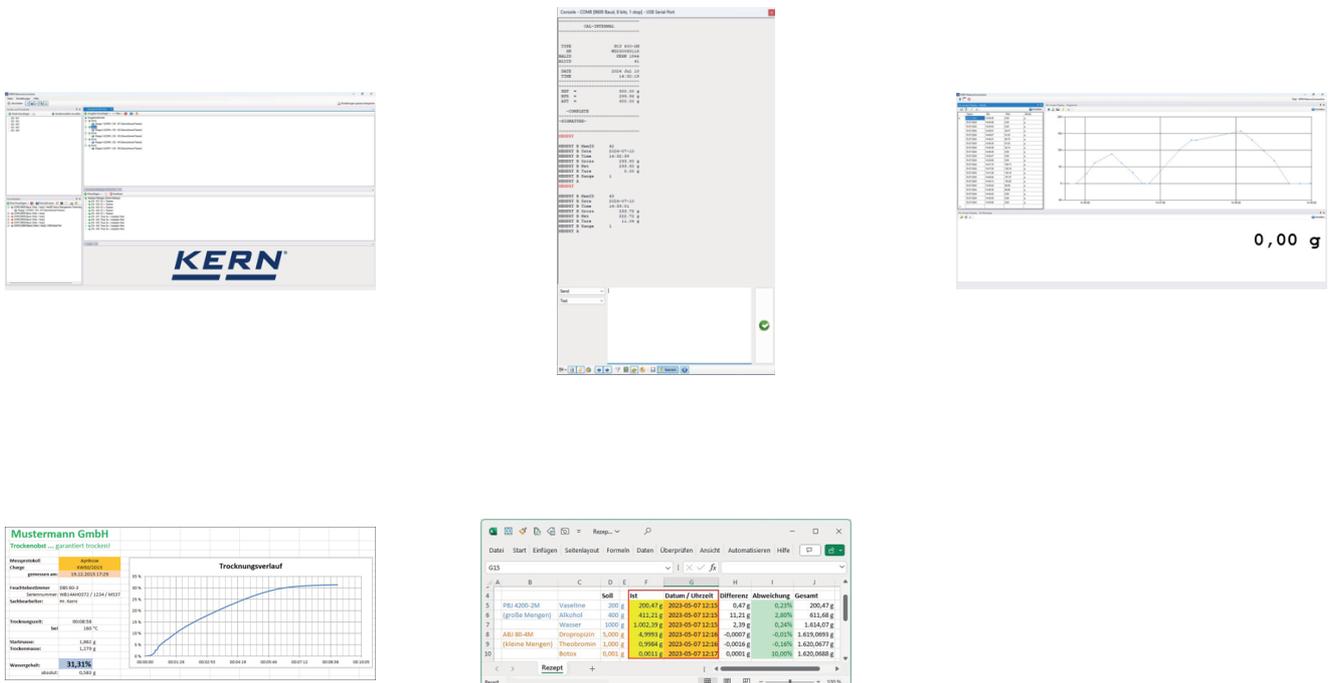

FRANCAIS

## DESCRIPTION

- Pour système d'exploitation Windows 10 (20H2) et plus récent, 11
- .NET Framework 4.8.1 requis
- Des droits d'administration complets sont nécessaires pour l'installation
- Prend en charge les balances et appareils de mesure avec USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, réseau LAN ou WiFi & #160;(TCP/UDP/IP)
- Formatage et configuration ultra-flexibles de la sortie (ordre et positionnement, formatage et arrondi au choix), y compris sur demande enregistrement de la date et de l'heure pour chaque valeur transmise
- Raccordement d'un nombre illimité d'appareils/d'interfaces, y compris avec enregistrement simultané et synchronisé de plusieurs balances
- Interrogation à la demande (par touche) ou programmée des valeurs mesurées ou déclenchement de fonctionnalités, y compris pour l'enregistrement continu
- Les protocoles d'interface des balances KERN (configuration standard) sont déjà prédéfinis. Prise en charge possible d'autres balances grâce à la configuration flexible
- Câble d'interface adéquat inclus pour la commande simultanée d'une balance KERN

- Nombreuses possibilités de transmission et d'enregistrement :
  - MicrosoftR Excel/Access/Word à l'avant ou à l'arrière-plan
  - Autres applications Windows (simulation d'appui sur touches), par exemple logiciel d'expédition ou ERP (SAP, Sage,...)
  - Enregistrement de fichier (fichier texte ou CSV, par exemple)
  - Impression sur papier ou étiquette
- Sorties à l'écran telles que grand affichage, diagramme d'évolution (courbe de séchage des analyseurs d'humidité), histogramme,...
- : Avantages
  - Pas d'erreurs de frappe comme p.ex. en cas de transmission manuelle
  - Enregistrement automatique, p.ex. en cas d'essais permanents
  - Logiciel de laboratoire conforme BPL
  - Possibilité d'utilisation dans tous les secteurs et toutes les applications
- Contenu de la livraison: Lien de téléchargement pour 5 licences

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	SCD-4.0-DLS05
Model-Serie	SCD
Assortiment	KERN
Type de produit	Logiciel
Groupe de produits	BalanceConnection
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 1488700
Modèle prédécesseur	SCD-4.0S05
Numéro de tarif douanier	852349 10

### Données techniques - Emballage et expédition

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

## SERVICES

Modèle	Description
970-105	Extension de garantie KERN (+2 ans) 970-105