



NEW



Impresora de agujas KERN YKT-01

Impresora de alta calidad con gran pantalla LCD y numerosas funciones

Datos técnicos

- Proceso de impresión: 8 imanes de impresión con matriz de puntos
- Velocidad: 1,7 línea por segundo
- Tamaño de los caracteres (caracteres ASCII): An×Al 1,7×2,6 mm
- Vida útil: 1 millón de líneas
- Casete de cinta en color: EPSON ERC-22 o ERC-09B
- Servicio vía adaptador de red 230 V/50 Hz estándar EU, equipamiento de serie

Accesorios

- Cinta para impresoras (1 ud.), KERN YKT-A03
- Rollo de papel (1 rollo), KERN 911-013-002
- Rollo de papel (10 rollos), KERN 911-013-010


Easy Touch

Consejo:

Impresión individual EasyTouch

El producto impreso (por ejemplo, las etiquetas) pueden diseñarse libremente. El tamaño del área de impresión y la colocación de los elementos de impresión pueden personalizarse. La función de código de barras permite imprimir cada elemento como un código de barras o QR code.

Para más detalles, véase *EasyTouch*

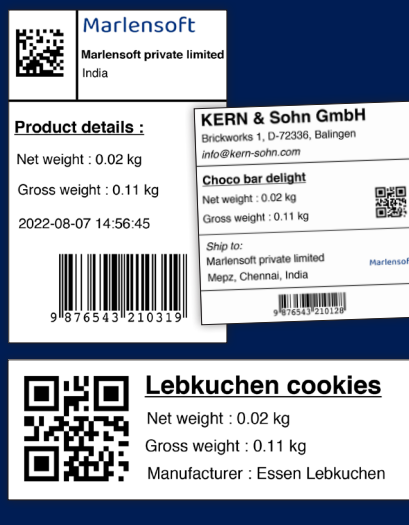

Ejemplo de impresión con ET impresión individual

ESTÁNDAR



Nota sobre el pedido de impresoras:

Indique en el pedido su modelo de balanza para que pueda preconfigurarse la impresora en la fábrica como corresponda.