


NEW

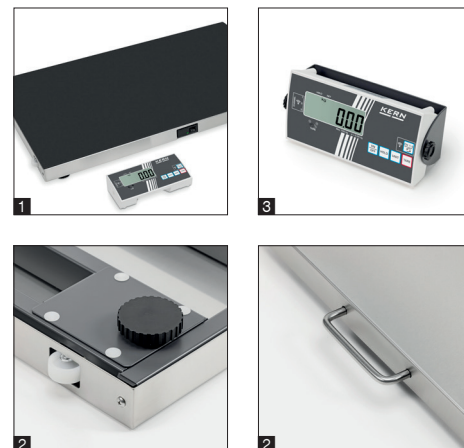

Entdecken Sie weitere Details und
passendes Zubehör online!

Kabellose Tierwaage für den flexiblen Einsatz in Praxis und Klinikalltag

Merkmale

- Robuste Plattformwaage zum Wiegen von größeren Tieren wie Hunden oder Katzen
- Kabellose Funkverbindung zwischen Plattform und Auswertegerät – kein Risiko für Beschädigung des Kabels, z. B. durch Anbeißen
- Drei Funkkanäle zur Anbindung mehrerer Plattformen an ein Auswertegerät
- Tara-Auslösung per Handbewegung dank integriertem Infrarotsensor – hygienisch und kontaktlos (deaktivierbar)
- Wägeplatte Edelstahl, leicht zu reinigen, Unterbau Stahl lackiert
- Die niedrige Bauhöhe der Plattform erleichtert das Betreten
- **1** Rutschfeste Gummimatte im Lieferumfang enthalten

- Tierwägeprogramm: Wenn sich das Tier während des Wiegens bewegt, wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“
- Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung
- Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- **2** Waage kann mittels Rollen und Haltegriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden
- Zwei externe Netzadapter serienmäßig für den Anschluss von Auswertegerät und Plattform
- **3** Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 210×110×45 mm
- Abmessungen Wägeplattform Edelstahl B×T×H 900×550×60 mm
- Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 70 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/35 °C
- Nettogewicht ca. 20 kg

Hauptanwendungsbereiche

- Heimtierbedarf
- Tierarztpraxen und Tierkliniken
- Medizintechnik
- Logistik und Versand
- Verpackung und Kommissionierung
- Qualitätssicherung



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Optionen
	[Max] kg	[d] g	Kalibrierschein
KERN			DAkS-akkr. KERN
EOS 150K-2 NEW	150	50	963-129