
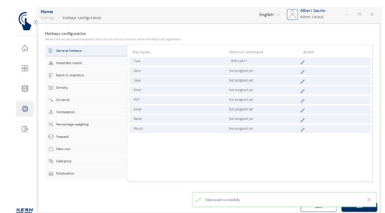
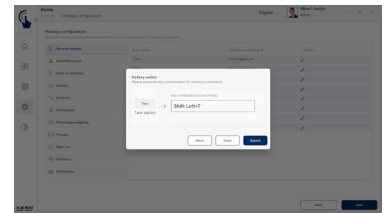


Software EasyTouch SET-411 Hotkeys

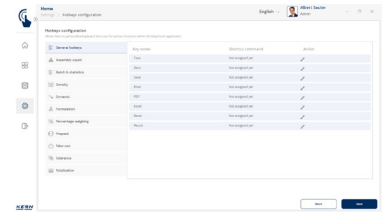

EasyTouch Hotkeys – Schnell Tasten und externe Schalter

Merkmale

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Schnell Tasten: Hotkeys ermöglicht die Belegung aller Schaltflächen in EasyTouch mit Tastenkombinationen. Dies vereinfacht den Zugriff auf häufig genutzte Funktionen erheblich, da die umständliche Navigation mit der PC-Maus entfällt. Stattdessen können gewünschte Aktionen schnell und direkt über die Tastatur ausgelöst werden
- Optionsartikel: Hotkeys ist eine optionale Erweiterung von EasyTouch, die alle aktiven und installierten Funktionen unterstützt. Bitte beachten Sie, dass im Preis der Zusatzfunktion keine Hardware wie Schalter, Taster oder Fußpedale enthalten ist
- Konfiguration der Schnell Tasten: Die Festlegung der Tastenkombinationen kann vom Systemadministrator oder einer autorisierten Person vorgenommen werden. Dabei lässt sich für jede gewünschte Funktion eine eindeutige und benutzerspezifische Tastenkombination festlegen
- Vielseitige Hotkeys-Auswahl: In EasyTouch können nicht nur spezifische Aktionstasten für bestimmte Funktionen, sondern auch allgemeine Tastenbefehle wie „Speichern“ oder „Tara“ als Hotkeys definiert werden. Diese sind dann in allen EasyTouch Funktionen anwendbar
- Aktivierung über Tastenkombination: Beispielsweise kann die TARE-Funktion einfach und schnell durch eine Tastenkombination aktiviert werden
- Integration externer Schalter oder Tasten: EasyTouch unterstützt die Zuordnung von Tastenkombinationen zu Signalen externer HID-Geräte (Human Interface Devices) über USB. So lässt sich die Software über externe Schalter wie Not-Aus-Knöpfe oder Fußschalter bedienen, was einen hands-free Betrieb und gesteigerte Effizienz ermöglicht. Zum Ablauf: In der Steuerungssoftware des handelsüblichen USB-Gerätes wird das externe Signal einer Tastenkombination zugeordnet. Diese wird vom PC empfangen. Dort betätigt das Signal die zugeordnete EasyTouch Funktion

STANDARD



OPTION

