KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Alemania
+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

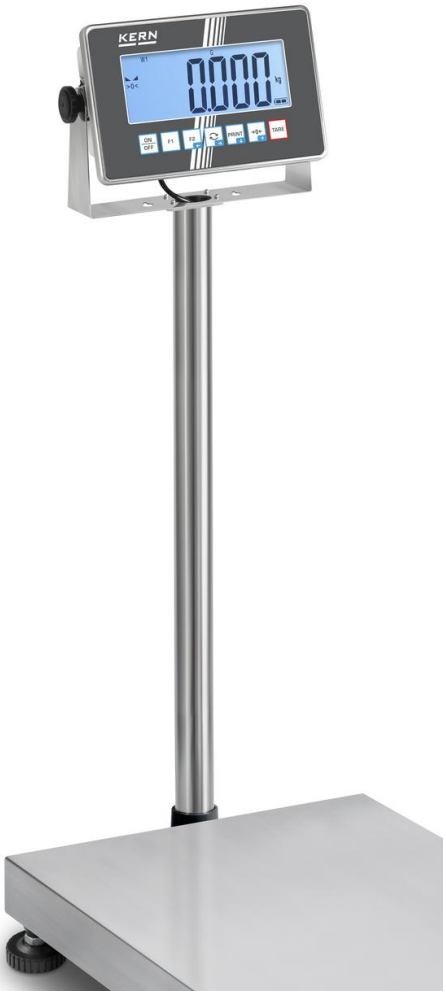
Instrucciones de instalación
Trípodes

KERN SXC, IXC

Tipo
TSXC-A01-A
TIXC-A01-A
TIXC-A02-A

Versión 2.0
2026-06
es





es

Trípodes

Versión 2.0 2026-06

Manual de instalación

Índice

1 Datos técnicos 3

1.1 Dimensiones 3

2 Contenido del envío 6

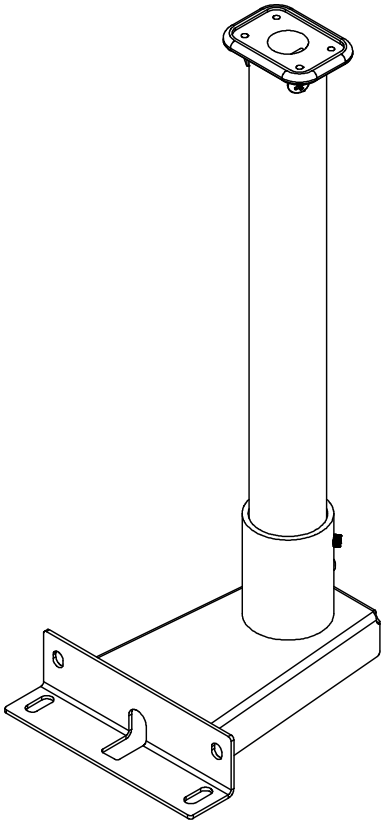
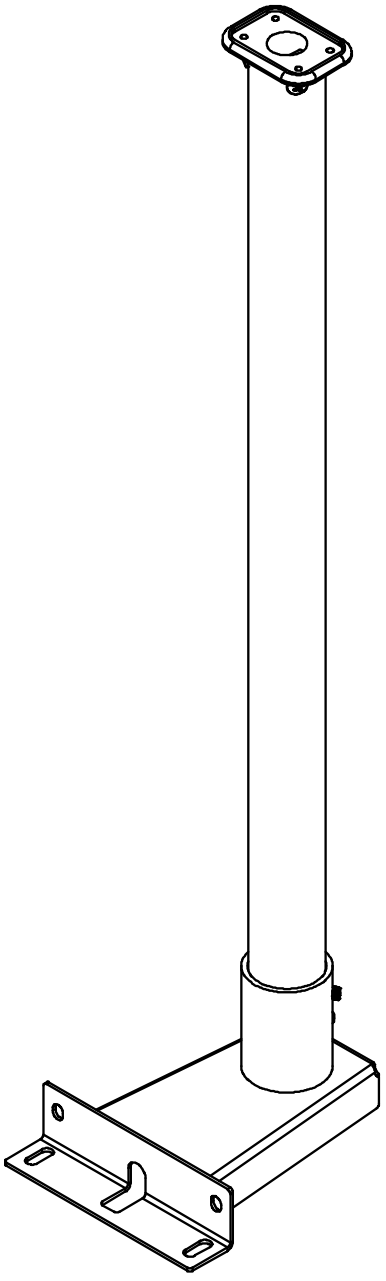
3 Instalación 7

1 Datos técnicos

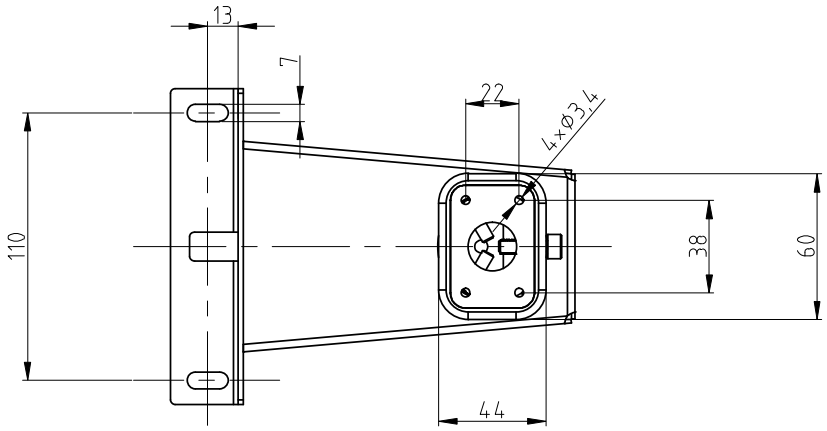
KERN	TSXC-A01-A	TIXC-A01-A	TIXC-A02-A
Altura del trípode (mm)	330	330	600

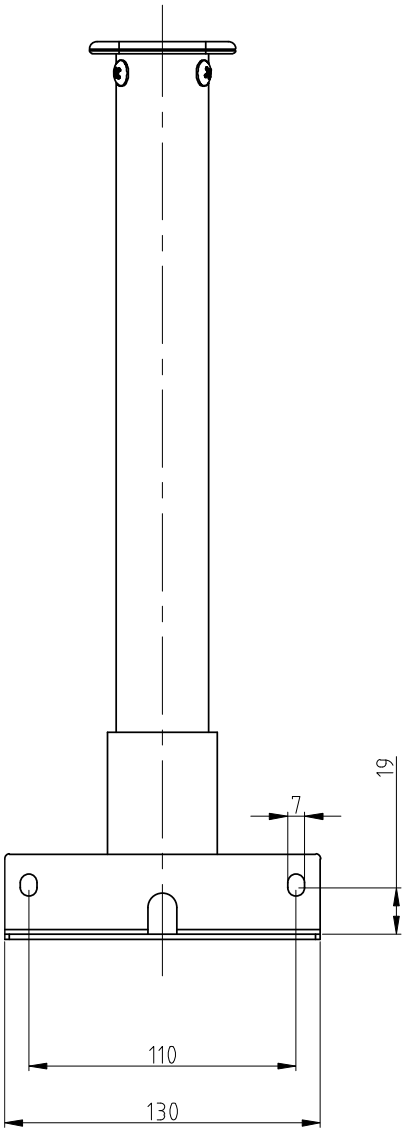
1.1 Dimensiones

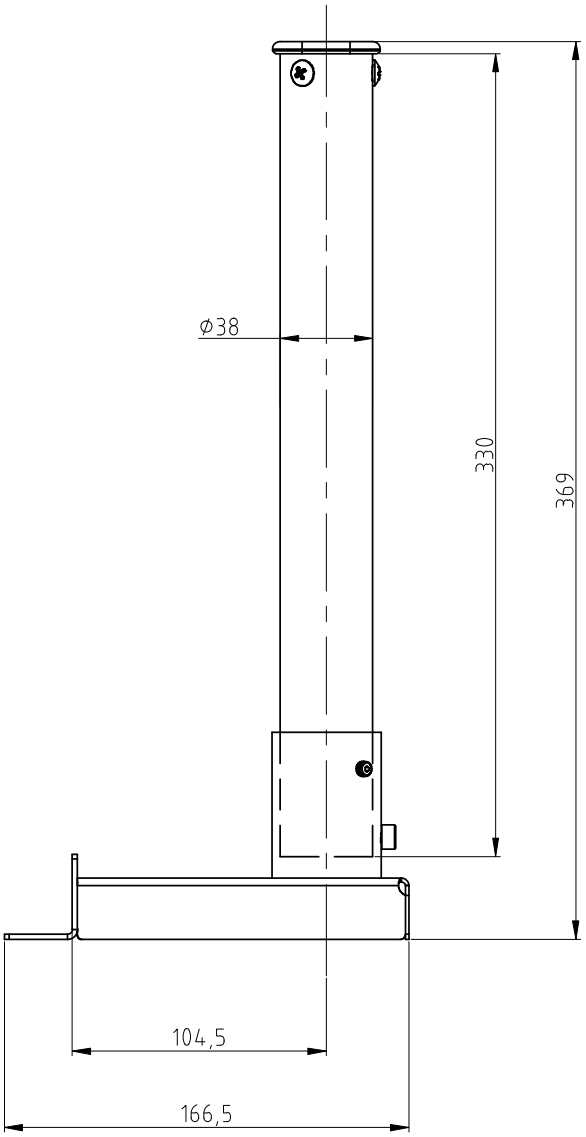
- Dimensiones en mm
- Planos en la página siguiente

Modelos de 330 mm	Modelos de 600 mm
	

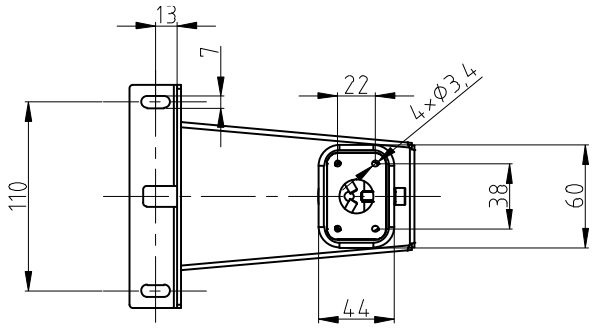
Modelos de 330 mm:

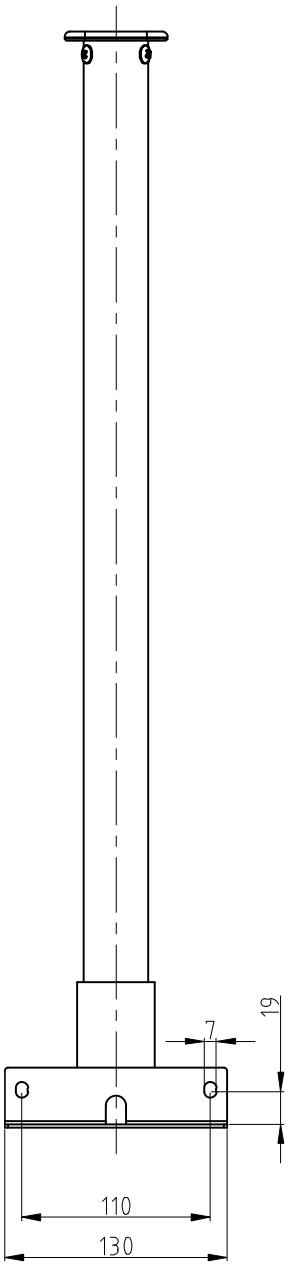


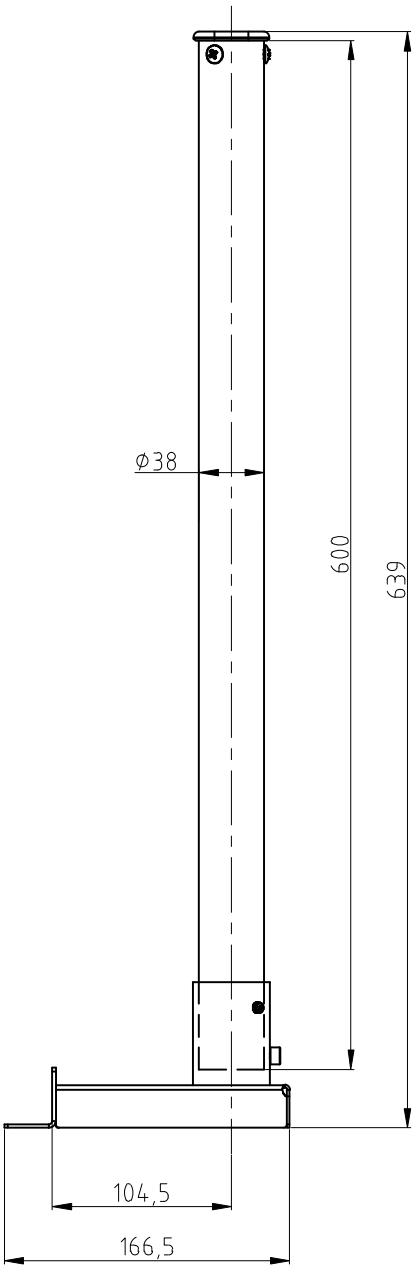




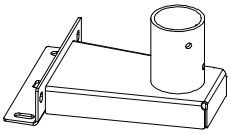
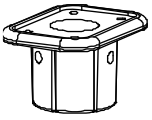
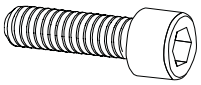
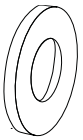
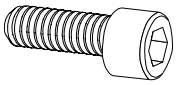
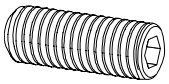
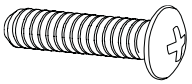
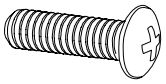
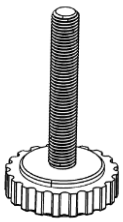
Modelos de 600 mm:







2 Contenido del envío

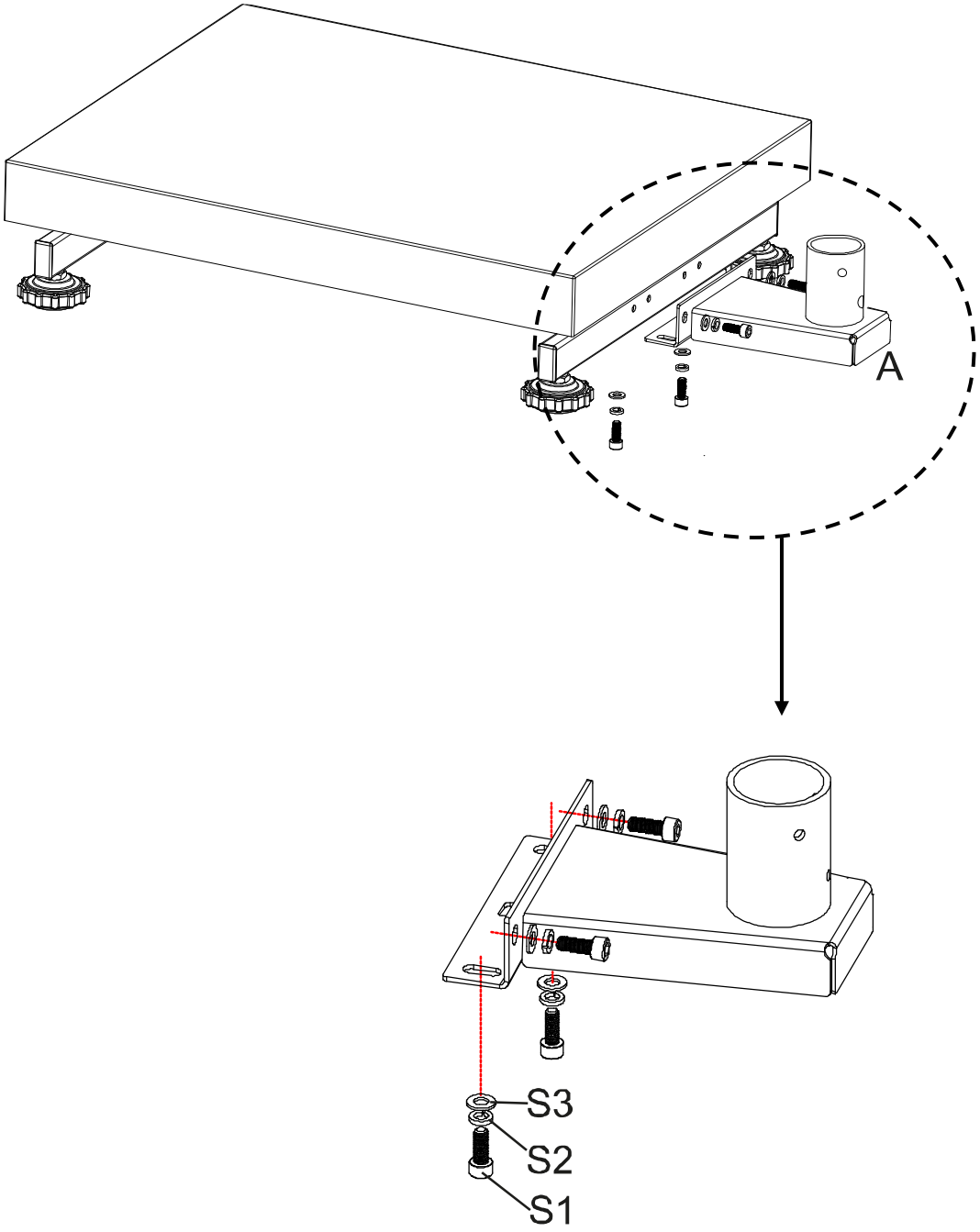
 **A** Base del trípode 1 x	 **B** Tubo del trípode 1 x	 **C** Soporte para dispositivo de visualización 1 x
 **S1** M6 x 16 4 x	 **S2** Arandela elástica 4 x	 **S3** Arandela 4 x
 **S4** M6 x 12 1 x	 **S5** M6 x 10 2 x	 **S6** M5 x 16 3 x
 **S7** M4 x 10 4 x	 **S8** Pata de apoyo 1 x	 **S9** Tuerca M6 1 x

3 Instalación

Fijación de la base del trípode a la plataforma:

1. Coloque la base del trípode **(A)** en el centro, sobre los orificios del lateral de la plataforma.
2. Colocar primero la arandela elástica **(S2)** y luego la arandela plana **(S3)** en el tornillo **(S1)** (4 veces).
3. Atornille la base del trípode.

   Asegúrese de no pellizcar ni dañar ningún cable.

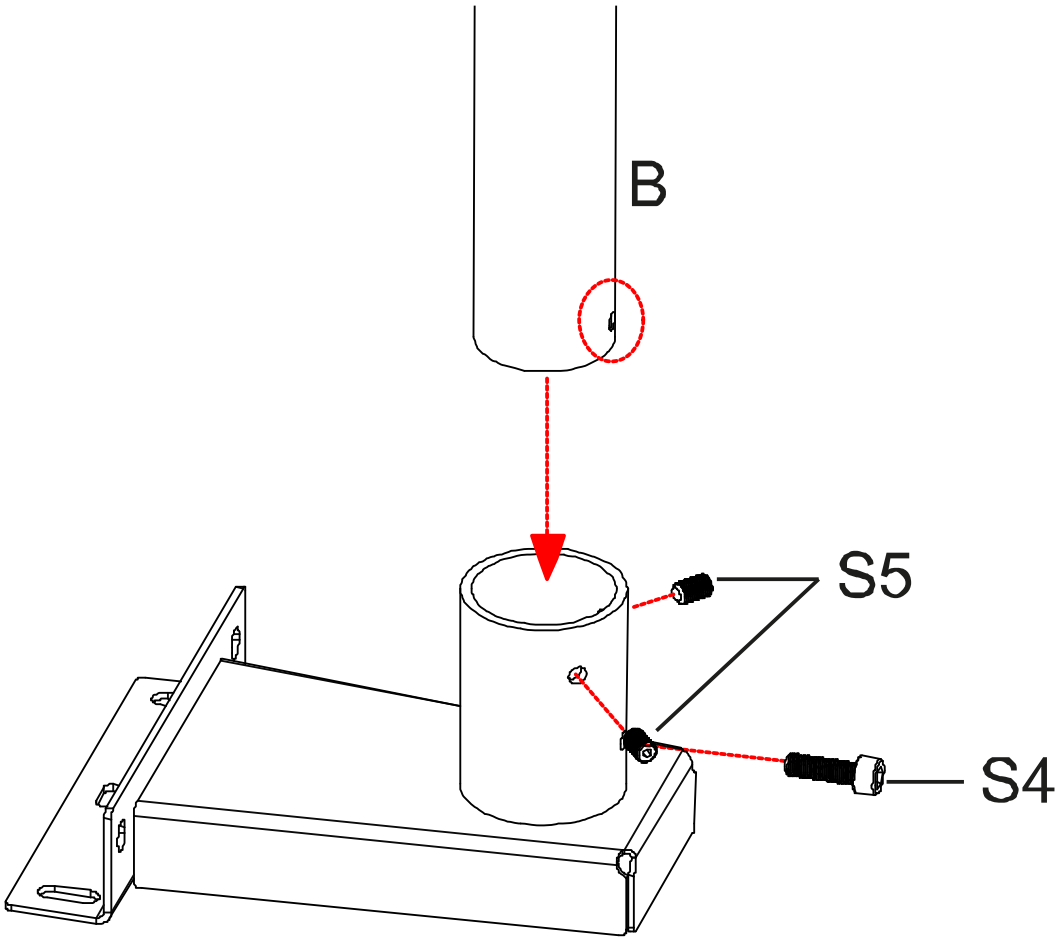


Montaje del tubo del trípode en la base del trípode:

4. Desenrosque los tornillos **S4** y **S5** del tubo del trípode.

5. Inserte el tubo del trípode **(B)** en la base del trípode. Asegúrese de que el orificio del tubo del trípode coincida con el orificio **S4**.

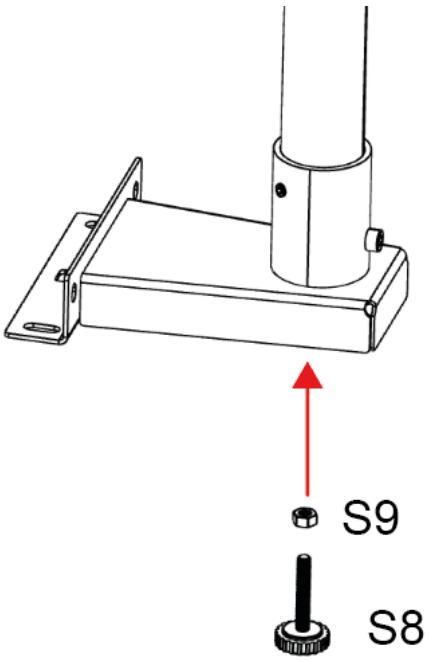
6. Vuelva a enroscar los tornillos **S5** y fije el tubo del trípode con el tornillo **S4**.



7. Enrosque la tuerca **S9** en la pata de apoyo **S8**.

8. Atornille la pata de ajuste con la tuerca desde abajo en el tubo del trípode.

9. Desenrosque la pata de apoyo hasta que toque el suelo y fíjela con la tuerca **S9**.



Fijación del dispositivo de visualización al tubo del trípode:

10. Introduzca el soporte del dispositivo de visualización **(C)** en el tubo del trípode y fíjelo con los tornillos **S6**.

11. Fijar el dispositivo de visualización al soporte del dispositivo de visualización con los tornillos **S7**.

