


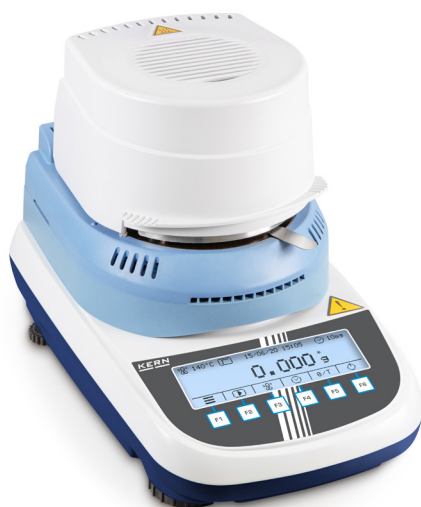

Feuchtebestimmer mit intuitivem Grafikdisplay und step-by-step Bedienerführung in 6 Sprachen

Merkmale

- Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display, Ziffernhöhe 11 mm
- 6 Direkttasten für schnellen Zugriff auf die Hauptfunktionen

Startbildschirm:

- 1 Hauptmenü
- 2 Trocknungsvorgang starten
- 3 Trocknungstemperatur auswählen
- 4 Abschaltkriterium auswählen

- 5 Nullstellen/Tarieren
- 6 Stand-by

Während der Messung:

- 7 Aktuelle Temperatur
- 8 Aktuelles Heizprofil
- 9 Aktives Abschaltkriterium
- 10 Trocknungsvorgang abbrechen
- 11 Trocknungsvorgang anhalten
- 12 Aktuelle Trocknungsparameter anzeigen
- 13 Einheit der Ergebnisanzeige umschalten

STANDARD






OPTION



KERN	DLB 160-3A
Ablesbarkeit [d] Masse/Feuchte (%)	0,001 g / 0,01%
Wägebereich [Max]	160 g
Reproduzierbarkeit bei Einwaage 2 g*	0,15%
Reproduzierbarkeit bei Einwaage 10 g*	0,05%
Anzeige nach Trocknung (Anzeige jederzeit umschaltbar)	
Feuchte [%] = Feuchtegehalt (M) vom Nassgewicht (W)	0 - 100 %
Trockengehalt [%] = Trockengewicht (D) vom [W]	100 - 0 %
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100 %	0 - 999 %
Restgewicht (M)	Absolutwert in [g]
Temperaturbereich (in Schritten zu)	35 °C - 160 °C (1 °C)
Heizprofile	Standardtrocknung Schnelltrocknung, Vorheizstufe zuschaltbar Automatisches freies Abschalten (Gewichtsverlust wählbar 0,01mg/30s - 10 mg/30s) Zeitgesteuertes Abschalten (1 min - 12 h) Manuelles Abschalten per Tastendruck
Abschalt-Kriterien	Intervall einstellbar von 5 s - 250 s
Protokollausgabe	Intervall einstellbar von 5 s - 250 s
Gesamtabmessungen B×T×H	215×345×235 mm
Nettogewicht	4,7 kg
Option DAKKS-Kalibrierschein Masse	963-127
Option Werkskalibrierschein Temperatur	964-305

* applikationsabhängig

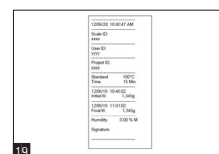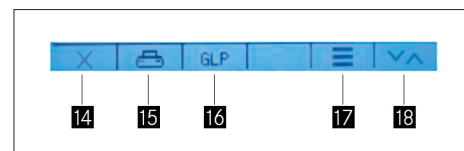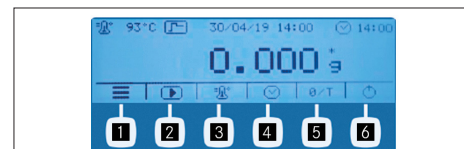

Nach Ende der Messung:

- 14 Trocknungsprogramm verlassen
 - 15 Messprotokoll drucken
 - 16 GLP Parameter (de)aktivieren, editieren
 - 17 Ergebnis detailliert anzeigen
 - 18 Einheit der Ergebnisanzeige umschalten
- Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
 - Bedienerführung in 6 Sprachen (DE, EN, FR, IT, ES, PT)
 - Automatisches Tarieren beim Start einer Messung durch Schließen des Deckels
 - Der letzte Messwert bleibt im Display bis zur nächsten Messung sichtbar
 - 19 GLP intern; Ausdruck von Waagen-ID, Projekt-ID, Benutzer-ID, ermittelte Werte des Trocknungsvorgangs etc.
 - 10 Probenschalen inklusive
 - Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
 - Im Internet finden Sie zu jedem KERN-Feuchtebestimmer ein praktisches Applikationshandbuch mit vielen Beispielen, Erfahrungsberichten, Einstellungen und Tipps

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN ALJ-A01S05
- Probenschalen aus Aluminium, Ø 90 mm. Gebinde zu 80 Stück, KERN MLB-A01A
- Glasfaser-Rundfilter, hohe mechanische Stabilität, mit organischem Binder, Gebinde zu 100 Stück, KERN RH-A02
- Temperatur-Kalibrierset bestehend aus Messfühler mit Auswertegerät KERN DLB-A01N.
- Thermodrucker, KERN YKH-01
- Matrix-Nadeldrucker, zum Ausdruck von Wägewerten auf Normalpapier, dadurch für längerfristige Archivierung geeignet, KERN 911-013