KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Alemanha
+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

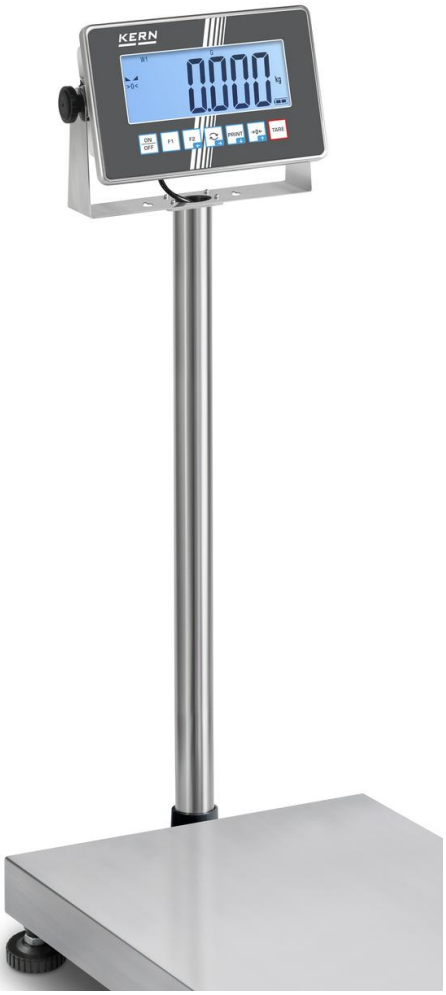
Instruções de instalação
Tripés

KERN SXC, IXC

Tipo
TSXC-A01-A
TIXC-A01-A
TIXC-A02-A

Versão 2.0
2026-06
pt





pt

Tripés

Versão 2.0 2026-06

Manual de instalação

Índice

1 Dados técnicos 3

1.1 Dimensões 3

2 Conteúdo da embalagem 6

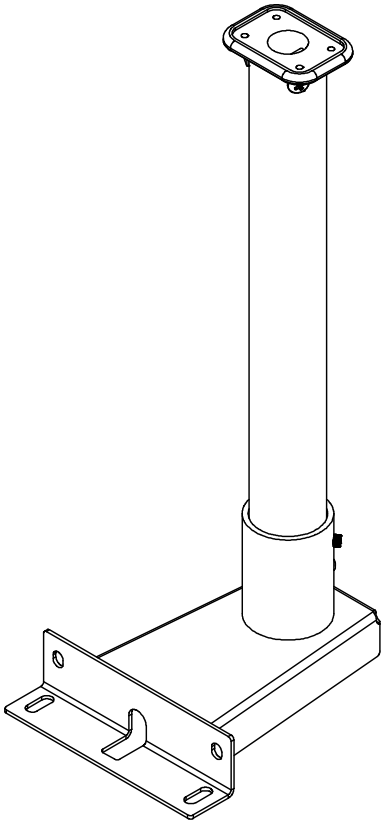
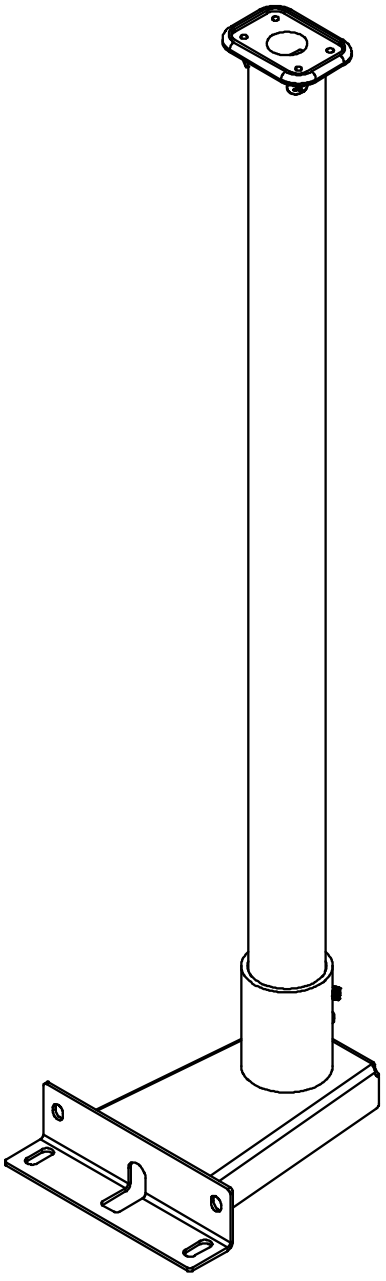
3 Instalação 7

1 Dados técnicos

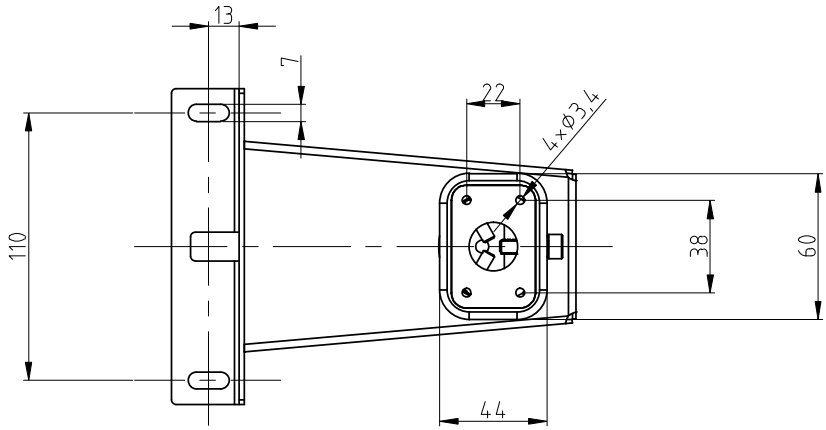
KERN	TSXC-A01-A	TIXC-A01-A	TIXC-A02-A
Altura do tripé (mm)	330	330	600

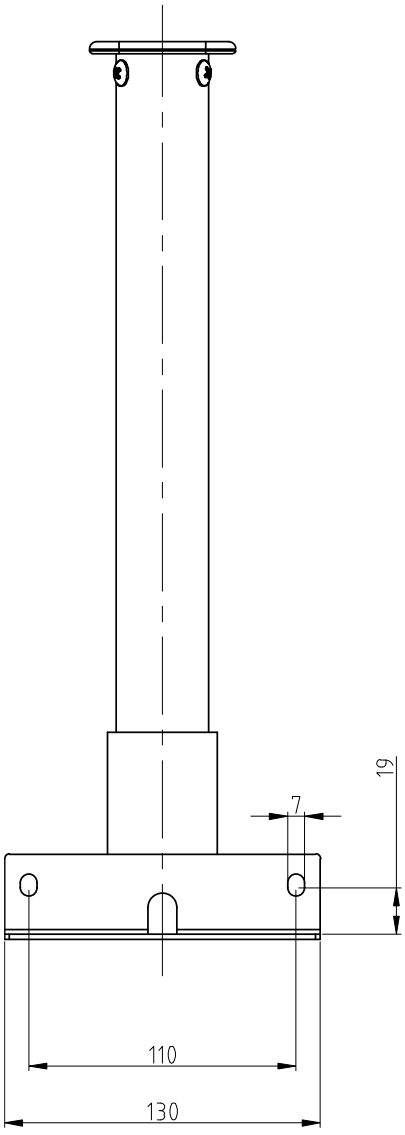
1.1 Dimensões

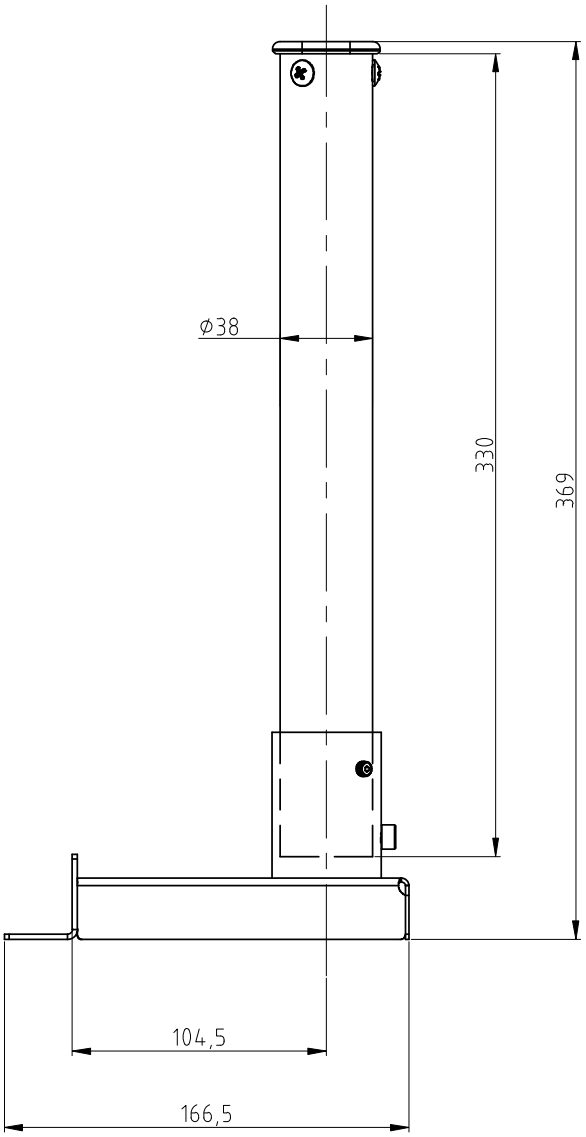
- Dimensões em mm
- Desenhos na página seguinte

Modelos com 330 mm	Modelos com 600 mm
	

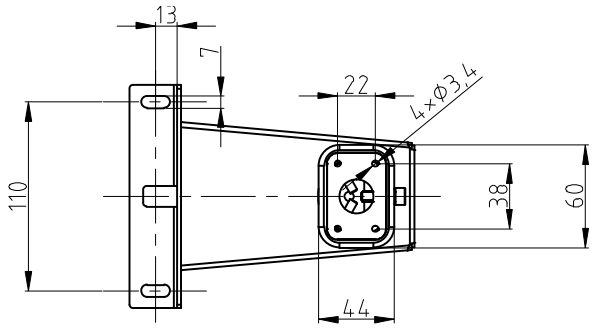
Modelos com 330 mm:

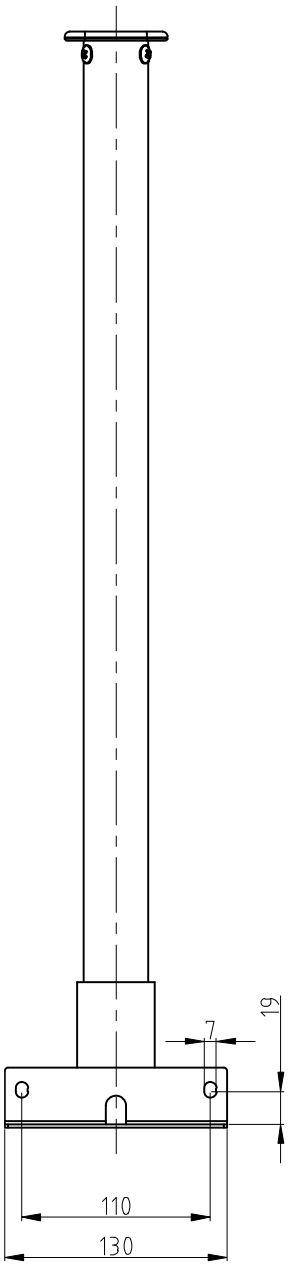


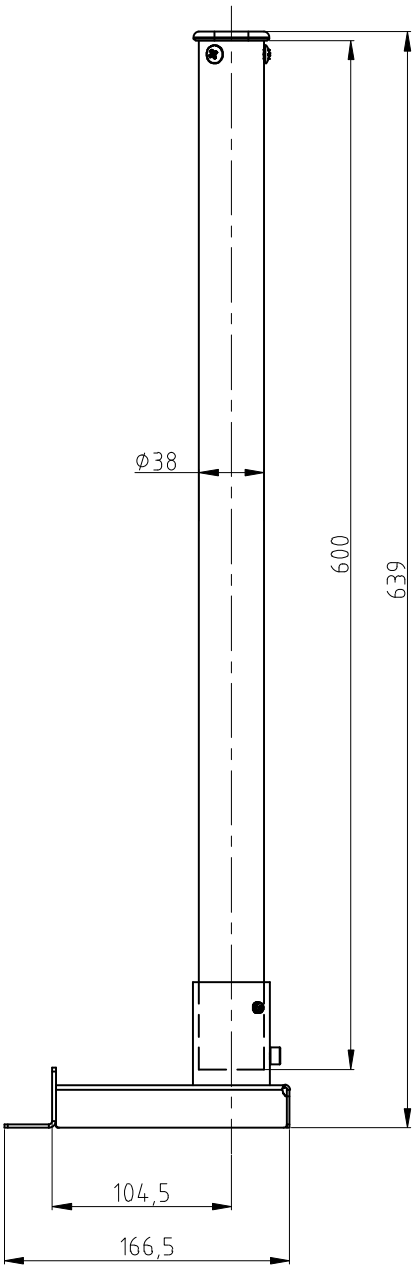




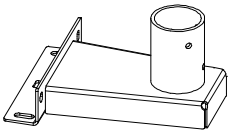
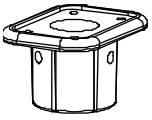
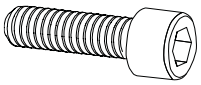
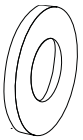
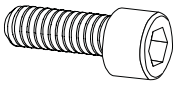
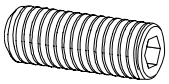
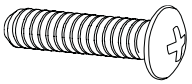
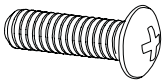
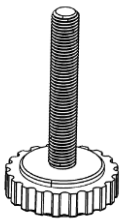
Modelos com 600 mm:







2 Conteúdo da embalagem

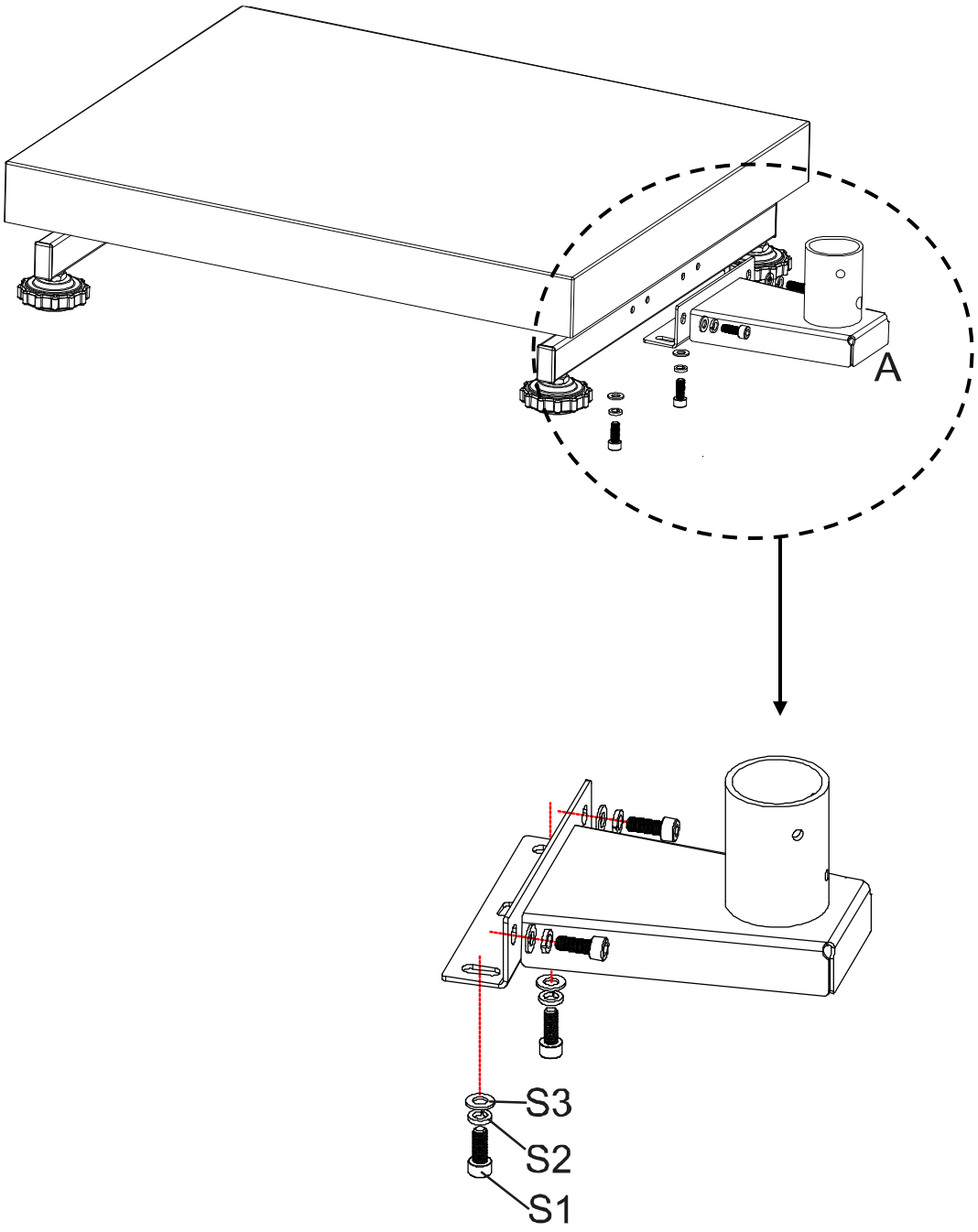
 **A** Base do tripé 1 x	 **B** Tubo do tripé 1 x	 **C** Suporte para dispositivo de visualização 1 x
 **S1** M6 x 16 4 x	 **S2** Arruela elástica 4 x	 **S3** Arruela 4 x
 **S4** M6 x 12 1 x	 **S5** M6 x 10 2 x	 **S6** M5 x 16 3 x
 **S7** M4 x 10 4 x	 **S8** Pé de apoio 1 x	 **S9** Porca M6 1 x

3 Instalação

Fixação do pé do tripé à plataforma:

1. Posicione o pé do tripé **(A)** centralmente sobre os orifícios no lado da plataforma.
2. Coloque primeiro a anilha elástica **(S2)** e, em seguida, a anilha plana **(S3)** no parafuso **(S1)** (4 x).
3. Aperte o pé do tripé.

   Certifique-se de que não prende nem danifica nenhum cabo.

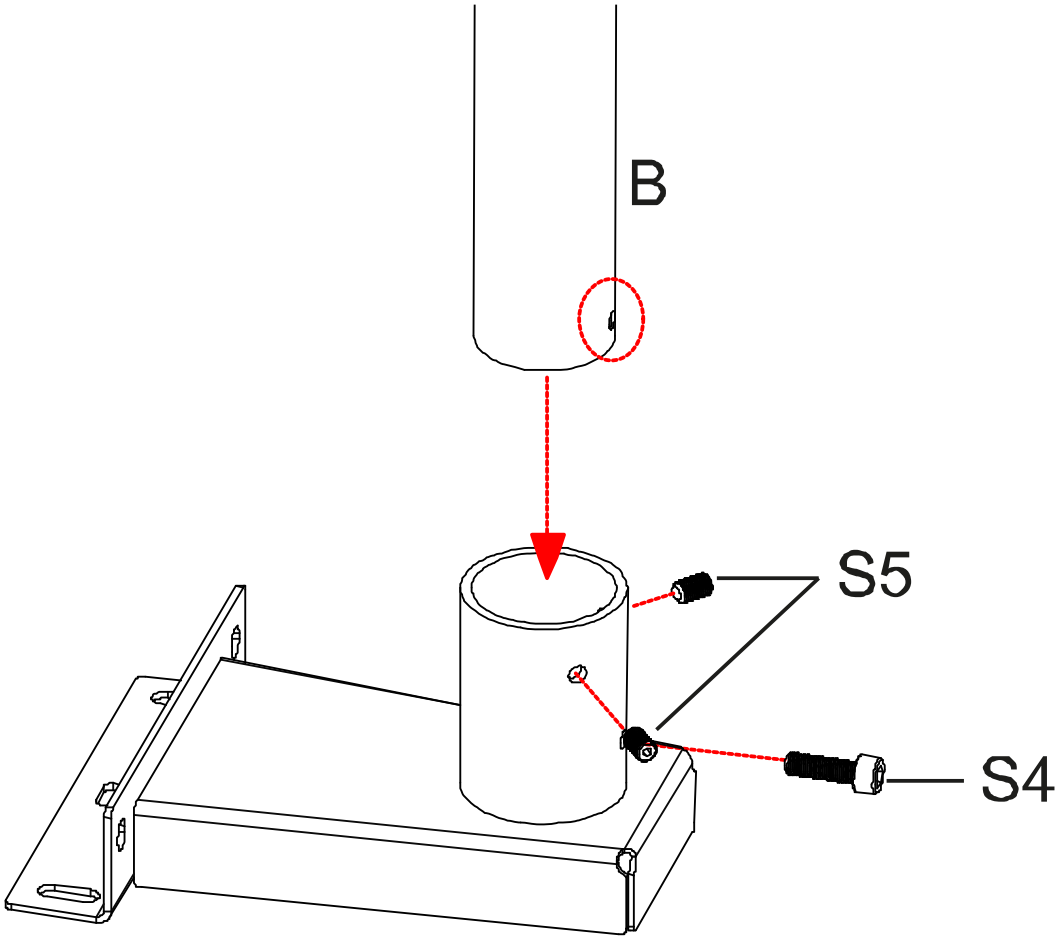


Montagem do tubo do tripé na base do tripé:

4. Desaperte os parafusos **S4** e **S5** do tubo do tripé.

5. Encaixe o tubo do tripé **(B)** na base do tripé. Certifique-se de que o orifício do tubo do tripé coincide com o orifício **S4**.

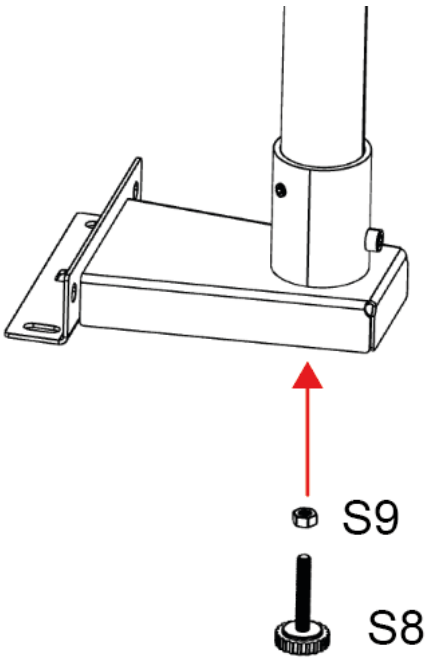
6. Volte a apertar os parafusos **S5** e fixe o tubo do tripé com o parafuso **S4**.



7. Aperte a porca **S9** no pé de apoio **S8**.

8. Aperte o pé de apoio com a porca a partir de baixo no tubo do tripé.

9. Desenrosque o pé de apoio até que este toque no chão e fixe-o com a porca **S9**.



Montagem do dispositivo de indicação no tubo do tripé:

10. Insira o suporte do dispositivo de indicação **(C)** no tubo do tripé e fixe-o com os parafusos **S6**.

11. Fixar o dispositivo de indicação ao suporte para o dispositivo de indicação com os parafusos **S7**.

