KERN & Sohn GmbH
Pedreiro 1
D-72336 Balingen
Correio eletrónico: info@kern-sohn.com
Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Instruções de instalação Tripé

KERN IFB-A01 / A02

Versão 2.0
2026-05
pt





pt

Tripé

Versão 2.0 2026-05

Instruções de instalação

Índice

1 Dados técnicos 3

1.1 Dimensões 4

2 Âmbito de fornecimento 6


3 Instalação 7


1 Dados técnicos


KERN	IFB-A01	IFB-A02
Altura do tripé (mm)	330	600
Para tamanhos de plata-forma (mm)	300 x 240 400 x 300 500 x 400 650 x 500	400 x 300 500 x 400 650 x 500

1.1 Dimensões


Modelos com 330 mm:

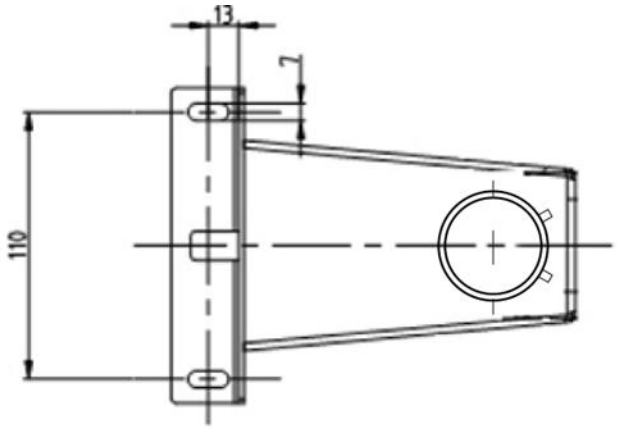


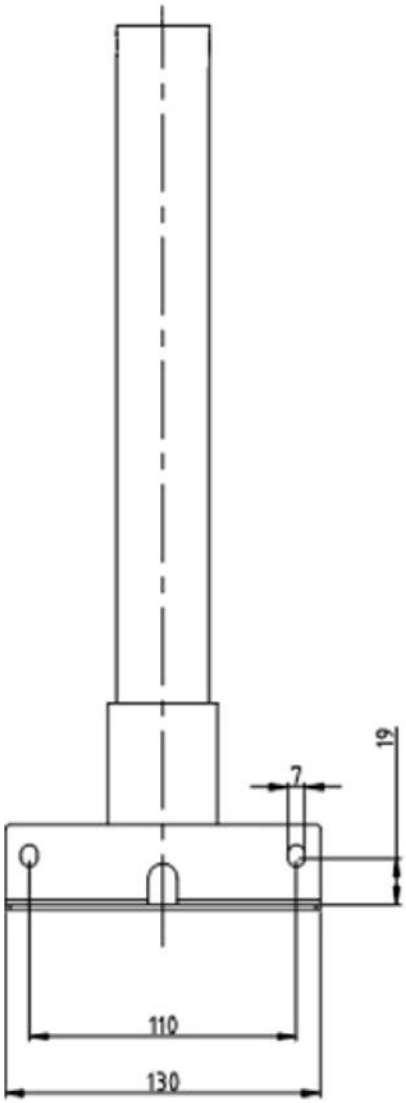


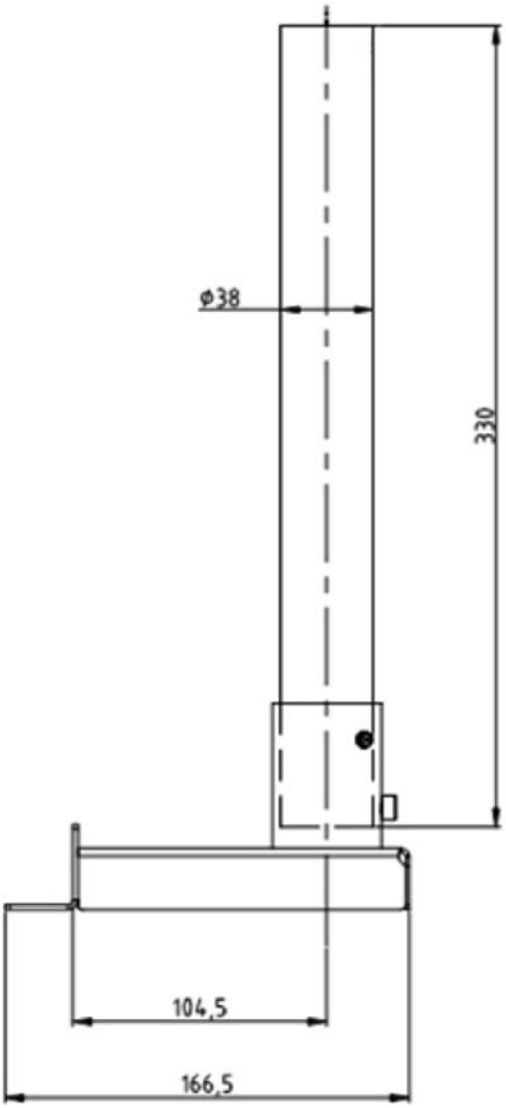











Modelos com 600 mm:

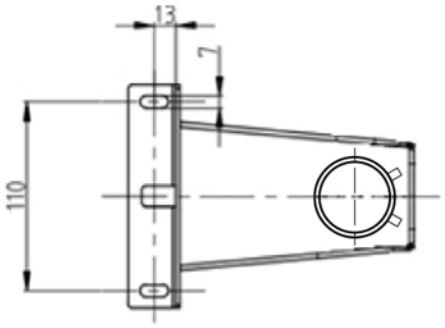

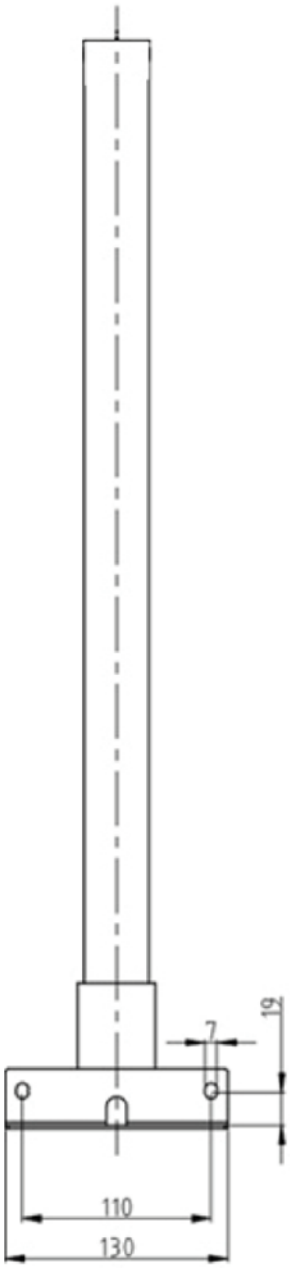

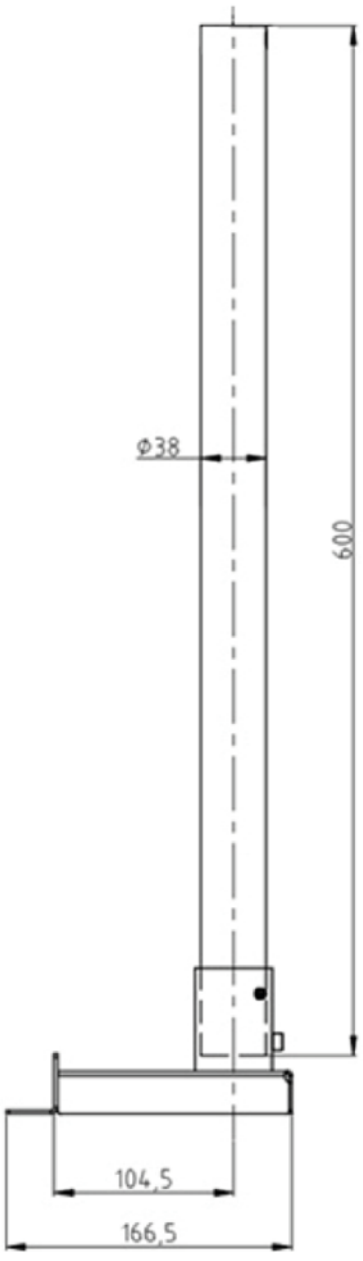

2 Âmbito de fornecimento

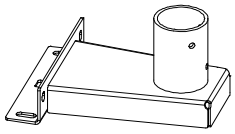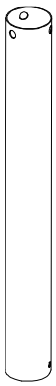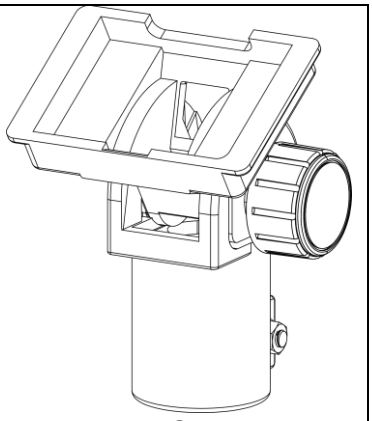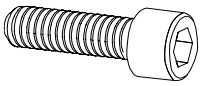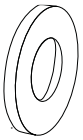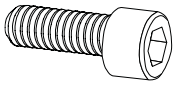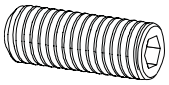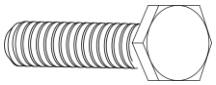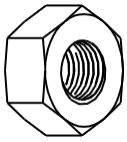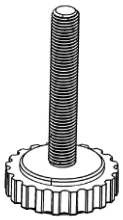 **A** Base do tripé 1 x	 **B** Tubo do tripé 1 x	 **C** Suporte para expositor 1 x
 **S1** M6 x 16 4 x	 **S2** Arruela de pressão 4 x	 **S3** Máquina de lavar roupa 5 x
 **S4** M6 x 12 1 x	 **S5** M6 x 10 2 x	 **S6** M8 x 20 1 x
 **S7** Porca M8 1 x	 **S8** Pé de apoio 1 x	 **S9** Porca M6 1 x


C, **S3** (1x), **S6** e **S7** são fornecidos pré-montados.

3 Instalação

Fixe a base do tripé à plataforma:

1. Colocar a base do suporte **(A)** no centro, por cima dos orifícios situados na parte lateral da plataforma.
2. Colocar primeiro a anilha de mola **(S2)** e depois a anilha **(S3)** no parafuso **(S1**) (4 x).
3. Aperte a base do tripé.

   Certifique-se de que não aperta nem danifica nenhum cabo.

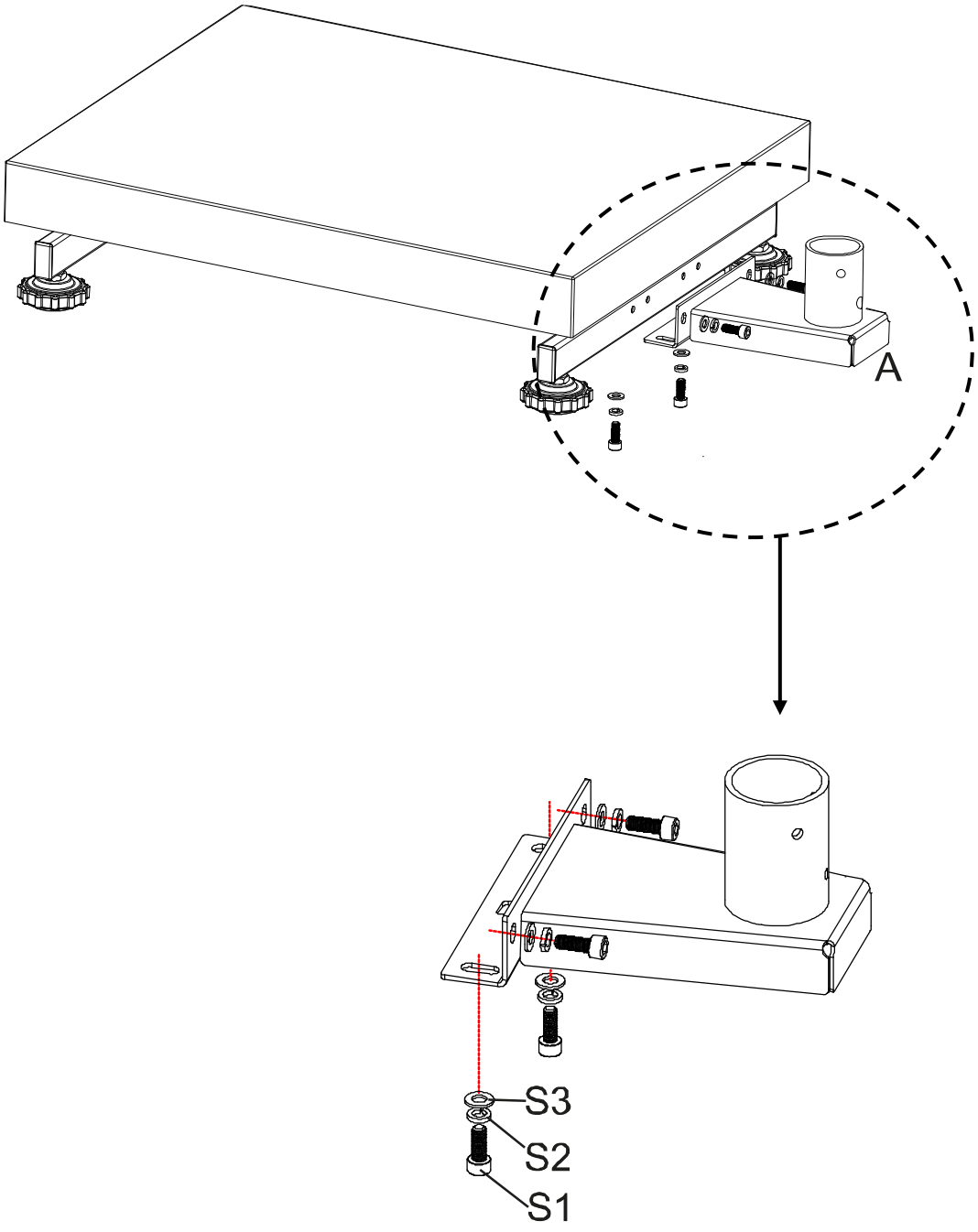


Fixe o tubo do tripé à base do tripé:

4. Desaparafusar os parafusos **S4** e **S5** do tubo do suporte.

5. Insira **o** tubo do tripé **(B)** na base do tripé. Certifique-se de que o orifício no tubo do suporte coincide com o orifício **S4**.


6. Aparafusar novamente os parafusos **S5** e fixar o tubo do suporte com o parafuso **S4**.

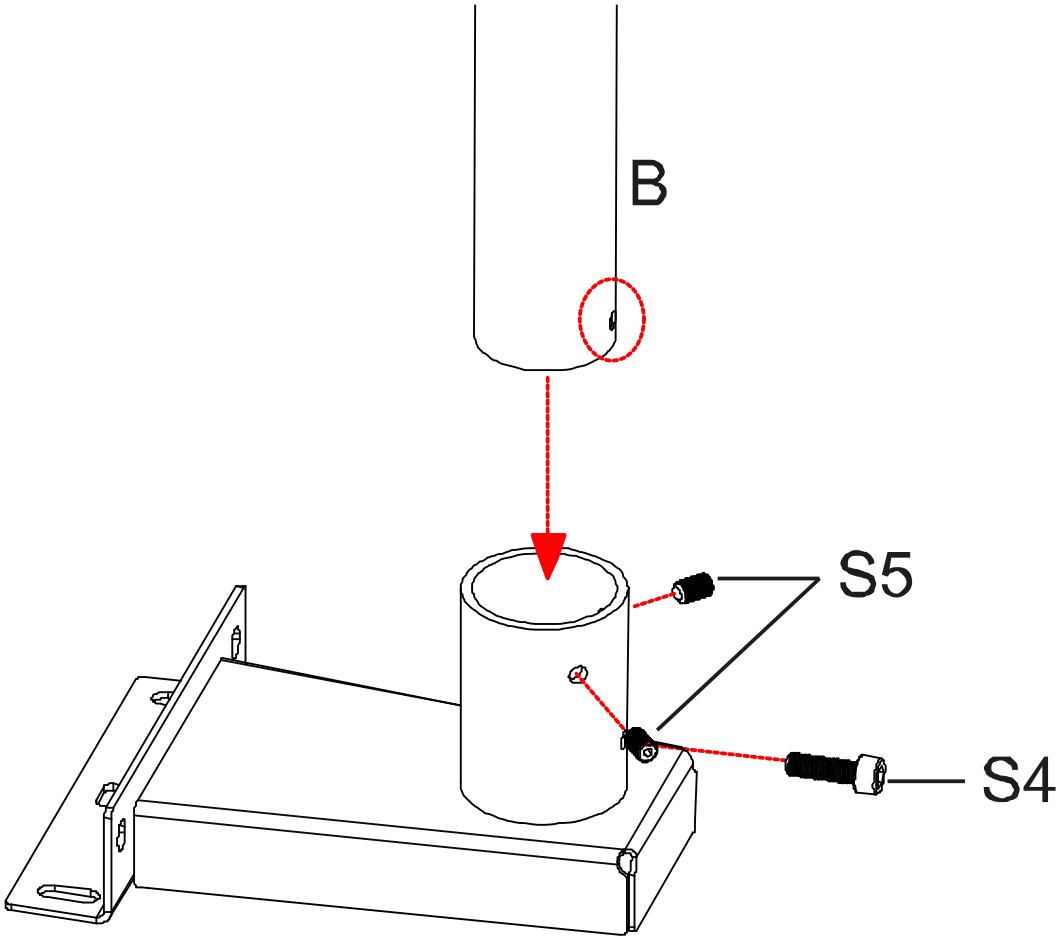

7. Aperte a porca **S9** no pé de apoio **S8**.


8. Enrosque o pé de apoio com a porca, a partir de baixo, no tubo do tripé.

9. Desenrosque o pé de apoio até que este toque no chão e fixe-o com a porca **S9**.

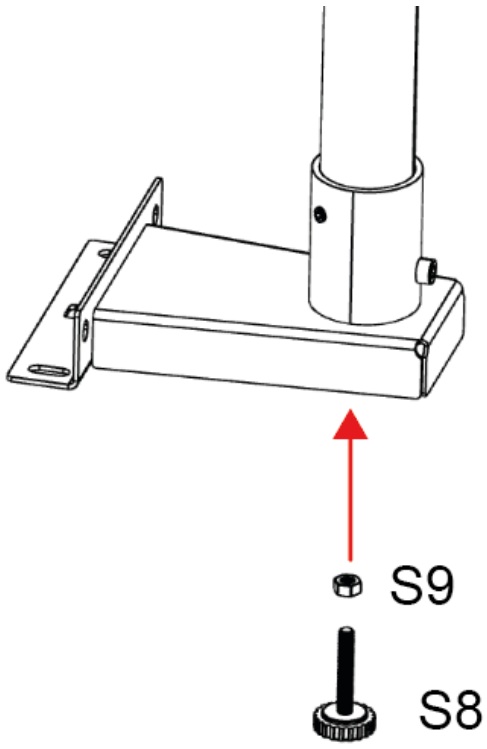

Fixar a unidade de visualização ao tubo do suporte:

10. Introduzir o suporte da unidade de visualização **(C)** no tubo do suporte e fixá-lo com os parafusos **S6.**

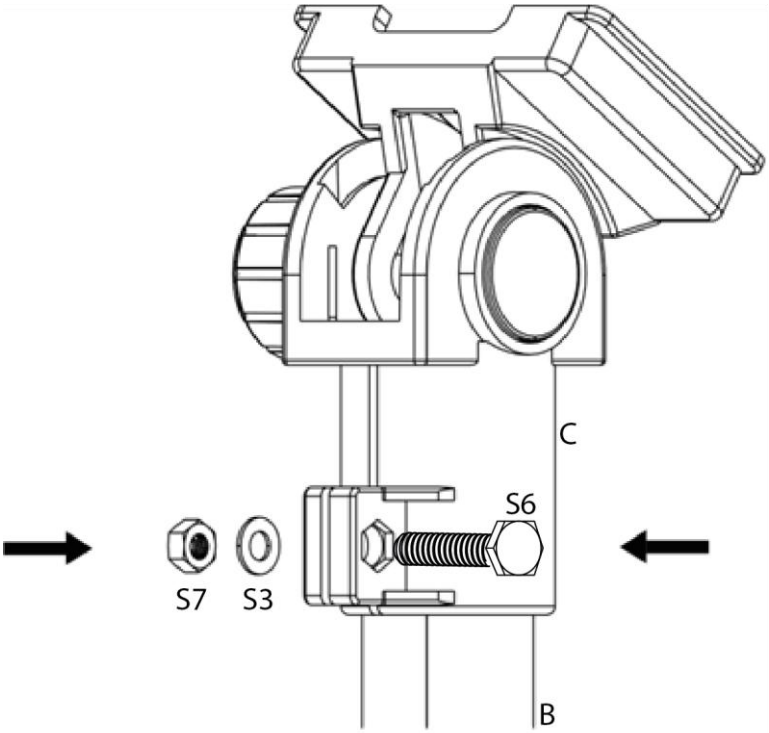

⇨ Introduzir o suporte **(C)** da unidade de visualização na extremidade superior do tubo do suporte **(B)** e fixar com o parafuso **(S6).**

Contrapor no lado oposto a anilha **(S3)** e a porca **(S7).**