


# Software EasyTouch SET-18 Container Master

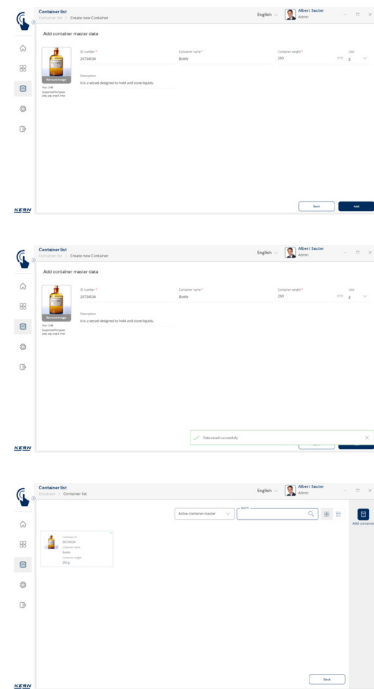

## EasyTouch Container Master – Zentrale Behälterverwaltung

### Merkmale

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Behälter-Management: Verschiedene Artikel werden in gleichartigen Behältern (Containern) gelagert und gewogen. Die Tara-Gewichte dieser Behälter lassen sich mit SET-18 Container Master zentral verwalten. Ändert sich das Gewicht eines Behälters, wird das neue Tara-Gewicht einfach in Container Master aktualisiert und automatisch bei allen zugehörigen Artikeln und Funktionen der Anwendung übernommen
- Feste Zuordnung: Jedem Stammdatenobjekt kann ein Behälter fest zugeordnet werden, um Konsistenz zu gewährleisten
- Behälter-Anzeige: Bei der Verwendung eines Stammdatenobjektes sehen Nutzer in Easy Touch den fest zugeordneten Behälter oder einen manuell ausgewählten Behälter. Dies reduziert das Risiko von Verwechslungen und verbessert die Genauigkeit im Arbeitsprozess
- Behälter-Auswahl: Nutzer können auch ohne vorherige Festlegung einen Behälter direkt im Wiegevorgang auswählen, beispielsweise durch Scannen der Behälter-ID mittels Barcode. Dies trägt dazu bei, fehlerhafte Tara-Eingaben zu vermeiden

STANDARD



OPTION

