



RS-232/Ethernet-Konverter KERN YKI-10 • YKI-11

Technische Daten


- Konverter zur Anbindung von Waagen, Kraftmessinstrumenten etc. mit RS-232-Datenschnittstelle an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk
- Ermöglicht eine direkte Integration von Messgeräten in die meisten Firmennetzwerke, mit automatischer Konfiguration über DHCP oder statischer IP-Vergabe. Der Zugriff auf die aktuellen Messdaten ist vom gesamten Netzwerk aus jederzeit möglich
- Der Konverter unterstützt vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten über das Web-Interface
- Kompatibel mit **KERN Software BalanceConnection**
- Geeignet für Wandmontage oder freistehend

Lieferumfang:

KERN YKI-10: RS-232/Ethernet-Konverter mit 1x RS-232-Port, Netzadapter (EU)

KERN YKI-11: RS-232/Ethernet-Konverter mit 2x RS-232-Ports, Netzadapter EU). Die beiden RS-232-Ports ermöglichen es, zwei Waagen bzw. Messgeräte parallel anzuschließen und zu verwalten.

STANDARD

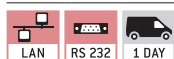


RS-232/WLAN-Konverter KERN YKI-12

Technische Daten

- Konverter zur kabellosen Anbindung von Waagen, Kraftmessinstrumenten etc. mit RS-232-Schnittstelle an WLAN-fähige Geräte, wie Tablets, Laptops, Smartphones oder Netzwerke
- So können Wägedaten bei räumlicher Trennung oder großer Distanz kabellos von einer Waage bequem an ein oder mehrere WLAN-Geräte oder in ein Netzwerk übertragen werden (Entsprechende Software auf dem WLAN-Gerät erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ermöglicht eine direkte Integration von Messgeräten in die meisten Firmennetzwerke, mit automatischer Konfiguration über DHCP oder statischer IP-Vergabe. Der Zugriff auf die aktuellen Messdaten ist vom gesamten Netzwerk aus jederzeit möglich
- Der Konverter unterstützt vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten über das Web-Interface
- Kompatibel mit **KERN Software BalanceConnection**

Lieferumfang: RS-232/WLAN-Konverter, Netzadapter (EU)

STANDARD

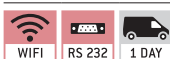

Tipp:

Bei gleichzeitiger Bestellung einer KERN Waage ist das Schnittstellenkabel **gratis** (bitte Waagenmodell angeben).



Hinweis: Für den Anschluss an Ihr Netzwerk benötigen Sie unbedingt Informationen von Ihrem Netzwerkadministrator, mit dem Sie die Einbindung Ihres Gerätes vor der Bestellung besprechen sollten.