KERN & Sohn GmbH
Brickyard 1
D-72336 Balingen
Correo electrónico:
info@kern-sohn.com
Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Instrucciones de instalación Trípode

KERN IFB-A01 / A02

Versión 2.0
2026-05
es





IFB-A01-A02-IA-s-2620

es

Trípode

Versión 2.0 2026-05

Instrucciones de instalación

Índice

1 Datos técnicos 3

1.1 Dimensiones 4

2 Volumen de suministro 6


3 Instalación 7


1 Datos técnicos


KERN	IFB-A01	IFB-A02
Altura del trípode (mm)	330	600
Para tamaños de plata-forma (mm)	300 x 240 400 x 300 500 x 400 650 x 500	400 x 300 500 x 400 650 x 500

1.1 Dimensiones


Modelos con 330 mm:

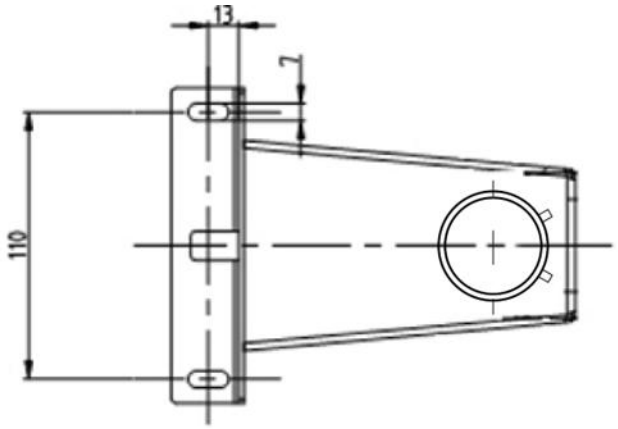


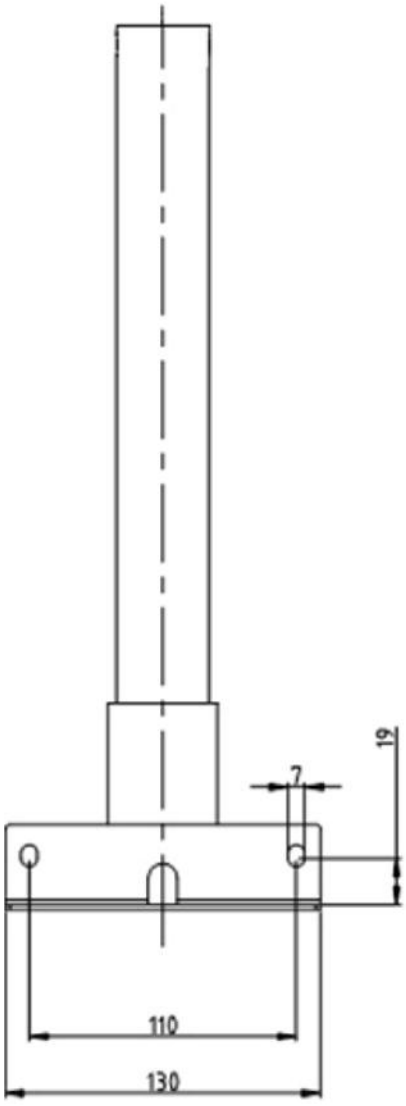


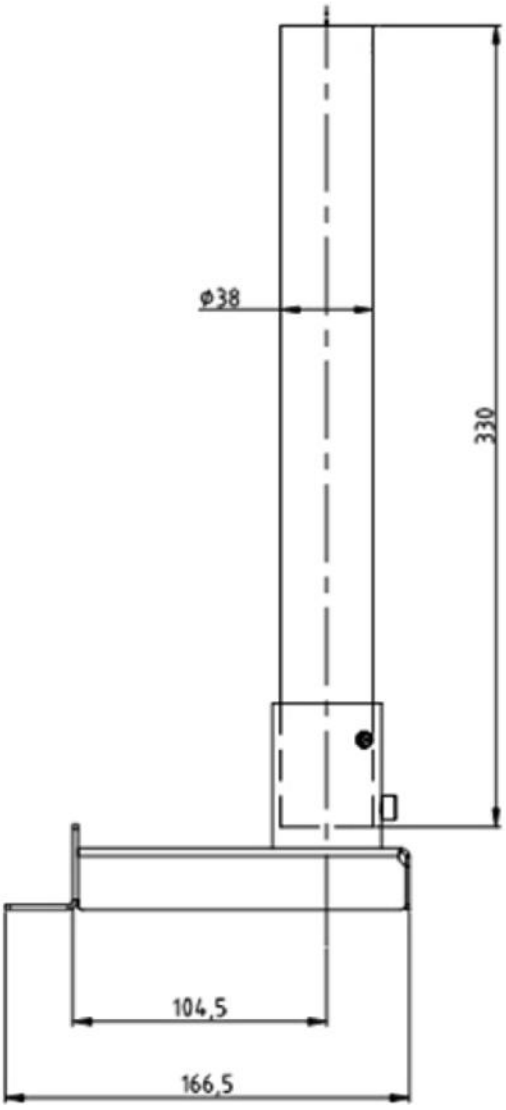











Modelos con 600 mm:

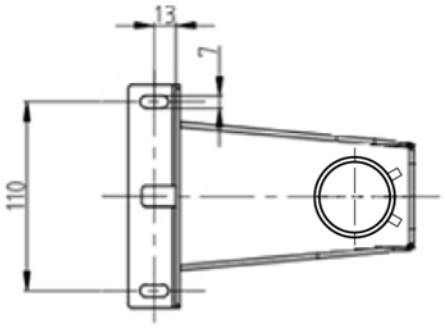

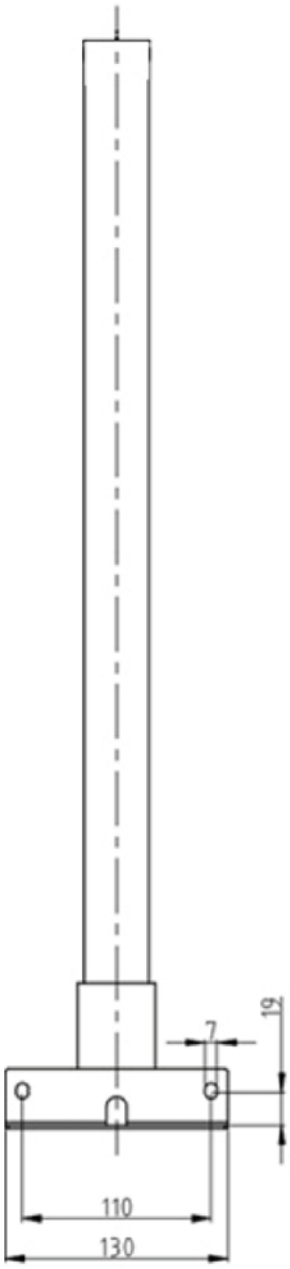

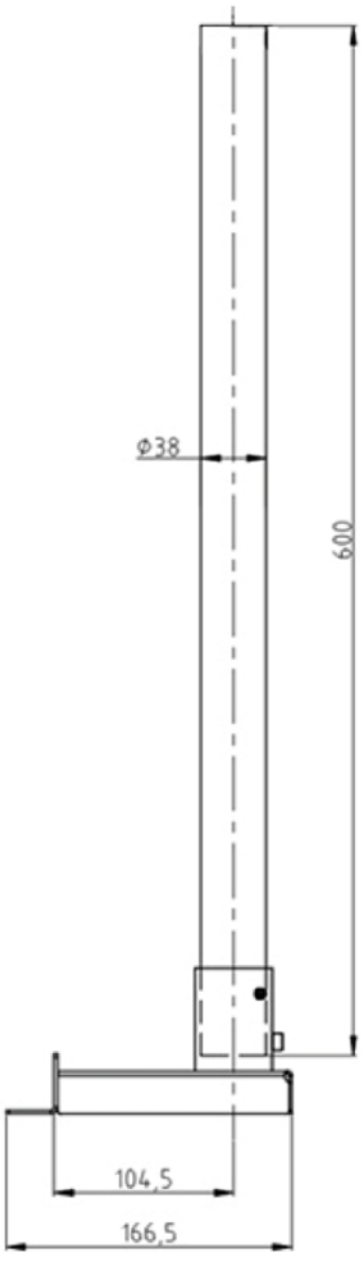

2 Volumen de suministro

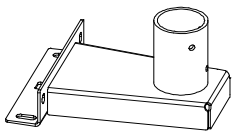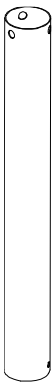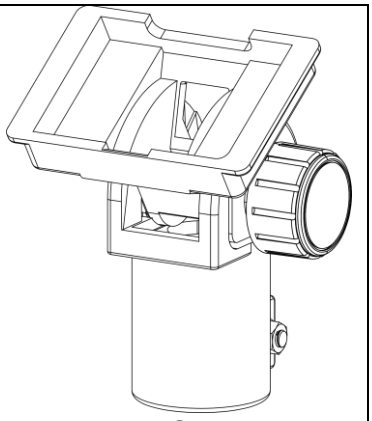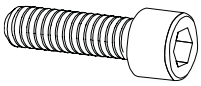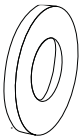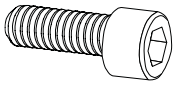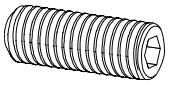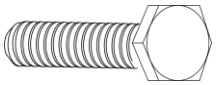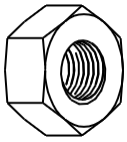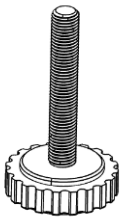 **A** Base para trípode 1 x	 **B** Tubo trípode 1 x	 **C** Soporte para expositor 1 x
 **S1** M6 x 16 4 x	 **S2** Arandela elástica 4 x	 **S3** Lavadora 5 x
 **S4** M6 x 12 1 x	 **S5** M6 x 10 2 x	 **S6** M8 x 20 1 x
 **S7** Tuerca M8 1 x	 **S8** Pie de apoyo 1 x	 **S9** Tuerca M6 1 x


C, **S3** (1x), **S6** y **S7** se suministran premontados.

3 Instalación

Fije la base del trípode a la plataforma:

1. Coloque la base del soporte **(A)** en el centro por encima de los orificios del lateral de la plataforma.
2. Coloque primero la arandela elástica **(S2**) y después la arandela **(S3**) en el tornillo **(S1**) (4 x).
3. Apriete la base del trípode.

   Asegúrese de no pellizcar ni dañar ningún cable.

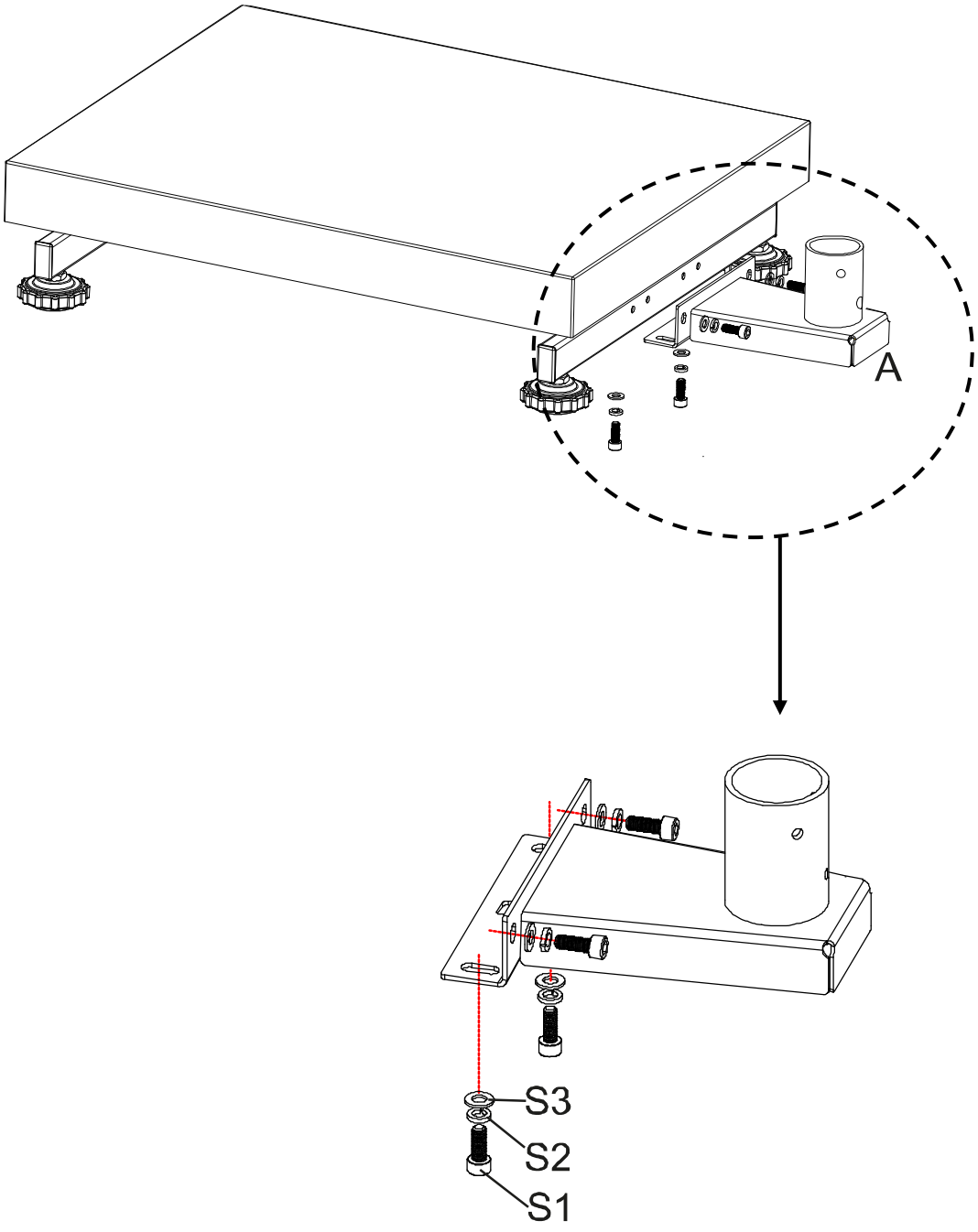


Fije el tubo del trípode a la base del trípode:

4. Desatornille los tornillos **S4** y **S5** del tubo del soporte.

5. Inserte **el tubo del trípode (B)** en la base del trípode. Asegúrese de que el orificio del tubo del soporte coincide con el orificio **S4**.


6. Vuelva a atornillar los tornillos **S5** y fije el tubo vertical con el tornillo **S4**.

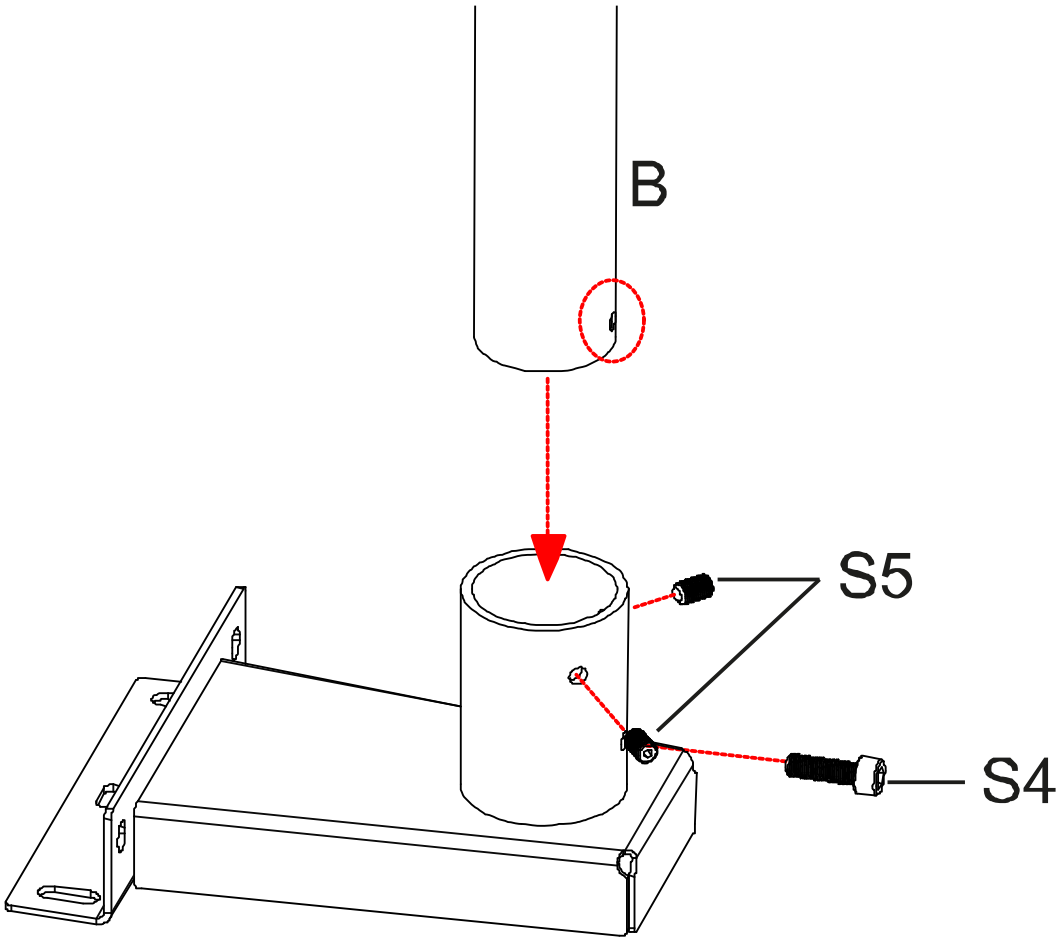

7. Enroscar la tuerca **S9** en el pie de apoyo **S8**.


8. Enroscar el pie de apoyo con la tuerca desde abajo en el tubo del trípode.

9. Desenroscar el pie de apoyo hasta que toque el suelo y fijarlo con la tuerca **S9**.

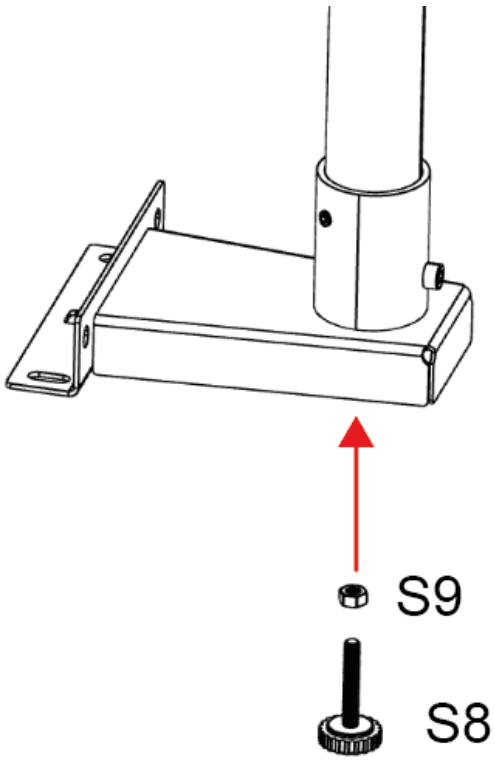

Fije la unidad de visualización al tubo del soporte:

10. Introduzca el soporte para la unidad de pantalla **(C)** en el tubo del soporte y fíjelo con los tornillos **S6.**

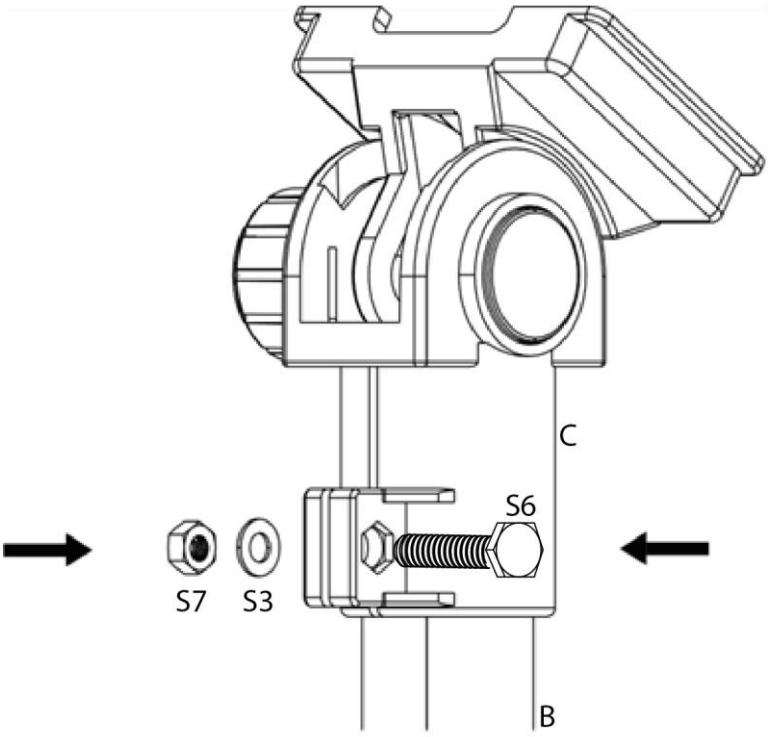

⇨ Introduzca el soporte **(C)** para la unidad de pantalla en el extremo superior del tubo del soporte **(B)** y fíjelo con el tornillo **(S6).**

Contrarrestar en el lado opuesto con la arandela **(S3)** y la tuerca **(S7).**