

# KERN SCD-4.0-PRO-UPG

Date: 29.01.2025



Logiciel Balance Connection: Lien de téléchargement pour la mise à niveau de SCD-40 vers SCD 40-PRO

### CONTACT

Adresse

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany




Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0  
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149



Internet

Courriel : info@kern-sohn.com  
Web : www.kern-sohn.com

## VITRINE DES PRODUITS

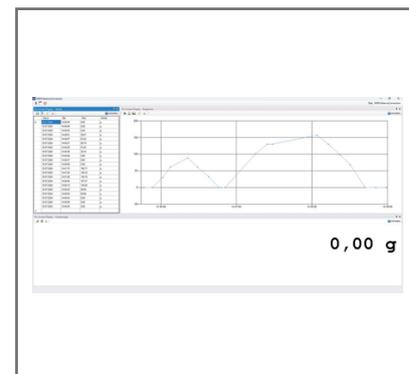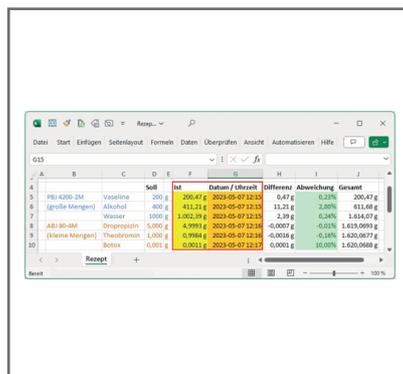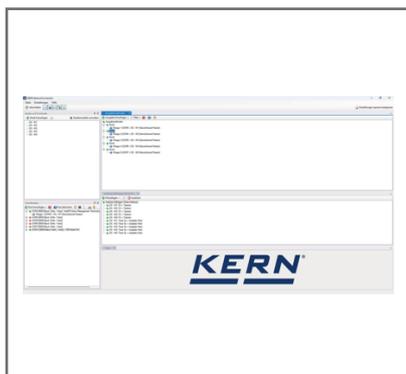

FRANCAIS

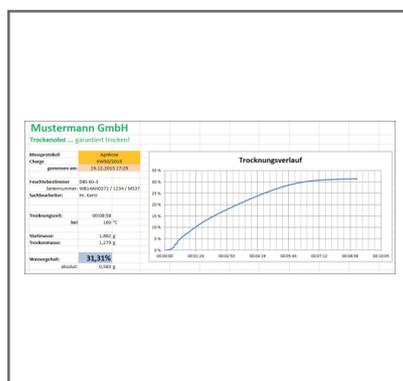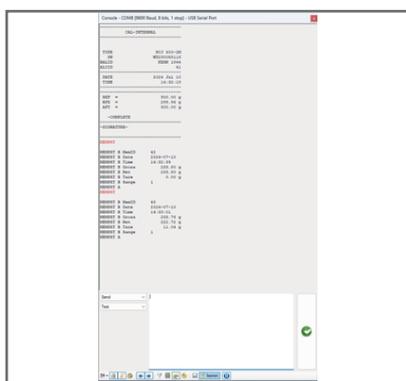

## DESCRIPTION

- Lien de téléchargement pour la mise à niveau de SCD-40 vers SCD 40-PRO: Condition préalable : le logiciel BalanceConnection SCD-40
- Pour système d'exploitation Windows 10 11
- NET Framework 481 requis
- Des droits d'administration complets sont nécessaires pour l'installation
- Prend en charge les balances et appareils de mesure avec USB, RS-232 RS-485 Bluetooth, réseau LAN ou WiFi#160;(TCP/UDP/IP)
- Formatage et configuration ultra-flexibles de la sortie (ordre et positionnement, formatage et arrondi au choix), y compris sur demande enregistrement de la date et de l'heure pour chaque valeur transmise
- Raccordement d'un nombre illimité d'appareils/d'interfaces, y compris avec enregistrement simultané et synchronisé de plusieurs balances
- Interrogation à la demande (par touche) ou programmée des valeurs mesurées ou déclenchement de fonctionnalités, y compris pour l'enregistrement continu

- Les protocoles d'interface des balances KERN (configuration standard) sont déjà prédéfinis Prise en charge possible d'autres balances grâce à la configuration flexible
- Câble d'interface adéquat inclus pour la commande simultanée d'une balance KERN
- Nombreuses possibilités de transmission et d'enregistrement :- MicrosoftR Excel/Access/Word à l'avant ou à l'arrière-plan- Autres applications Windows (simulation d'appui sur touches), par exemple logiciel d'expédition ou ERP (SAP, Sage,...)- Enregistrement de fichier (fichier texte ou CSV, par exemple)- Impression sur papier ou étiquette
- Caractéristiques supplémentaires de la version BalanceConnection PRO ::- Bases de données ODBC/SQL telles que SQL Server ou MySQL- Transmission à des services web HTTP/formulaires web- Histogramme- Relie les balances médicales aux systèmes informatiques du cabinet à l'aide du protocole de transfert de données des appareils (GDT) et du protocole HL7- Exécution de programmes/scripts via des lignes de commande librement configurables- Séquences de commandes- Définition de conditions pour certains événements, et réaction à ces derniers- Filtres pour détection de stabilité (les valeurs à valider peuvent être configurées)- Sauvegarde centralisée de la configuration, sur réseau par exemple- Affichages à l'écran avec interface utilisateur configurable pour une utilisation flexible de la balance
- Avantages- Le logiciel idéal lorsqu'il s'agit de transférer les données de pesée à un ordinateur sous Windows- Convient particulièrement à l'intégration professionnelle de systèmes de pesage dans des réseaux existants, répond aux exigences strictes en matière de transmission et de traitement automatisés des données et d'intégration de bases de données- Enregistrement automatique, pex en cas d'essais permanents- Logiciel de laboratoire conforme BPL- Possibilité d'utiliser autant de balances que nécessaire par licence pour un PC/poste de travail- Possibilité d'utilisation dans tous les secteurs et toutes les applications
- Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 1 licence

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	SCD-40-PRO-UPG
Model-Serie	SCD-40-PRO-UPG
Assortiment	KERN
Type de produit	Logiciel
Groupe de produits	BalanceConnection
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/ser vice
Code EAN (Modèle)	4045761239968

Date de début prévue 2020-1HJ

Numéro de tarif douanier 85234910

### Données techniques - Emballage et expédition

Délai de livraison 1 d

### FONCTIONS

Standard

