

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN SCD-4.0-DL

Fecha: 18.03.2025

ESPAÑOL



Registro flexible o transmisión de valores datos, especialmente a Excel o Access de Microsoft®.

CONTACT

KERN & SOHN GmbH

Ziegelei 1

72336 Balingen





Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-mail : info@kern-sohn.comWeb : www.kern-sohn.com

ESCAPARATE DE PRODUCTOS

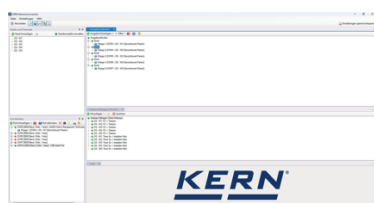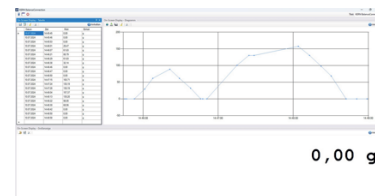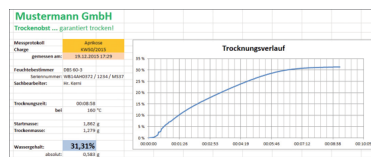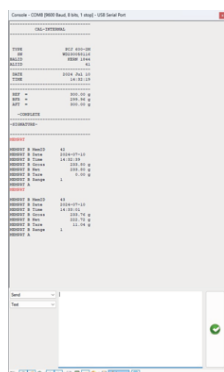

Rezept									
Datum	Start	Einheiten	Seitenlayout	Formeln	Daten	Überprüfen	Anzeige	Automatisieren	Hilfe
G15									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4									
5	PSI 4200-204	Vaseline	200 g	2023-05-07 12:15	0,47 g	0,23%	200,47 g		
6	(große Mengen)	Alkohol	400 g	2023-05-07 12:15	11,21 g	2,80%	411,21 g		
7		Wasser	1000 g	2023-05-07 12:15	3,39 g	0,34%	1.003,39 g		
8	ABi 80-484	Drogensubst	5,000 g	2023-05-07 12:15	-0,0007 g	-0,01%	4,9993 g		
9	(kleine Mengen)	Therakem	1,000 g	2023-05-07 12:15	-0,0016 g	-0,16%	0,9984 g		
10		Boxen	0,001 g	2023-05-07 12:15	0,0001 g	10,00%	0,0011 g		

DESCRIPCIÓN

- Para los sistemas operativos Windows 10 (20H2) y posteriores, 11
- Se requiere .NET Framework 4.8.1
- Se requieren derechos de administración completos para la instalación
- Compatible con balanzas e instrumentos de medición con USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, red LAN o WiFi (TCP/UDP/IP)
- Gran flexibilidad de formatos y diseño de salida (en cualquier orden, posicionamiento, formato y redondeo), sobre todo y opcionalmente, se puede registrar la fecha y la hora para cada valor transmitido.
- Se puede conectar cualquier número de dispositivos/interfaces, así como registrar varias balanzas de forma simultánea y sincronizada.
- Consultas por teclado y programadas por tiempo de valores medidos o activación de funciones del dispositivo, también para registros permanentes.
- Los protocolos de interfaces de las balanzas KERN vienen predefinidos (configuración estándar). Compatibilidad con otras balanzas gracias a una configuración flexible.
- El cable de interfaz correspondiente se incluye al pedir la balanza

- Muchas y diversas posibilidades de registro y transmisión:
 - Microsoft Excel / Access / Word en primer o segundo plano
 - Otras aplicaciones de Windows (con teclado de software), como p. ej. programas de expedición o sistemas ERP (SAP, Sage, ...)
 - Registro de archivo (p. ej. como texto o archivo CSV)
 - Transferencia a servicios Web HTTP/formularios de la red
- Salida de pantalla como indicación de gran tamaño, diagrama de evolución (curva de secado, determinador de humedad),...
- Beneficios:
 - Se evitan errores tipográficos como, p. ej., los producidos por la transferencia manual
 - Registro automático, p. ej. en ensayos de larga duración
 - Software de laboratorio que cumple con los requisitos de GLP
 - Se puede utilizar en cualquier aplicación y sector económico
- Alcance de suministro: Enlace de descarga para 1 licencia

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	SCD-4.0-DL
Serie de modelos	SCD
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software
Grupo de productos	BalanceConnection
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761212206
Modelo predecesor	SCD-4.0; SCD-4.0S05
Número del arancel aduanero	85234910

FUNCIONES

Standard



Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----