


# Software EasyTouch SET-40 Protect

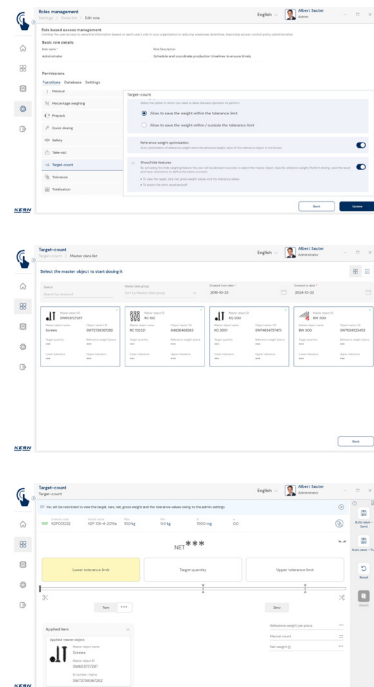

## EasyTouch Protect – Protéger fidèlement et efficacement les données sensibles de l’entreprise

### Caractéristiques

- Remarque : le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set
- SET-40 Protect est compatible avec les kits suivants : SET-01 Base, SET-16 Batch and statistics, SET-21 Formulation, SET-32 Count, SET-33 Target count, SET-35 Assembly count et SET-31 Tolerance
- Protection des recettes sensibles : cette fonction permet de masquer toutes les données de recettes critiques afin d’éviter tout accès intempestif à celles-ci
- Protection des données de pesée sensibles : lors du dosage ou de la pesée, les valeurs de pesée cibles sont neutralisées par « \*\*\* », pour que seul le résultat représenté graphiquement sur la base de la valeur cible et des valeurs de tolérance basses et hautes soit visible
- Protection des noms d’objets sensibles : le nom d’une substance ou d’un objet est masqué pour certains groupes d’utilisateurs, de sorte que dans le cas le plus restrictif, seul l’ID de la substance est visible, sans valeur de pesée cible
- Options souples de protection des données : selon le rôle utilisateur, il est possible de choisir si seules les valeurs de pesée cibles doivent être affichées ou si, par exemple, les désignations des différents composants de la recette doivent également être affichées

- Saisie de la quantité cible totale : sur l’écran d’accueil, les utilisateurs saisissent la quantité cible totale sans voir les quantités cibles individuelles ni le poids des composants
- Résultats masqués : dans l’écran des résultats, les poids cibles et les poids réellement pesés ne sont affichés que masqués par « \*\*\* »
- Affichage limité des quantités dans la mémoire : dans Dynamic Memory, certains groupes d’utilisateurs ne voient pas les quantités
- Affichage transparent pour les admins : l’affichage en texte clair des quantités ou des poids cibles ainsi que des poids effectivement pesés est possible à tout moment pour les groupes d’utilisateurs autorisés comme les administrateurs

### Options

- Fonction de mémoire de données centrale Save Server (SET-10) pour l’enregistrement supplémentaire de toutes les données de mesure dans un répertoire serveur central local. Les données de mesure de tous les systèmes de pesée EasyTouch raccordés et de toutes les applis EasyTouch installées y sont stockées. Ceci permet notamment aux utilisateurs disposant de plusieurs systèmes de pesée de réunir toutes les données de pesée dans une même base de données et de rechercher les données individuelles de différentes balances dans un même tableau. L’enregistrement des données Save Server est également protégé contre les modifications et les falsifications

- Save-Cloud : A la même fonction de mémoire de données centrale de tous les systèmes ET raccordés que Save-Data Server. La différence est que dans Save-Data Cloud, l’emplacement d’enregistrement est un serveur KERN accessible par Internet plutôt qu’un serveur sur un réseau local. L’avantage de Save-Data Cloud est que l’installation est totalement automatique et n’exige pas d’administrateur réseau, KERN SET-101
- EasyTouch Quick Key (SET-311) : Cette fonction permet de réserver certains objets de données de base à certains rôles d’utilisateur. Les objets sélectionnés sont présentés à ces utilisateurs comme des touches d’accès rapide à l’écran

### Informations sur la licence

- Portée de la licence : Une licence peut être utilisée sur un maximum de quatre terminaux (PC, ordinateur portable, tablette) simultanément et indépendamment
- Utilisateur : une licence permet de créer un nombre illimité d’utilisateurs
- Balances : Il est possible de créer et d’utiliser un nombre illimité de balances dans une licence
- Communication balance - terminal : les balances peuvent communiquer par raccordement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou WiFi avec le PC, l’ordinateur portable ou la tablette

DE SÉRIE



OPTION

