

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN SCD-4.0-PRO-DL

Datum: 18.03.2025

DEUTSCH



Flexible Aufzeichnung oder Übertragung von Messwerten, insbesondere auch nach Microsoft® Excel oder Access

CONTACT

KERN & SOHN GmbH

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany




Telefon : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-Mail : info@kern-sohn.comWeb : www.kern-sohn.com

PRODUKT-SCHAUFENSTER

Item	Description	Unit	Date	Time	Difference	Total
1	PGI 4000-2M	g	2023-05-07 12:15	12:15	0,00 g	200,47 g
2	(große Mengen)	g	2023-05-07 12:15	12:15	0,00 g	613,69 g
3	Alkohol	g	2023-05-07 12:15	12:15	0,00 g	1,620,00 g
4	Wasser	g	2023-05-07 12:15	12:15	0,00 g	1,620,00 g
5	ABU 80-4M	g	2023-05-07 12:15	12:15	0,00 g	1,620,00 g
6	Thermodrom	g	2023-05-07 12:15	12:15	0,00 g	1,620,00 g
7	(kleine Mengen)	g	2023-05-07 12:15	12:15	0,00 g	1,620,00 g
8	Reine	g	2023-05-07 12:15	12:15	0,00 g	1,620,00 g

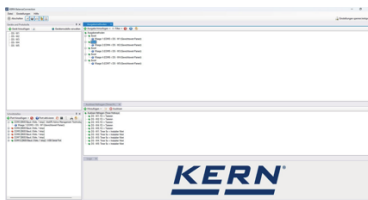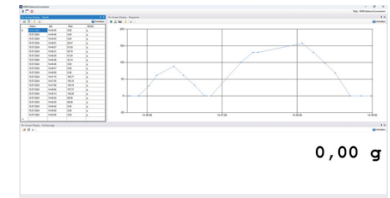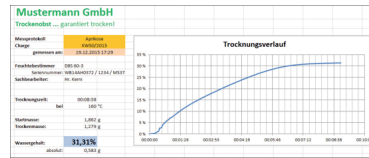

Item	Description	Unit	Date	Time	Difference	Total
1	PGI 4000-2M	g	2023-05-07 12:15	12:15	0,00 g	200,47 g
2	(große Mengen)	g	2023-05-07 12:15	12:15	0,00 g	613,69 g
3	Alkohol	g	2023-05-07 12:15	12:15	0,00 g	1,620,00 g
4	Wasser	g	2023-05-07 12:15	12:15	0,00 g	1,620,00 g
5	ABU 80-4M	g	2023-05-07 12:15	12:15	0,00 g	1,620,00 g
6	Thermodrom	g	2023-05-07 12:15	12:15	0,00 g	1,620,00 g
7	(kleine Mengen)	g	2023-05-07 12:15	12:15	0,00 g	1,620,00 g
8	Reine	g	2023-05-07 12:15	12:15	0,00 g	1,620,00 g

BESCHREIBUNG

- Für Betriebssysteme Windows 10 (20H2) und neuer, 11
- .NET Framework 4.8.1 benötigt
- Für die Installation werden vollständige Administrationsrechte benötigt
- Unterstützt Waagen und Messgeräte mit USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, LAN- oder WLAN-Netzwerk (TCP/UDP/IP)
- Hochflexible Formatierung und Gestaltung der Ausgabe (beliebige Reihenfolge und Positionierung, Formatierung und Rundung), insbesondere auf Wunsch auch Aufzeichnung von Datum und Uhrzeit zu jedem übertragenen Wert
- Beliebige Anzahl von Geräten/Schnittstellen anschließbar, auch gleichzeitige und synchronisierte Aufzeichnung mehrerer Waagen
- Tasten- oder zeitgesteuerte Abfrage von Messwerten oder Auslösen von Gerätefunktionen, auch für Daueraufzeichnungen
- Schnittstellen-Protokolle der KERN-Waagen (Standardkonfiguration) sind bereits vordefiniert. Unterstützung anderer Waagen durch flexible Konfiguration möglich

- Passendes Schnittstellenkabel bei Bestellung mit Waage inklusive
- Viele verschiedene Übertragungs- und Aufzeichnungsmöglichkeiten:
 - Microsoft Excel/Access/Word im Vorder- oder Hintergrund
 - Andere Windows-Anwendung (durch Tastensimulation), z. B. Versandsoftware oder ERP-System (SAP, Sage,...)
 - Datei-Aufzeichnung (z. B. als Text oder CSV Datei)
 - Freier Ausdruck auf Text-, Etiketten- oder auch Büro-Druckern
- Zusätzliche Merkmale der BalanceConnection PRO Version:
 - ODBC/SQL Datenbanken wie SQL Server oder MySQL
 - Übergabe an HTTP Webservices/Web-Forms
 - Histogramm
 - Ermöglicht die Anbindung von medizinischen Waagen an Praxis-EDV-Systeme über das Gerätedatentransfer Protokoll (GDT) sowie das HL7 Protokoll
 - Ausführung von Programmen/Skripts über frei definierbare Kommandozeilen
 - Befehlssequenzen
 - Festlegen von Bedingungen (conditions) für bestimmte Ereignisse und die Reaktion darauf
 - Filter zur Stabilitätserkennung (konfigurierbare Wertübernahme)
 - Zentrale Konfigurationshaltung, z. B. im Netzwerk
 - On-Screen-Displays mit konfigurierbarer Benutzerschnittstelle für flexible Waagenbedienung
- Vorteile
 - Ideale Software, wenn erhobene Wägedaten an einen Windows PC übergeben werden sollen
 - Besonders geeignet für die professionelle Integration von Wägesystemen in bestehende Netzwerke, bei einer hohen Anforderung an eine automatisierte Datenübernahme und Weiterverarbeitung, für die Einbindung von Datenbanken
 - Automatische Aufzeichnung, z. B. bei Dauerversuchen
 - GLP-konforme Laborsoftware
 - Pro Lizenz beliebig viele Waagen an einem PC / Arbeitsplatz verwendbar
 - Branchen- und Anwendungsübergreifend einsetzbar
- Lieferumfang: Downloadlink für 1 Lizenz

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	SCD-4.0-PRO-DL
Modell-Reihe	SCD
Sortiment	KERN

Produkt Segment	Software
Produktgruppe	BalanceConnection
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761222489

Vorgängermodell SCD-4.0; SCD-4.0-PRO;
SCD-4.0-PROS05; SCD-
4.0S05

Zolltarifnummer 85234910

Technische Daten - Verpackung & Versand

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard

