

BROCHURE DEL PRODOTTO

**KERN
SET-311**

Data: 18.03.2025

ITALIANO

Software EasyTouch

SET-311

Quick Key





EasyTouch Quick Key – Selezionare i dati base degli oggetti in modo rapido e in base all'utente

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VETRINA DEI PRODOTTI

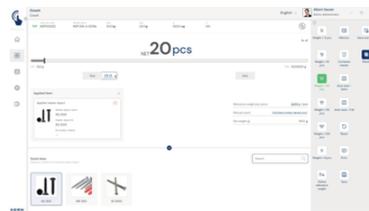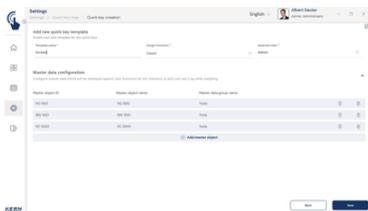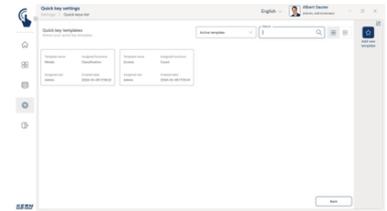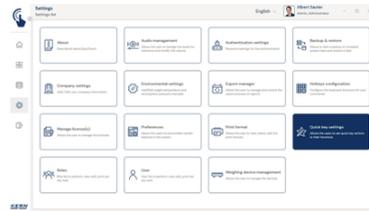

ITALIANO

DESCRIZIONE

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Quick Keys possono essere creati in numerosi set, per es.
 - SET-01 Base
 - SET-05 Dynamic
 - SET-06 Classification
 - SET-07 Variable
 - SET-08 Take Out
 - SET-31 Tolerance
 - SET-32 Count
 - SET-33 Target Count
- Tasti di selezione rapida dati base: con ET Quick Key è possibile integrare in modo permanente determinati dati base degli oggetti per la selezione rapida. I Quick Keys sono visualizzati direttamente sullo schermo
- Memorizzare: A prescindere dalla selezione convenzionale o tramite Quick Key, ogni risultato di pesata o conteggio di pezzi viene memorizzato con il riferimento ai dati base dell'oggetto selezionato
- Selezione dei dati base dell'oggetto: I determinati dati base dell'oggetto che vengono visualizzati come Quick Key possono essere selezionati singolarmente oppure come gruppo definito di dati base che contiene i dati base sotto forma di Quick Keys

- In riferimento all'utente: i Quick Keys possono essere creati come schema in riferimento a determinati ruoli utente. Ciò significa che agli utenti di un certo ruolo vengono mostrati determinati oggetti di dati master per la selezione rapida. Ciò consente, ad esempio, a diversi reparti della stessa azienda di lavorare con dati anagrafici diversi senza sovrapposizioni
- Salvare e stampare: A seconda dello schema è possibile impostare se oltre al processo di salvataggio si debba o meno effettuare in automatico anche la stampa
- Comunicazione bilance-terminale: La(le) bilancia(e) possono comunicare con PC, laptop o tablet mediante collegamento seriale, USB, Bluetooth, Ethernet o WiFi

Informazioni sulla licenza

- Utenti: Con una licenza è possibile creare un numero illimitato di utenti
- Bilance: Con una licenza è possibile creare e gestire un numero illimitato di bilance
- Comunicazione bilance-terminale: La(le) bilancia(e) possono comunicare con PC, laptop o tablet mediante collegamento seriale, USB, Bluetooth, Ethernet o WiFi

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SET-311
Modello-Serie	ETS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1486546
Numero di tariffa doganale	85234910



Option



Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard
