

Software EasyTouch

SET-46

**Backup
Scheduler**

EasyTouch Backup Scheduler - Sauvegarde et restauration des données

CONTACT

KERN & SOHN GmbH

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany






Téléphone : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-Mail : info@kern-sohn.com

Web : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS

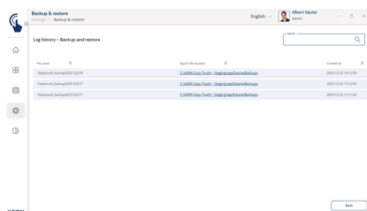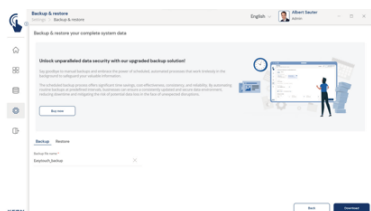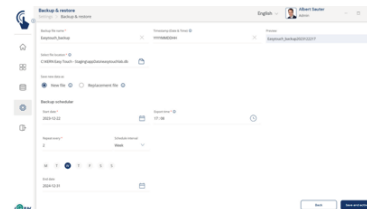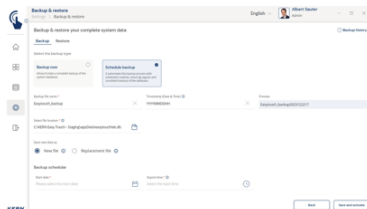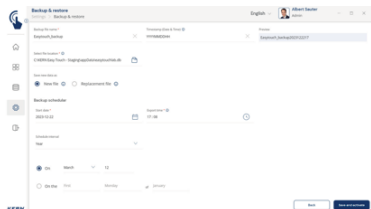

FRANCAIS

DESCRIPTION

- Remarque : le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set
- Planificateur de sauvegarde : automatisez vos sauvegardes et profitez des processus planifiés qui fonctionnent en continu et qui protègent vos précieuses informations en arrière-plan
- Sauvegardes automatiques des données : économisez du temps et de l'argent grâce aux sauvegardes automatiques à intervalles définis. Elles permettent d'assurer la cohérence et la fiabilité des données, de réduire les temps d'arrêt et de minimiser le risque de perte de données en cas d'incident
- Configuration du fichier de sauvegarde : les utilisateurs peuvent personnaliser le nom du fichier de sauvegarde, y compris le nom racine et l'horodatage en suffixe. Le répertoire de sauvegarde et le type de sauvegarde - création d'un nouveau fichier, écrasement d'un fichier existant ou extension de ce dernier - peuvent également être personnalisés
- Intervalle de sauvegarde : l'intervalle des sauvegardes peut être défini en heures, plusieurs fois ou une fois par jour, par semaine, par mois et par an
- Messages de sauvegarde : chaque sauvegarde automatique des données est affichée dans le répertoire de sauvegarde avec le nom du fichier sous forme de lien vers le fichier de sauvegarde
- Historique des sauvegardes : le déroulement et le statut de toutes les sauvegardes sont consignés et peuvent

être consultés à tout moment

- Restauration : en cas de panne, la dernière sauvegarde peut être facilement restaurée grâce à la fonction « Restore »

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	SET-46
Model-Serie	ETS
Assortiment	KERN
Type de produit	Logiciel
Groupe de produits	EasyTouch
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 1486348
Numéro de tarif douanier	85234910

Données techniques - Emballage et expédition

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

FONCTIONS

Standard



Option

