

BROCHURE DEL PRODOTTO

**KERN
SET-411**

Data: 18.03.2025

ITALIANO

Software EasyTouch

SET-411

Hotkeys






EasyTouch Hotkeys - Tasti di scelta rapida e interruttori esterni

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VETRINA DEI PRODOTTI

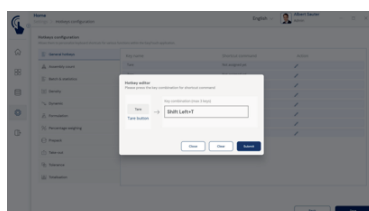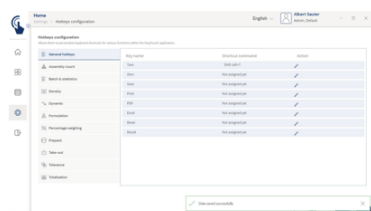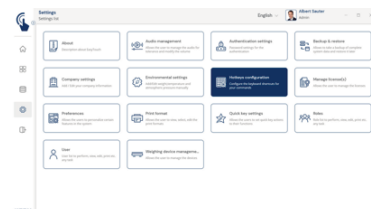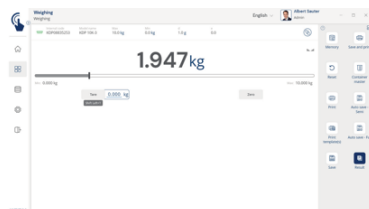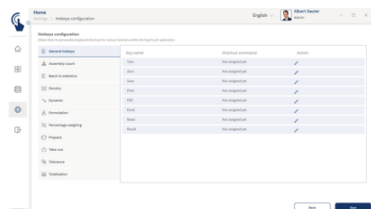

DESCRIZIONE

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Tasti di scelta rapida: I tasti di scelta rapida consentono di assegnare combinazioni di tasti a tutti i pulsanti di EasyTouch. Questo semplifica notevolmente l'accesso alle funzioni più utilizzate, in quanto non è più necessario navigare faticosamente con il mouse. Le azioni desiderate possono essere invece attivate rapidamente e direttamente tramite la tastiera
- Articolo opzionale: Hotkeys è un'estensione opzionale di EasyTouch che supporta tutte le funzioni attive e installate. Si ricorda che il prezzo della funzione aggiuntiva non include alcun hardware come interruttori, pulsanti o pedali
- Configurazione dei tasti di scelta rapida: Le combinazioni di tasti possono essere definite dall'amministratore del sistema o da una persona autorizzata. Per ogni funzione desiderata è possibile definire una combinazione di tasti unica e specifica per l'utente
- Selezione versatile dei tasti di scelta rapida: In EasyTouch è possibile definire come tasti di scelta rapida non solo tasti azione specifici per determinate funzioni, ma anche comandi generali come "Salva" o "Tara". Questi possono essere utilizzati in tutte le funzioni di EasyTouch
- Attivazione tramite combinazione di tasti: Ad esempio, la funzione TARE può essere attivata in modo rapido e

semplice con una combinazione di tasti

- Integrazione di interruttori o pulsanti esterni: EasyTouch supporta l'assegnazione di combinazioni di tasti a segnali provenienti da dispositivi HID (Human Interface Devices) esterni tramite USB. Ciò consente di azionare il software tramite interruttori esterni, quali pulsanti di arresto di emergenza o interruttori a pedale, consentendo un funzionamento a mani libere e una maggiore efficienza. La procedura: Il segnale esterno viene assegnato a una combinazione di tasti nel software di controllo dei tradizionali dispositivi USB. Il segnale viene ricevuto dal PC. Il segnale attiva la funzione EasyTouch assegnata

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SET-411
Modello-Serie	ETS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1249738
Numero di tariffa doganale	85234910

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard
   
Option
 