
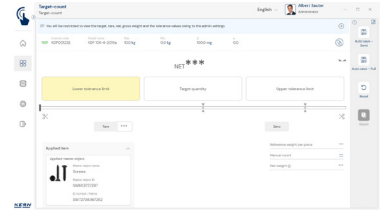
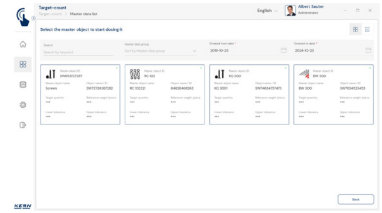


# Software EasyTouch

# SET-40

# Protect

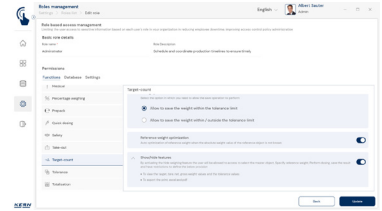

## EasyTouch Protect – Sensible Unternehmensdaten sicher und effizient schützen

### Merkmale

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- SET-40 Protect ist kompatibel mit folgenden Sets: SET-01 Base, SET-16 Batch and statistics, SET-21 Formulation, SET-32 Count, SET-33 Target count, SET-35 Assembly count und SET-31 Tolerance
- Schutz sensibler Rezepturen: Mit dieser Funktion können sämtliche kritische Rezepturdaten ausgeblendet werden, um ungewollten Zugriff darauf zu verhindern
- Schutz sensibler Wiegedaten: Beim Dosieren bzw. Wiegen werden Ziel-Wiegewerte durch „\*\*\*“ neutralisiert dargestellt, sodass nur das grafisch dargestellte Ergebnis auf Basis des Zielwerts und der unteren und oberen Toleranzwerte sichtbar ist
- Schutz sensibler Objektamen: Der Name einer Substanz oder eines Objektes wird für bestimmte Nutzergruppen verschleiert, sodass im Minimalfall lediglich die ID-Nummer der Substanz ohne Ziel-Wiegewerte sichtbar ist
- Flexible Datenschutzoptionen: Je nach Nutzer-Rolle kann ausgewählt werden, ob nur die Ziel-Wiegewerte, oder auch die Bezeichnungen z. B. einzelner Rezepturkomponenten angezeigt werden sollen
- Eingabe der Gesamt-Zielmenge: Im Startbildschirm geben Nutzer die Gesamt-Zielmenge ein, ohne Einzel-Zielmengen oder Gewichte der Komponenten zu sehen

- Verschleierte Ergebnisse: Im Ergebnisbildschirm werden Zielgewichte und tatsächlich gewogene Gewichte ebenfalls nur verschleiert als „\*\*\*“ dargestellt
- Eingeschränkte Mengenanzeige im Speicher: Im Dynamic Memory werden bestimmten Nutzergruppen keine Mengenangaben angezeigt
- Transparente Anzeige für Admins: Klartextanzeige der Ziel-Mengen oder -Gewichte sowie der tatsächlich gewogenen Gewichte ist für freigegebene Nutzergruppen wie Admins jederzeit möglich

### Optionen

- Zentrale Datenspeicherfunktion Save Server (SET-10) zur zusätzlichen Speicherung aller Messdaten in einem zentralen, lokalen Serververzeichnis. Hier werden die Messdaten aller über EasyTouch angeschlossenen Wiegesysteme sowie aus allen installierten EasyTouch-Funktionen gespeichert. Speziell für Benutzer mit mehreren Wiegesystemen besteht hierdurch der Vorteil, alle Wiegedaten in nur einer Datenbank konsolidiert zu haben und einzelne Messdaten von verschiedenen Waagen in nur einer Tabelle suchen zu müssen. Die Save Server-Datenspeicherung ist ebenfalls manipulationssicher und unveränderlich

- Save-Cloud: Hat dieselbe zentrale Datenspeicherfunktion für alle an KERN EasyTouch angeschlossenen Wiegesysteme wie Save-Server. Der Unterschied besteht darin, dass in Save-Data Cloud der Speicherort ein KERN-Server ist, der über das Internet erreicht wird, anstatt ein Server im lokalen Netzwerk. Das Einrichten der Save-Data Cloud Funktionalitäten erfolgt vollautomatisch und benötigt keinen Netzwerk-Administrator auf Benutzersseite, KERN SET-101
- EasyTouch Quick Key (SET-311): Diese Funktion erlaubt es, bestimmte Stammdaten-Objekte für bestimmte Nutzerrollen zu reservieren. Die ausgewählten Objekte werden diesen Nutzern als Schnellzugriffstasten am Bildschirm angezeit

### Lizenzinformationen

- Lizenzumfang: Eine Lizenz kann auf bis zu vier Endgeräten (PC, Laptop, Tablet) gleichzeitig und unabhängig betrieben werden
- User: In einer Lizenz können unbeschränkt viele Nutzer angelegt werden
- Waagen: Es können beliebig viele Waagen in einer Lizenz angelegt und betrieben werden
- Kommunikation Waagen-Endgerät: Die Waage(n) können per seriellem Anschluss, USB, Bluetooth, Ethernet oder per WLAN mit dem PC, Laptop oder Tablet kommunizieren

STANDARD



OPTION

