



RS-232/Convertisseur Ethernet KERN YKI-10 • YKI-11

Caractéristiques techniques


- Convertisseur pour connecter des balances, des instruments de mesure de force, etc. à un réseau Ethernet basé sur IP au moyen d'un port RS-232
- Permet une intégration directe des appareils de mesure à la plupart des réseaux d'entreprise, avec une configuration automatique via DHCP ou une attribution d'IP statique. L'accès aux données de mesure actuelles est possible à tout moment depuis l'ensemble du réseau
- Le convertisseur offre de nombreuses possibilités de configuration via l'interface web
- Compatible avec le logiciel **KERN Balance Connection**
- Adapté pour montage mural ou indépendant

Contenu de la livraison :

KERN YKI-10: RS-232/Convertisseur Ethernet avec 1x port RS-232, bloc d'alimentation (EU)

KERN YKI-11: RS-232/Convertisseur Ethernet avec 2x ports RS-232, bloc d'alimentation (EU). Les deux ports RS-232 permettent de connecter et de gérer deux balances ou appareils de mesure. Ils le font en parallèle.

DE SÉRIE

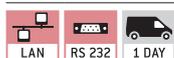

RS-232/Convertisseur WLAN KERN YKI-12

Caractéristiques techniques

- Convertisseur pour la connexion sans fil de balances, d'instruments de mesure de force, etc. à des appareils compatibles WiFi tels que des tablettes, des ordinateurs portables, des smartphones ou des réseaux, au moyen d'un port RS-232
- Les données de pesée peuvent ainsi être transmises sans fil d'une balance à un ou plusieurs appareils WiFi ou à un réseau en cas de séparation physique ou de grande distance (le logiciel correspondant doit être présent sur l'appareil WiFi, il n'est pas fourni)
- Permet une intégration directe des appareils de mesure à la plupart des réseaux d'entreprise, avec une configuration automatique via DHCP ou une attribution d'IP statique. L'accès aux données de mesure actuelles est possible à tout moment depuis l'ensemble du réseau
- Le convertisseur offre de nombreuses possibilités de configuration via l'interface web
- Compatible avec le logiciel **KERN Balance Connection**

Contenu de la livraison : convertisseur RS-232/WLAN, bloc d'alimentation (EU)

DE SÉRIE



Conseil :

en cas de commande avec une balance KERN, le câble d'interface est livré gratuitement (indiquer le modèle de balance).



Important : pour le raccordement à votre réseau, vous avez impérativement besoin d'informations de votre administrateur réseau. Discutez avec lui de l'intégration de votre appareil avant de passer commande.