
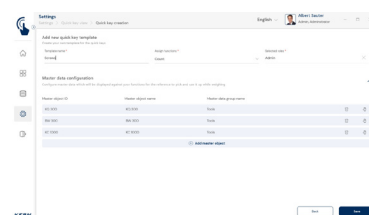


Software EasyTouch

SET-311
Quick Key

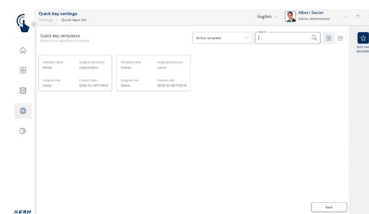

EasyTouch Quick Key – Seleccionar objetos de datos maestros con rapidez y en función del usuario

Características

- El prerequisite para este set es el programa básico SET-01 Base
- Quick Keys pueden crearse en numerosos sets, p. ej.
 - SET-01 Base
 - SET-05 Dynamic
 - SET-06 Classification
 - SET-07 Variable
 - SET-08 Take Out
 - SET-31 Tolerance
 - SET-32 Count
 - SET-33 Target Count

- Teclas de selección rápida de datos maestros: Con la tecla rápida ET se pueden visualizar permanentemente para una selección rápida determinados objetos de datos maestros. Las teclas rápidas se muestran directamente en la pantalla
- Guardar: Cada resultado de pesaje o conteo de piezas, ya se haya seleccionado convencionalmente o con una tecla rápida, se guarda relacionado con el objeto de los datos maestros seleccionado
- Selección de los objetos de los datos maestros: Los objetos determinados del maestro de datos que se muestran como teclas rápidas se pueden seleccionar o bien de forma individual, o bien como grupo definido de datos maestros que incluye los datos maestros como las teclas rápidas
- En función del usuario: Las teclas rápidas se pueden crear como un esquema con respecto a determinados roles de usuario. Esto significa que a los usuarios de un determinado rol se les muestran determinados objetos de datos maestros para su selección rápida. Esto permite, por ejemplo, que distintos departamentos de una misma empresa trabajen con distintos datos maestros sin solaparse

Información sobre licencias

- Usuarios: Con una licencia se pueden crear tantos usuarios como se desee, sin límite alguno
- Balanzas: Con su licencia puede crear y emplear un número ilimitado de balanzas
- Comunicación con el terminal de balanzas: La o las balanzas se pueden comunicar por una conexión en serie, USB, Bluetooth, Ethernet o por WiFi con un ordenador, portátil o tableta

ESTÁNDAR



OPCIÓN

