

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN
SET-16

Fecha: 18.03.2025

ESPAÑOL

Software EasyTouch

SET-16

**Batch and
Statistics**






EasyTouch Batch and Statistics – Mediciones de lotes con análisis estadístico y función de impresión colectiva

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

ESCAPARATE DE PRODUCTOS

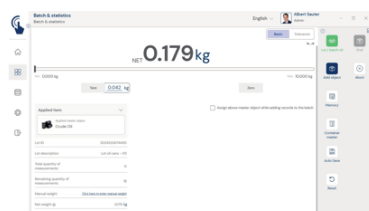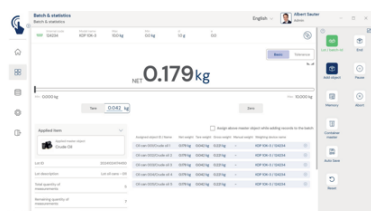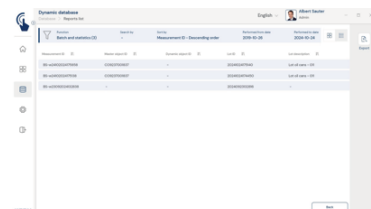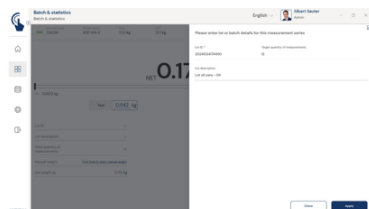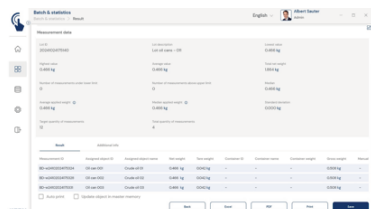

DESCRIPCIÓN

- Nota: El prerequisite para este set es el programa básico SET-01 Base
- Batch and Statistics está concebida para pesar un grupo de elementos con respecto a una denominación identificativa del grupo, como p. ej. varios artículos de un lote de producción/ ID de lote. Todos los elementos de ese grupo se pueden imprimir en un formulario. El sistema calcula automáticamente coeficientes estadísticos centrales
- Los coeficientes estadísticos siempre se calculan a partir de los pesos netos de todos los elementos de un grupo. Son los siguientes: número total de pesajes dentro de ese grupo, peso neto medio de todos los elementos de ese grupo, mediana (el promedio central) de todos elementos de ese grupo, desviación estándar de todos los valores de medición en ese grupo, valor de medición mínimo en ese grupo, valor de medición máximo en ese grupo
- Todos los datos de medición se imprimen con sus valores neto, bruto y de tara. Los valores de medición se pueden determinar en balanzas distintas. En la impresión, por lo tanto, se indica también la balanza específica en que se hayan determinado los valores de medición correspondientes
- Todos los valores de medición se guardan por separado con referencia a un número de lote central. Además, todos los objetos se pueden designar individualmente con un número de identificación y un nombre

identificativo individual

- Todos los valores de medición se imprimen en un protocolo central, de forma clara y con todos los detalles
- Empleo típico para determinar las cantidades de llenado de los productos preparados
- Identificación segura: Ofrece la posibilidad de guardar cada resultado de pesaje realizado y almacenado con un número de identificación inequívoco (identificación de objeto dinámico) y un nombre identificativo (nombre de objeto dinámico). El almacenamiento de los datos se activa de forma semiautomática o totalmente automatizada, siempre que se descargue la balanza y se vuelva a cargar de nuevo. Esto significa que el usuario ya no tiene que pulsar ninguna tecla al almacenar datos en masa, para una mayor eficiencia al trabajar
- Pausa: Las comprobaciones de inventario extensas pueden interrumpirse, guardarse en ese estado y reanudarse con posterioridad
- Las mediciones incorrectas se pueden borrar con facilidad
- Modo de tolerancia: Aquí, los pesajes individuales pueden ampliarse con una función de tolerancia. Esto significa que para cada pesaje individual se comprueba si el valor de medición correspondiente se encuentra dentro o fuera de la tolerancia definida
- Resultado en el modo de tolerancia con visualización de si los resultados de medición correspondientes se encuentran dentro o fuera de la tolerancia
- Función de memoria de alarma: Si EasyTouch se cierra de forma imprevista mientras se está realizando una serie de mediciones de estadística en lote, los datos pendientes se guardan automáticamente. Posteriormente, la serie de medición se puede abrir de nuevo y reanudar

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	SET-16
Serie de modelos	ETS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software
Grupo de productos	EasyTouch
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761360563
Modelo predecesor	SET-16-2021a

Número del arancel aduanero 85234910

Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d

FUNCIONES

Standard



Option



PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Modelo	Descripción
SET-26 1	KERN EasyTouch SET-26 1 Audio Management
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print
SET-40	KERN EasyTouch SET-40 Protect
SET-4 1 1	KERN EasyTouch SET-4 1 1 Hotkeys