


Software EasyTouch

SET-18 Container Master

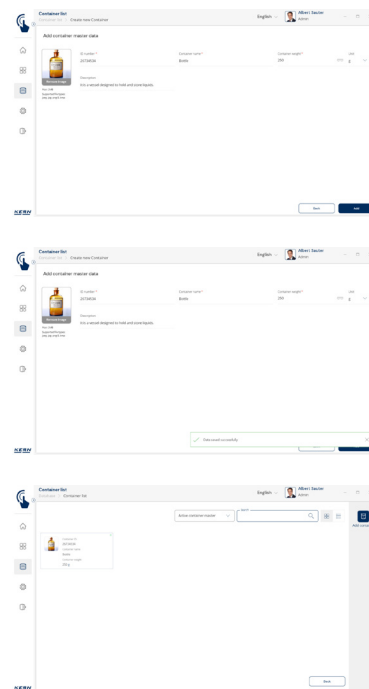

EasyTouch Container Master – Gestione centralizzata dei container

Caratteristiche

- Nota: Il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Gestione dei container: I diversi articoli vengono immagazzinati e pesati in container dello stesso tipo. La tara di questi container può essere gestita centralmente con SET-18 Container Master. Se il peso di un container cambia, la nuova tara viene semplicemente aggiornata in Container Master e applicata automaticamente a tutti gli articoli e le funzioni associate nell'applicazione
- Assegnazione fissa: È possibile assegnare in modo permanente un container a ciascun oggetto dei dati anagrafici per garantire la coerenza
- Esposizione del container: Quando si utilizza un oggetto dei dati anagrafici, gli utenti vedono in EasyTouch il container assegnato in modo permanente o un container selezionato manualmente. Questo riduce il rischio di confusione e migliora la precisione del processo di lavoro
- Selezione del container: Gli utenti possono selezionare un container anche durante il processo di pesatura senza alcuna definizione preliminare, ad esempio scansionando l'ID del container con un codice a barre. In questo modo si evitano valori errati della tara

DI SERIE



OPZIONE

