

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN SET-411

Datum: 18.03.2025

DEUTSCH

Software EasyTouch

SET-411
Hotkeys






EasyTouch Hotkeys – Schnell Tasten und externe Schalter

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

PRODUKT-SCHAUFENSTER

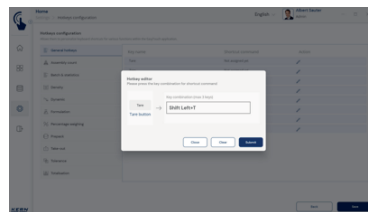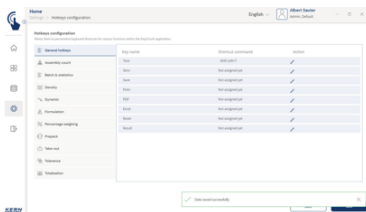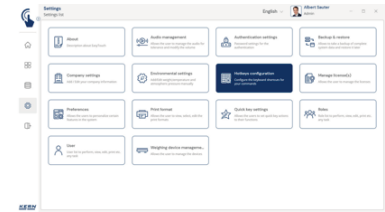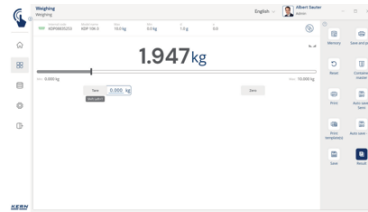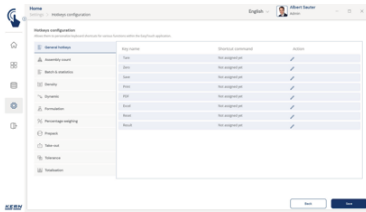

BESCHREIBUNG

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Schnellasten: Hotkeys ermöglicht die Belegung aller Schaltflächen in EasyTouch mit Tastenkombinationen. Dies vereinfacht den Zugriff auf häufig genutzte Funktionen erheblich, da die umständliche Navigation mit der PC-Maus entfällt. Stattdessen können gewünschte Aktionen schnell und direkt über die Tastatur ausgelöst werden
- Optionsartikel: Hotkeys ist eine optionale Erweiterung von EasyTouch, die alle aktiven und installierten Funktionen unterstützt. Bitte beachten Sie, dass im Preis der Zusatzfunktion keine Hardware wie Schalter, Taster oder Fußpedale enthalten ist
- Konfiguration der Schnellasten: Die Festlegung der Tastenkombinationen kann vom Systemadministrator oder einer autorisierten Person vorgenommen werden. Dabei lässt sich für jede gewünschte Funktion eine eindeutige und benutzerspezifische Tastenkombination festlegen
- Vielseitige Hotkeys-Auswahl: In EasyTouch können nicht nur spezifische Aktionstasten für bestimmte Funktionen, sondern auch allgemeine Tastenbefehle wie „Speichern“ oder „Tara“ als Hotkeys definiert werden. Diese sind dann in allen EasyTouch Funktionen anwendbar
- Aktivierung über Tastenkombination: Beispielsweise kann die TARE-Funktion einfach und schnell durch eine

Tastenkombination aktiviert werden

- Integration externer Schalter oder Tasten: EasyTouch unterstützt die Zuordnung von Tastenkombinationen zu Signalen externer HID-Geräte (Human Interface Devices) über USB. So lässt sich die Software über externe Schalter wie Not-Aus-Knöpfe oder Fußschalter bedienen, was einen hands-free Betrieb und gesteigerte Effizienz ermöglicht. Zum Ablauf: In der Steuerungssoftware des handelsüblichen USB-Gerätes wird das externe Signal einer Tastenkombination zugeordnet. Diese wird vom PC empfangen. Dort betätigt das Signal die zugeordnete EasyTouch Funktion

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	SET-411
Modell-Reihe	ETS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Software
Produktgruppe	EasyTouch
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761249738
Zolltarifnummer	85234910

Technische Daten - Verpackung & Versand

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

FUNKTIONEN

Standard



Option

