

# KERN SCD-4.0-PRO-UPG

Datum: 29.01.2025



Software Balance Connection: Downloadlink für Upgrade von SCD-40 auf SCD 40-PRO

### CONTACT

📍 Adresse

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany






☎ Telefon und Fax

Telefon : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0  
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

🌐 Internet

E-Mail : info@kern-sohn.com  
Web : www.kern-sohn.com

## PRODUKT-SCHAUFENSTER

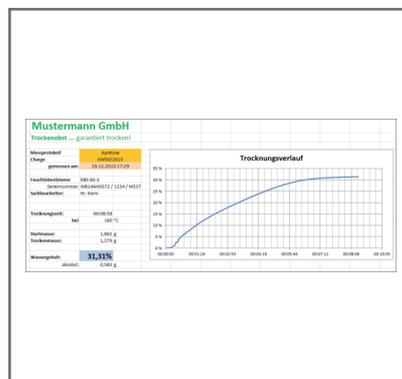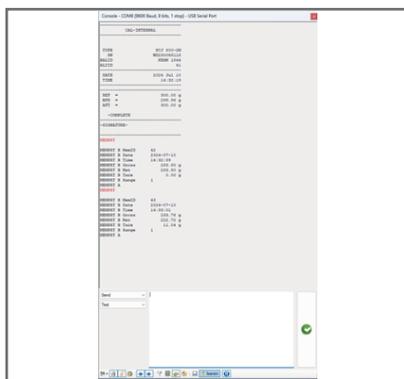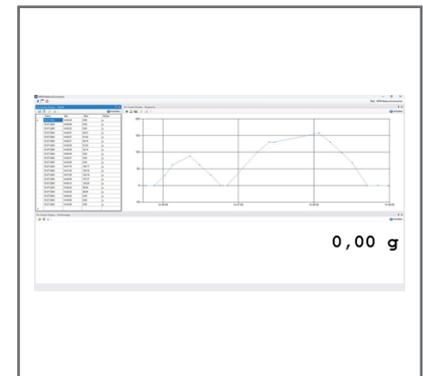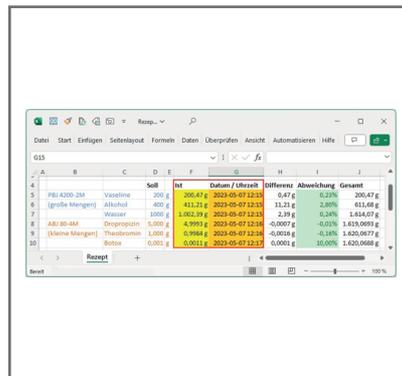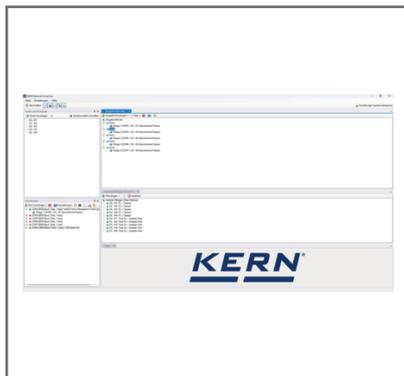

DEUTSCH

## BESCHREIBUNG

- Downloadlink für Upgrade von SCD-40 auf SCD 40-PRO: Voraussetzung ist die Software BalanceConnection SCD-40
- Für Betriebssysteme Windows 10 11
- NET Framework 481 benötigt
- Für die Installation werden vollständige Administrationsrechte benötigt
- Unterstützt Waagen und Messgeräte mit USB, RS-232 RS-485 Bluetooth, LAN- oder WLAN-Netzwerk (TCP/UDP/IP)
- Hochflexible Formatierung und Gestaltung der Ausgabe (beliebige Reihenfolge und Positionierung, Formatierung und Rundung), insbesondere auf Wunsch auch Aufzeichnung von Datum und Uhrzeit zu jedem übertragenen Wert
- Beliebige Anzahl von Geräten/Schnittstellen anschließbar, auch gleichzeitige und synchronisierte Aufzeichnung mehrerer Waagen
- Tasten- oder zeitgesteuerte Abfrage von Messwerten oder Auslösen von Gerätefunktionen, auch für

Daueraufzeichnungen

- Schnittstellen-Protokolle der KERN-Waagen (Standardkonfiguration) sind bereits vordefiniert Unterstützung anderer Waagen durch flexible Konfiguration möglich
- Passendes Schnittstellenkabel bei Bestellung mit Waage inklusive
- Viele verschiedene Übertragungs- und Aufzeichnungsmöglichkeiten:- MicrosoftR Excel/Access/Word im Vorder- oder Hintergrund- Andere Windows-Anwendung (durch Tastensimulation), z B Versandsoftware oder ERP-System (SAP, Sage,- Datei-Aufzeichnung (z B als Text oder CSV Datei)- Freier Ausdruck auf Text-, Etiketten- oder auch Büro-Druckern
- Zusätzliche Merkmale der BalanceConnection PRO Version:- ODBC/SQL Datenbanken wie SQL Server oder MySQL- Übergabe an HTTP Webservices/Web-Forms- Histogramm- Ermöglicht die Anbindung von medizinischen Waagen an Praxis-EDV-Systeme über das Gerätedatentransfer Protokoll (GDT) sowie das HL7 Protokoll- Ausführung von Programmen/Skripts über frei definierbare Kommandozeilen- Befehlssequenzen- Festlegen von Bedingungen (conditions) für bestimmte Ereignisse und die Reaktion darauf- Filter zur Stabilitätserkennung (konfigurierbare Wertübernahme)- Zentrale Konfigurationshaltung, z B im Netzwerk- On-Screen-Displays mit konfigurierbarer Benutzerschnittstelle für flexible Waagenbedienung
- Vorteile- Ideale Software, wenn erhobene Wägedaten an einen Windows PC übergeben werden sollen- Besonders geeignet für die professionelle Integration von Wägesystemen in bestehende Netzwerke, bei einer hohen Anforderung an eine automatisierte Datenübernahme und Weiterverarbeitung, für die Einbindung von Datenbanken- Automatische Aufzeichnung, z B bei Dauerversuchen- GLP-konforme Laborsoftware- Pro Lizenz beliebig viele Waagen an einem PC / Arbeitsplatz verwendbar- Branchen- und Anwendungsübergreifend einsetzbar
- Lieferumfang: Downloadlink für 1 Lizenz

DEUTSCH

**SPEZIFIKATION**

**Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen**

Modell-Artikel-Code	SCD-40-PRO-UPG
Modell-Reihe	SCD-40-PRO-UPG
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Software
Produktgruppe	BalanceConnection
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L
EAN-Code (Modell)	404576 1239968

Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	85234910

**Technische Daten - Verpackung & Versand**

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

**FUNKTIONEN**

Standard
----------

