

Software EasyTouch  
**SET-311**  
**Quick Key**

EasyTouch Quick Key – Stammdaten-Objekte schnell und nutzerbezogen auswählen





---

**CONTACT**

**KERN & SOHN GmbH**  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## PRODUKT-SCHAUFENSTER

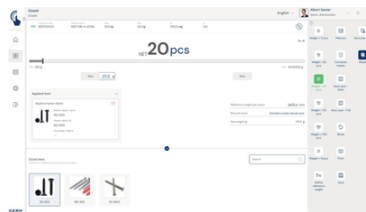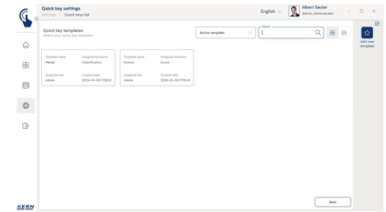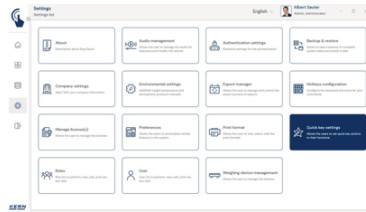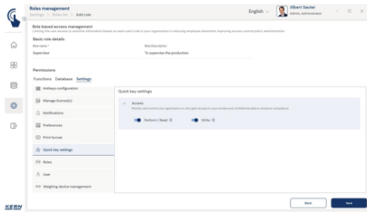

DEUTSCH

## BESCHREIBUNG

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Quick Keys können in zahlreichen Sets erstellt werden, z. B.
  - SET-01 Base
  - SET-05 Dynamic
  - SET-06 Classification
  - SET-07 Variable
  - SET-08 Take Out
  - SET-31 Tolerance
  - SET-32 Count
  - SET-33 Target Count
- Stammdaten-Schnellauswahl-Tasten: Durch ET Quick Key können bestimmte Stammdaten-Objekte zur Schnellauswahl permanent eingeblendet werden. Die Anzeige der Quick Keys erfolgt direkt am Bildschirm
- Speichern: Egal ob konventionell oder per Quick Key gewählt, jedes Ergebnis einer Wägung oder Stückzählung wird mit Bezug zum ausgewählten Stammdaten-Objekt gespeichert
- Auswahl der Stammdaten-Objekte: Die bestimmten Stammdaten-Objekte, die als Quick Key angezeigt werden, können entweder einzeln ausgewählt werden oder als definierte Stammdatengruppe, die die Stammdaten als Quick Keys beinhaltet

- Nutzerbezogen: Die Quick Keys können als Schema bezogen auf bestimmte Nutzerrollen angelegt werden. D. h. den Nutzern einer bestimmten Rolle werden bestimmte Stammdatenobjekte zur Schnellauswahl angezeigt. Damit können z. B. verschiedene Abteilungen im selben Unternehmen mit unterschiedlichen Stammdaten überschneidungsfrei arbeiten
- Speichern und Drucken: Je Schema kann eingestellt werden, ob zusätzlich zum Speicher-Vorgang auch automatisch gedruckt werden soll oder nicht
- Kommunikation Waagen-Endgerät: Die Waage(n) können per seriellem Anschluss, USB, Bluetooth, Ethernet oder per WLAN mit dem PC, Laptop oder Tablet kommunizieren

#### Lizenzinformationen

- Benutzer: In einer Lizenz können unbeschränkt viele Benutzer angelegt werden
- Waagen: Es können beliebig viele Waagen in einer Lizenz angelegt und betrieben werden
- Kommunikation Waagen-Endgerät: Die Waage(n) können per seriellem Anschluss, USB, Bluetooth, Ethernet oder per WLAN mit dem PC, Laptop oder Tablet kommunizieren

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	SET-311
Modell-Reihe	ETS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Software
Produktgruppe	EasyTouch
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L
EAN-Code (Modell)	404576 1486546
Zolltarifnummer	852349 10



Option



### Technische Daten - Verpackung & Versand

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

## FUNKTIONEN

Standard
----------