

Software EasyTouch

SET-311

Quick Key

EasyTouch Quick Key – Sélectionner rapidement des objets de données de base en fonction de l'utilisateur

CONTACT

KERN & SOHN GmbH

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany





Téléphone : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-Mail : info@kern-sohn.com

Web : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS

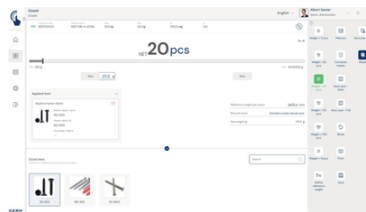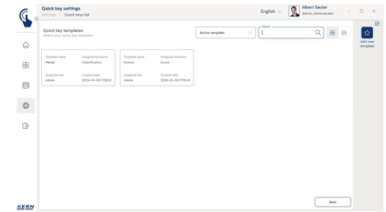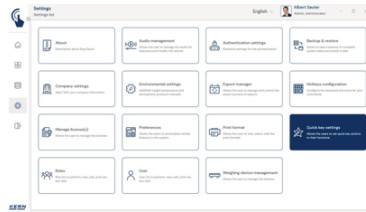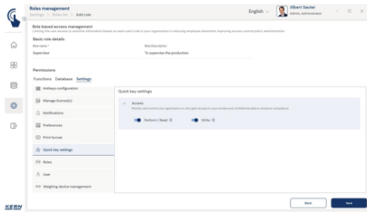

FRANCAIS

DESCRIPTION

- Remarque : le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set
- Quick Keys peuvent être créées dans de nombreux sets, par exemple
 - SET-01 Base
 - SET-05 Dynamic
 - SET-06 Classification
 - SET-07 Variable
 - SET-08 Take Out
 - SET-31 Tolerance
 - SET-32 Count
 - SET-33 Target Count
- Touches de sélection rapide des données de base : grâce à ET Quick Key, certains objets de données de base peuvent être affichés en permanence pour une sélection rapide. Les touches rapides sont affichées directement à l'écran
- Enregistrer : conventionnel ou sélectionné par touche rapide, chaque résultat d'une pesée ou d'un comptage de pièces est enregistré avec une référence à l'objet de données de base sélectionné

- Sélection des objets de données de base : les objets de données de base spécifiques qui sont affichés en tant que touches rapides peuvent être sélectionnés soit individuellement, soit en tant que groupe de données de base défini qui contient les données de base en tant que touches rapides
- Par utilisateur : les Quick Keys peuvent être créées en tant que schéma se rapportant à des rôles utilisateurs spécifiques. Cela signifie que les utilisateurs d'un certain rôle peuvent voir certains objets de données de base pour une sélection rapide. Cela permet par exemple à différents services d'une même entreprise de travailler avec des données de base différentes sans se chevaucher
- Enregistrer et imprimer : pour chaque schéma, il est possible de définir si, en plus du processus d'enregistrement, l'impression doit être automatique ou non
- Communication balance - terminal : les balances peuvent communiquer par raccordement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou WiFi avec le PC, l'ordinateur portable ou la tablette

Informations sur la licence

- Utilisateur : Il est possible de créer un nombre illimité d'utilisateurs dans une licence
- Balances : Il est possible de créer et d'utiliser un nombre illimité de balances dans une licence
- Communication balance - terminal : les balances peuvent communiquer par raccordement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou WiFi avec le PC, l'ordinateur portable ou la tablette

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	SET-311
Model-Serie	ETS
Assortiment	KERN
Type de produit	Logiciel
Groupe de produits	EasyTouch
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761486546
Numéro de tarif douanier	85234910

Délai de livraison 1 d

FONCTIONS

Standard



Option



Données techniques - Emballage et expédition